

Instrucciones de uso de Kinetigram™

PRECAUCIÓN (Estados Unidos): La ley Federal limita la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa.

Documento n.º 320-00201-ES-ES-DO-02 Rev 6 10/21

Fabricante:

Bioniks

2156 Central Avenue

Alameda, CA 94501 EE.UU.

help@bioniks.net

(510) 747-1947

<http://www.bioniks.net>



Símbolo	Norma / Reglamento	N.º de referencia de la norma / Definición del título del símbolo / Definición
	ISO 15223-1: Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información suministrada. Parte 1: Requisitos generales	5.4.3 / Consulte las instrucciones de uso / Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.
	US FDA Title 21 CFR 801.109: Dispositivos por prescripción.	Dispositivo por prescripción / El producto es un dispositivo médico y la Ley Federal (EE.UU.) limita la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa.
	Reglamento sobre productos sanitarios (Medical Device Regulation, MDR)	Artículo 20 del MDR El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en el producto o en su envase estéril. Cuando tal colocación no sea posible o no pueda garantizarse por la naturaleza del producto, el marcado CE se colocará en el envase. El marcado CE figurará asimismo en todas las instrucciones de uso y en todo envase de venta. El marcado CE se colocará antes de que el producto se introduzca en el mercado. Podrá ir seguido de un pictograma u otra marca que indique un riesgo o uso especial.
	Reglamento sobre productos sanitarios (MDR)	MDR 23.1 (g) En la información facilitada por el fabricante se incluirán los riesgos residuales que sea necesario comunicar al usuario u otras personas como limitaciones, contraindicaciones, precauciones o advertencias.
	ISO 15223-1: Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información suministrada. Parte 1: Requisitos generales	5.1.1 / Fabricante
	ISO 15223-1: Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información suministrada. Parte 1: Requisitos generales	5.1.2 / Representante autorizado en la Comunidad Europea

Símbolo	Norma / Reglamento	N.º de referencia de la norma / Definición del título del símbolo / Definición
	ISO 15223-1: Dispositivos médicos: símbolos que se utilizarán con las etiquetas de los dispositivos médicos, el etiquetado y la información que se proporcionará. Parte 1: Requisitos generales	5.7.7 / Indica que el artículo es un dispositivo médico
	ISO 15223-1: Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información suministrada. Parte 1: Requisitos generales	5.1.6 / Número de catálogo

Tabla de contenidos

1	Introducción	6
1.1	Indicaciones de uso	6
1.2	Directrices de prescripción	6
1.3	Información de seguridad – Definiciones	6
1.4	<i>Información de seguridad</i> – Lista de precauciones.....	6
1.5	<i>Otras anotaciones</i>	6
1.6	Mensajes de información, error y advertencia.....	6
2	Primeros pasos	7
2.1	Requisitos de hardware y software de Kinetigram.....	7
2.2	Instalación	8
2.3	Configuración del entorno	8
2.4	Configuración inicial del hardware	9
3	Primer Inicio de sesión	13
3.1	Arrancar la aplicación.....	13
3.2	Selección de idioma	14
3.3	Solicitud de cuenta e Inicio de sesión de usuario	14
3.4	Restablecer contraseña.....	15
3.5	Configuración inicial de Kinect.....	15
3.6	Prueba de validación de datos.....	17
3.7	Cómo descargar las instrucciones de uso y las notas de la versión para el cliente	18
4	Gestión de usuarios	19
4.1	Gestión de usuarios / Gestión de cuentas de Microsoft Azure	19
4.2	Crear / Eliminar usuarios.....	19
4.3	Página de gestión de usuarios.....	19
4.4	Tipos de usuarios de Kinetigram	20
5	Gestión de los grupos de estudio	21
5.1	Crear nuevo grupo	21
5.2	Editar un grupo existente.....	22
5.3	Eliminar grupos	22
6	Gestionar pacientes.....	23
6.1	Añadir un nuevo paciente	23
6.2	Editar un paciente existente	24
6.3	Eliminar un paciente existente	25

7	Instrucciones para la recogida de datos de movimiento (Manual de funcionamiento)	26
7.1	Paso 1: Seleccionar el paciente para la medición	26
7.2	Paso 2: Medir los parámetros de la extremidad superior de los participantes en el estudio	28
7.3	Paso 3: Cómo determinar si debe utilizar el módulo de función alta o baja	30
7.4	Paso 4: Realizar la evaluación de Kinect – Iniciar la recogida de datos	32
7.5	Comprobación doble de los datos:	41
7.6	Comprobación del sistema Kinect mientras se toman las medidas	42
7.7	Referencias adicionales.....	43
8	Transcripciones del protocolo de vídeo	45
9	Características de rendimiento	46
10	Resolución de problemas	46
10.1	Problema de conexión del servidor	46
10.2	Problemas de Kinect	47
10.3	Problemas de software y hardware	48
10.4	Otros problemas - Póngase en contacto con el equipo de Bioniks	49
10.5	Acceso remoto para el equipo de soporte de Bioniks	50
11	Informes	51
12	Retirada definitiva	52
13	Guía de referencia rápida	53
14	Apéndice A: Formato de exportación de datos de medición	54
14.1	Formato de archivo	54
14.2	Vector de coordenadas 3D para las 25 articulaciones	55

1 Introducción

1.1 Indicaciones de uso

El Kinetigram es un Software clasificado como Dispositivo Médico destinado a utilizarse con el Kinect de Microsoft para Xbox One, con el fin de evaluar la función de las articulaciones de las extremidades superiores en adultos mediante la captura de datos cinemáticos en 3D. El uso del producto está reservado a profesionales médicos **junto con otros parámetros del paciente disponibles** como una herramienta de análisis del movimiento.

1.2 Directrices de prescripción

No se facilitan directrices específicas al margen de las instrucciones de uso. Si se utiliza como parte de un estudio clínico, consulte en el protocolo del estudio cuándo resulta adecuado emplear el software Kinetigram.

1.3 Información de seguridad – Definiciones

Precaución – Información relativa a cualquier cuidado especial que haya que prestar para un uso seguro y eficaz del software Kinetigram.

1.4 Información de seguridad – Lista de precauciones

Precaución: No se base únicamente en los resultados del software para tomar decisiones sobre el tratamiento del paciente.

Precaución: No ejecute ningún otro programa de software mientras realiza procedimientos.

1.5 Otras anotaciones

Términos utilizados en estas instrucciones de uso:


Notas: Información que le ayudará en el manejo adecuado del software o en la interpretación de la información resultante.

Importante: Instrucciones que, en caso de no seguirse, pueden conducir a un diagnóstico incorrecto y/o a la imposibilidad de utilizar los datos del paciente.


1.6 Mensajes de información, error y advertencia

Dentro del software pueden encontrarse las ventanas emergentes que se muestran a continuación. Tenga en cuenta que el término Advertencia y el símbolo de advertencia es la advertencia estándar de ordenador de tipo Windows y no la definición regulatoria de advertencias (en las que existen indicios razonables de asociación entre un peligro grave y el uso del software). La evaluación de riesgos del dispositivo ha demostrado que no existen riesgos que puedan provocar peligros graves con este dispositivo.


Los mensajes de **información** se indican mediante la ventana emergente con el símbolo ⓘ, p. ej.:

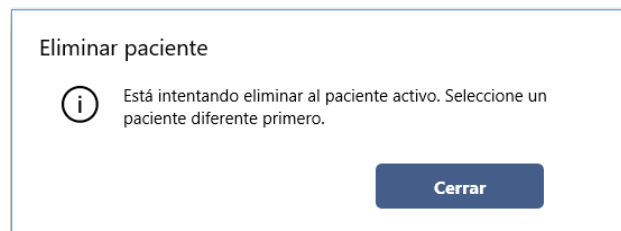

Las **advertencias** en el software se indican mediante la ventana emergente que incluye el símbolo , p. ej.:

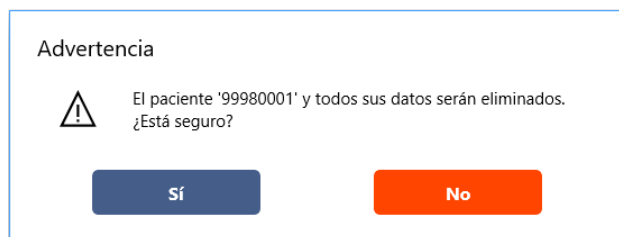

Los **errores** en el software se indican mediante la ventana emergente con el título **Error**, e.g.:

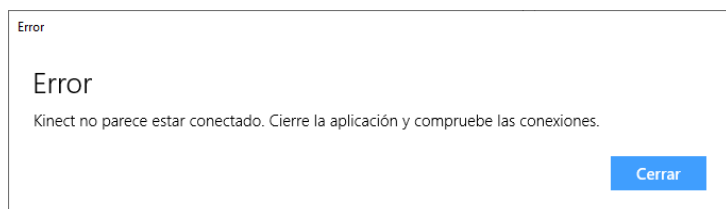

2 Primeros pasos


2.1 Requisitos de hardware y software de Kinetigram

El software Kinetigram requiere la siguiente configuración de hardware para funcionar:

- Sensor Kinect de Microsoft para Xbox One con adaptador Kinect para Windows (Xbox One S/Xbox One X)
- PC estándar (de sobremesa o portátil) con los requisitos mínimos de hardware: UCP: Quad-core i5 2,1 GHz, 64-bit, RAM: 8GB, Bus USB 3.0 dedicado (placa Intel o Renesas), Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica con capacidad para DX11 (p. ej., Intel 4400+, Nvidia GeForce GT 640+)

El PC debe tener la siguiente configuración de software:

- Sistema operativo Windows 10, 64-bit, versión 1803 (Actualización de abril de 2018) o superior
- Instalación de Kinect de Microsoft para Windows, SDK 2.0 (versión 2.0.1410 y superior)
 - Nota: La conexión inicial de la cámara Kinect exigirá permisos de ajustes para que el software pueda acceder a la salida de la cámara. Este paso debe realizarlo el personal del equipo de Bioniks durante la instalación del software.

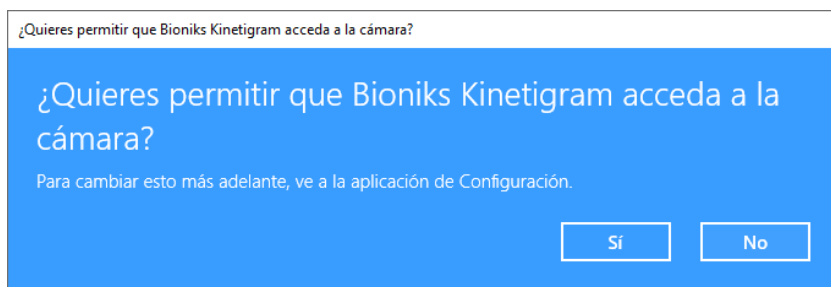

- Conexión activa de Internet (Ethernet o WiFi)

El monitor de TV debe tener las siguientes especificaciones mínimas:

- Dimensión diagonal: 53,3 cm
- Resolución: 1920x1080

2.2 Instalación

La instalación de Kinetigram debe realizarla el personal del equipo de Bioniks.

2.3 Configuración del entorno

Para seguir correctamente el movimiento durante la realización de los protocolos de Kinetigram, la cámara debe posicionarse a una distancia de unos 230 cm (90 pulgadas) respecto al participante y una altura de 115 cm (45 pulgadas), como se muestra en las figuras siguientes. El Kinect debe apuntarse hacia el participante, mientras que el ángulo debe ajustarse de manera que la cámara capte los pies y la punta del brazo cuando esté totalmente extendida por encima de la cabeza.

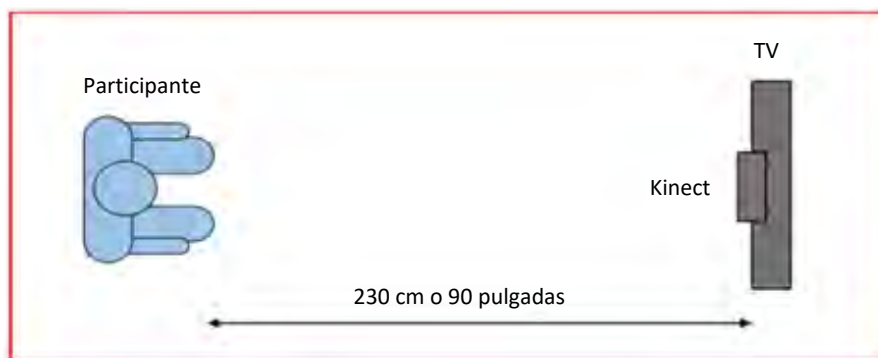


Figura 1: Configuración de Kinect. Vista superior.

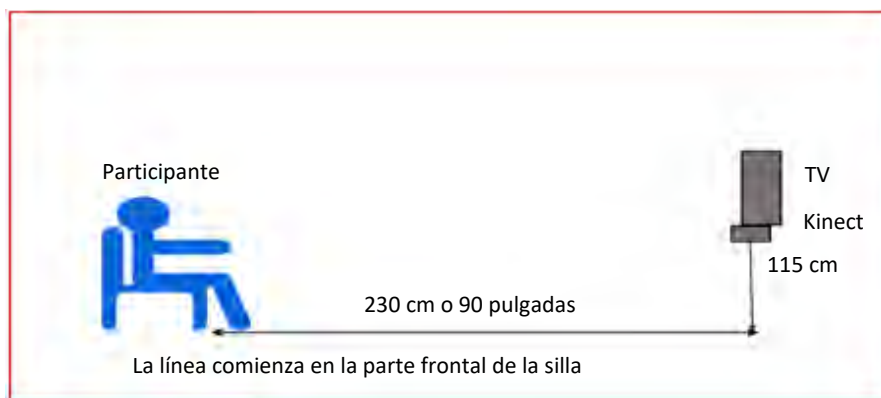


Figura 2: Configuración de Kinect. Vista lateral.

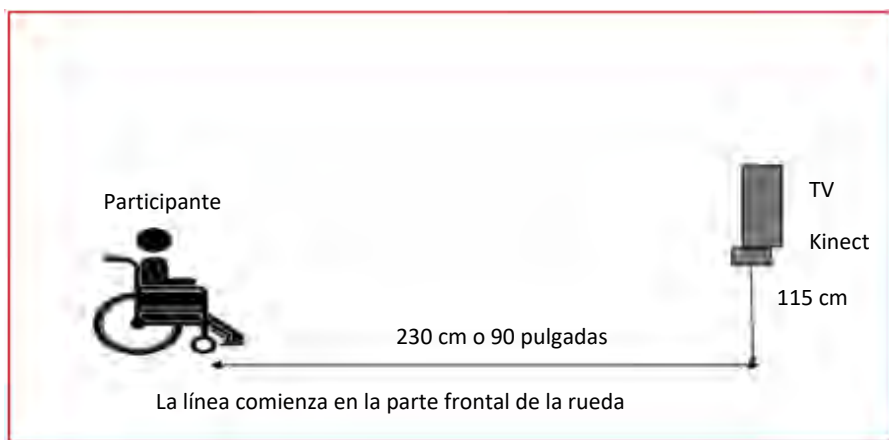


Figura 3: Configuración de Kinect para paciente en silla de ruedas. Vista lateral.


Requisitos adicionales:

- **Nota:** Asegúrese de que hay suficiente iluminación en la sala. La luz insuficiente puede reducir la velocidad de imagen de la captura.
- **Nota:** No debe haber ninguna obstrucción visual entre el sensor Kinect y el participante. Intente retirar la mayor cantidad de objetos alrededor del espacio o la sala.
- **Nota:** No debe haber objetos próximos o desorden detrás del participante.
- **Importante:** Asegúrese de que el participante está apartado de la pared al menos 0,9-1,2 m a fin de permitir la holgura de movimientos.
- **Importante:** Evite la luz solar directa sobre el sensor y el participante, ya que puede interferir en la medición.
- **Importante:** Asegúrese de que todos los cables de conexión y alimentación estén sujetos para evitar tropezones o caídas.


2.4 Configuración inicial del hardware

En la parte posterior del ordenador de sobremesa, conecte todos los componentes como se muestra en la figura siguiente (Nota: las imágenes siguientes corresponden a un Dell XPS 8930, pero la mayoría de los PC de sobremesa estándar tienen una disposición similar para la conexión de hardware):

- Conecte el cable HDMI a la TV y el otro extremo a la entrada de vídeo del PC (como se muestra a continuación; es posible que este paso ya se haya realizado durante la configuración en la sección anterior de montaje del equipo. Compruebe para asegurarse de que esté conectado adecuadamente):

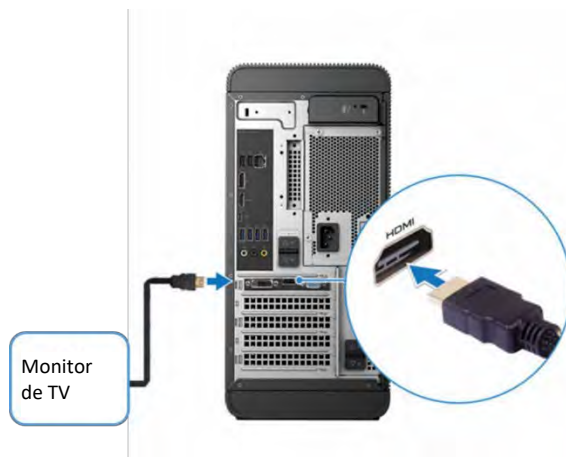

- Conecte todos los componentes de Kinect de Microsoft como se indica:

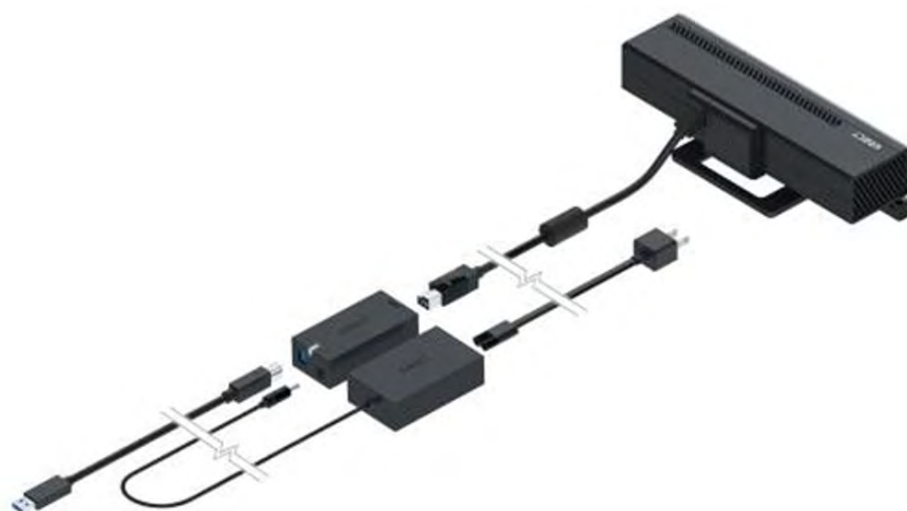

- Conecte el adaptador de USB de Kinect de Microsoft a la parte posterior del PC (en cualquiera de las ranuras azules de USB3 **¡excepto en la primera!**):



Se puede consultar más información sobre la cámara Kinect de Microsoft en las páginas de soporte de Microsoft:


- Kinect para Windows
<https://support.xbox.com/es-ES/xbox-on-windows/accessories/kinect-for-windows-info>
- Configurar Kinect para Windows v2 o un sensor de Kinect para Xbox con el adaptador de Kinect para Windows
<https://support.xbox.com/es-ES/xbox-on-windows/accessories/kinect-for-windows-v2-setup>
- Conecte el conector de alimentación:




- Conecte el Ethernet o el Wi-Fi

Compruebe con el personal informático si el ordenador puede conectarse a internet por cable. Si es así, el cable de Ethernet para la red del centro o del hospital debe conectarse en la parte posterior del PC. Es posible que Windows deba configurarse manualmente para el acceso a Internet.

Si utiliza Wi-Fi, seleccione su red Wi-Fi haciendo clic en el símbolo  en su barra de tareas de la pantalla de inicio de sesión. Seleccione **Conectar**:

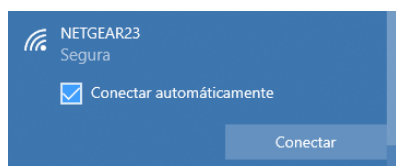


E introduzca su clave de seguridad:

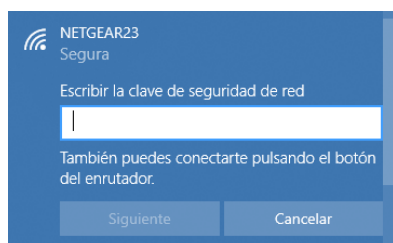

Consulte con el personal informático para obtener las credenciales de registro necesarias.

- Conecte el ratón y el teclado

El ratón y el teclado pueden conectarse en la parte frontal o trasera de los puertos de USB del PC (marcados en color rojo a continuación). Si utiliza ratón y teclado inalámbricos, se suministrará una mochila USB. La mochila debe insertarse en uno de los puertos frontales de USB. Asegúrese de encender o activar la alimentación en su teclado y ratón inalámbricos.

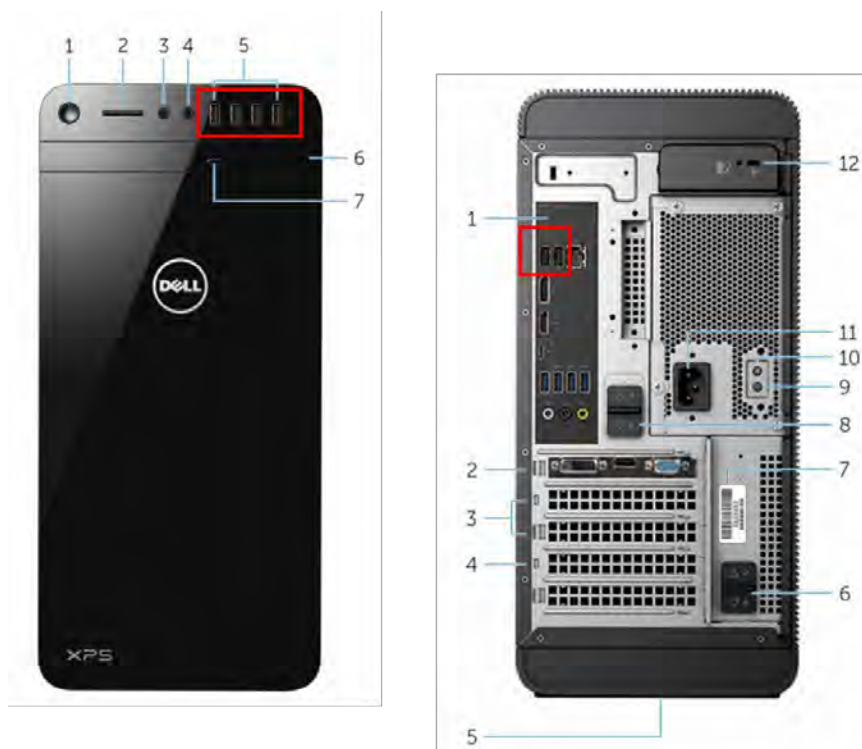

Una vez que todos los componentes de hardware estén conectados, encienda la TV (monitor) y pulse el botón de encendido en el PC. Ya está listo para acceder al PC y comenzar el proceso de primer Inicio de sesión.

3 Primer Inicio de sesión


3.1 Arrancar la aplicación

Una vez encendido el PC, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de Windows 10, donde puede usar sus credenciales para iniciar sesión en Windows. En los PC configurados por Bioniks, se le facilitarán los datos de inicio de sesión para dos cuentas preconfiguradas: la cuenta de usuario normal de Windows y la cuenta de administrador de Windows. La cuenta de usuario normal de Windows debe usarse para realizar las mediciones con el software Kinetigram, mientras que la cuenta de administrador puede emplearse para gestionar el PC (p. ej., realizar actualizaciones necesarias, instalar software etc.).


Importante: Por razones de seguridad, la aplicación solo debe usarse con la cuenta de usuario normal de Windows (no la de administrador).

Importante: Antes de ejecutar la aplicación Kinetigram, asegúrese de que el PC está conectado a Internet, ya sea por conexión inalámbrica (Wi-Fi) o con cable (LAN). Es necesaria una conexión activa a Internet para utilizar el software.

Una vez que haya iniciado sesión en el PC, abra el programa [Bioniks Kinetigram](#) en el escritorio.

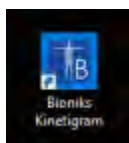

Después de abrirse Bioniks Kinetigram, la aplicación mostrará la página de Inicio de sesión.

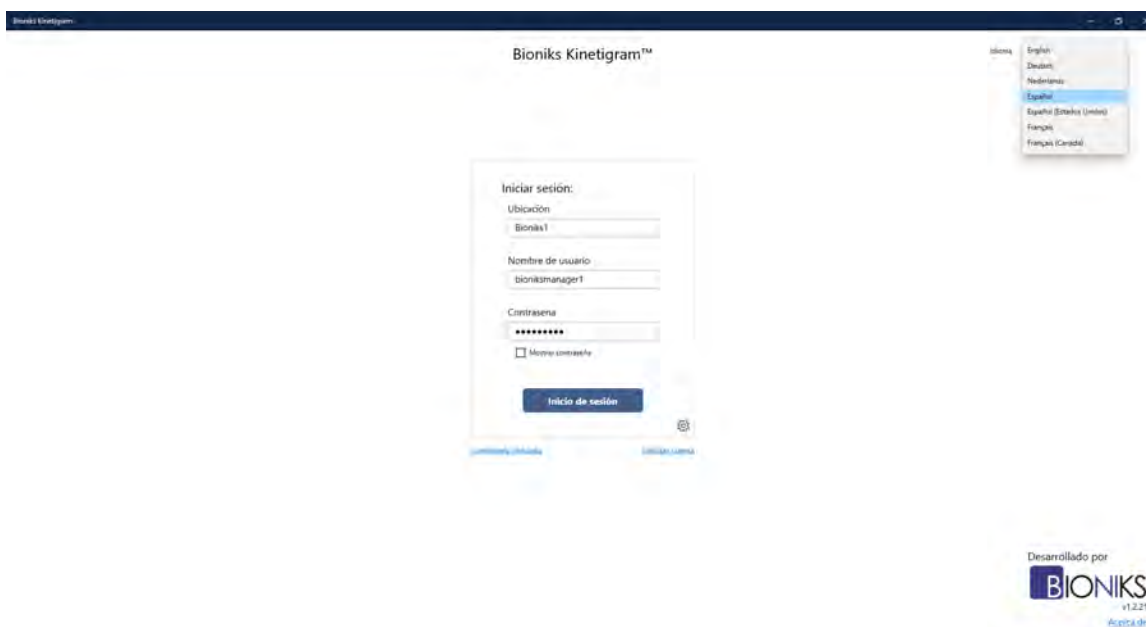

Importante: No ejecute ningún otro software mientras realiza procedimientos, ya que el software podría interferir en la recogida de datos.

3.2 Selección de idioma

Antes de iniciar sesión en Kinetigram, seleccione el idioma preferido para la interfaz de usuario (en la página de inicio de sesión). Para ello, haga clic en el menú desplegable de selección de idioma (esquina superior derecha) y seleccione el idioma preferido. Tenga en cuenta que el idioma puede cambiarse en cualquier momento durante una sesión, cerrando la sesión del software y volviendo a la página de inicio de sesión. Además, la porción de audio de los vídeos de mediciones del paciente se facilita en el idioma local y puede seleccionarse de forma independiente en la página de Medidas. Al igual que con la interfaz de usuario, el idioma del vídeo puede cambiarse en cualquier momento. El idioma de audio predeterminado se configura durante la instalación del software.

3.3 Solicitud de cuenta e Inicio de sesión de usuario

La información de inicio de sesión de Kinetigram la gestiona Bioniks a través del servicio de autenticación Microsoft Azure B2C¹. Las solicitudes de nuevos usuarios deben enviarse a help@bioniks.net. Cada nuevo usuario recibirá un enlace por correo electrónico para crear el inicio de sesión mediante un formulario web dedicado (véase más adelante).

¹ <https://azure.microsoft.com/es-ES/services/active-directory-b2c/>

A screenshot of a web browser displaying a registration form for Bioniks. The form is centered on a dark blue background. It features a white box with the Bioniks logo at the top. Below the logo are input fields for 'Nombre de usuario', 'Nueva contraseña', 'Confirmar nueva contraseña', and 'Dirección de correo electrónico'. A blue button labeled 'Enviar código de verificación' is positioned below these fields. Further down are input fields for 'Nombre', 'Apellido', and 'Puesto', followed by a light blue 'Crear' button. The browser's address bar shows a URL related to Microsoft authentication.

Visite el enlace en un navegador de Internet para acceder al formulario. En el formulario, introduzca el nombre de usuario, la contraseña y la dirección de correo electrónico. Cada usuario debe seleccionar un nombre de usuario único y establecer una contraseña que cumpla con las reglas de contraseñas seguras de Azure. Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres y, como máximo, 64 caracteres, incluidos tres de los siguientes tipos de caracteres: letras minúsculas, letras mayúsculas, números y símbolos. Antes de continuar, deberá verificarse la dirección de correo electrónico haciendo clic en [Enviar código de verificación](#). Después de unos momentos, recibirá un código numérico en su correo electrónico. Introduzca el código en el formulario y haga clic en [Comprobar código](#). Después de la verificación satisfactoria del correo electrónico, introduzca el resto de la información de inicio de sesión en el formulario web (nombre, institución, n.º del centro de estudio [si procede], etc.). Haga clic en [Crear](#) para completar la creación de la cuenta. Una vez creada la cuenta, Bioniks Service activará su cuenta para utilizarla con la aplicación Kinetigram. La activación de la cuenta puede llevar hasta 24 horas. Una vez activada la cuenta, puede abrir la aplicación e iniciar sesión.

3.4 Restablecer contraseña

Si ha olvidado la contraseña, puede solicitar un restablecimiento de contraseña desde la página de inicio de sesión de Kinetigram haciendo clic en el enlace [Restablecer contraseña](#). El enlace abrirá un formulario web, donde puede solicitar el restablecimiento de contraseña. Necesitará introducir su nombre de usuario y su dirección de correo electrónico para entrar en la cuenta. Si se verifica la cuenta, las instrucciones para restablecer la contraseña se enviarán a esta dirección de correo electrónico. Si no conoce su nombre de usuario, envíe un correo electrónico a help@bioniks.net para pedir instrucciones.

3.5 Configuración inicial de Kinect

Antes de realizar la primera medición y cada vez que se reposicione el sistema, debe asegurarse de que la cámara Kinect está configurada correctamente. Consulte las secciones 2.3 y 2.4 para posicionar la cámara Kinect y la silla y configurar el hardware del sistema.


Una vez que el Kinect esté correctamente conectado, debe comprobar que la cámara ve al participante. Para abrir la vista de cámara, seleccione **Configuración de Kinect** en el Menú. Se abrirá la ventana de Comprobación del Sistema Kinect. La Comprobación del Sistema Kinect realiza varias comprobaciones diagnósticas para asegurar que el sistema está configurado adecuadamente para la grabación:

1. Encendido de Kinect – comprueba que la cámara Kinect está encendida y funcionando con un mínimo de 15 FPS
2. Seguimiento de esqueleto – comprueba que el seguimiento del esqueleto está activo
3. Único esqueleto presente – comprueba que solo se sigue a una persona
4. Cuerpo entero visible – comprueba que el esqueleto que se va a seguir está plenamente visible y no oculto


Si la comprobación del apartado se ha superado, se mostrará una marca de comprobación verde:  .

Si la comprobación del apartado no se ha superado, se mostrará una marca de comprobación roja:  .

Para obtener más información sobre cada apartado, seleccione el apartado de la lista. Se mostrará la información sobre cómo mitigar el problema en el área rectangular amarilla. En la figura siguiente, el participante está demasiado cerca de la cámara y no se muestran sus pies, por lo que el apartado Cuerpo entero visible está marcado con una marca de comprobación roja.

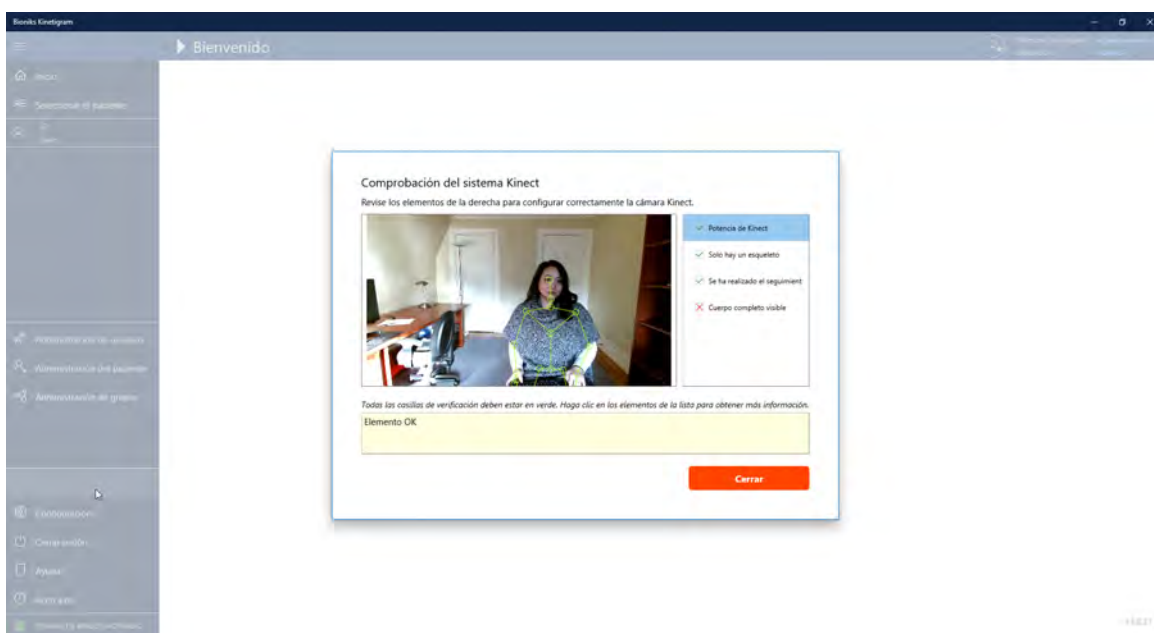

Una vez que el participante se ha movido hacia atrás, las cuatro marcas de comprobación están en verde y el sistema está preparado correctamente para la realización de la medición.

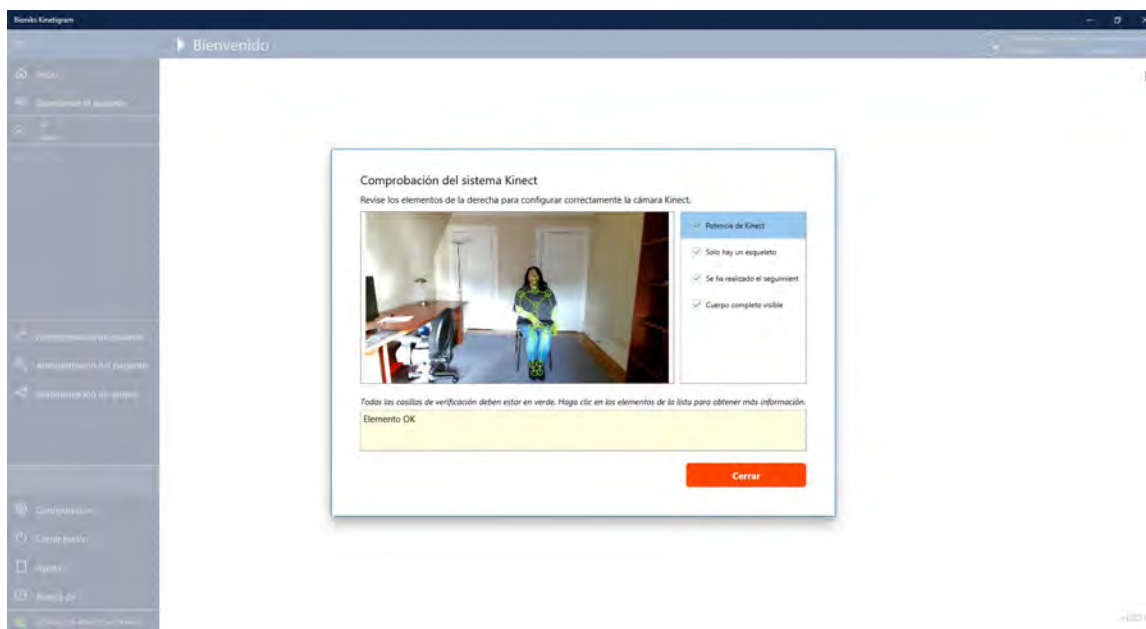

Los siguientes consejos pueden ser útiles para obtener todas las marcas de comprobación verdes:

- Coloque la silla a la distancia correcta, como se muestra en la Figura 1 y la Figura 2.
- Asegúrese de que la cámara Kinect está a la altura correcta, de acuerdo con la Figura 2.
- Asegúrese de que no haya luz solar directa en el sujeto o la cámara que pueda interferir en el seguimiento.
- Compruebe que se utilice la silla correcta para la evaluación.
- Ajuste/apunte/incline la cámara para que los pies del sujeto aparezcan visibles en la imagen. Asegúrese de que está visible el cuerpo entero (cuando el brazo está totalmente extendido por encima de la cabeza) y de que los pies están separados y apoyados en el suelo.

Importante: Asegúrese de que todos los apartados de comprobación del sistema Kinect están marcados como válidos para realizar mediciones con participantes.

3.6 Prueba de validación de datos

Importante: Antes de recoger datos con participantes del estudio, cada evaluador debe recopilar un conjunto de datos de validación que serán examinados y verificados por el equipo de Bioniks.

El evaluador debe usar un sujeto control (sano) voluntario para esta prueba. Deben recogerse los datos del siguiente protocolo:

Evaluación	Módulo	Ing.	Nivel	Velocidad	Lado	Peso
1	Espacio de trabajo accesible (ETA)	RWS	Alto	Normal	Derecho	No
2	Espacio de trabajo accesible (ETA)	RWS	Alto	Normal	Izquierdo	No
3	Espacio de trabajo accesible (ETA)	RWS	Alto	Normal	Derecho	Sí, 500 g
4	Espacio de trabajo accesible (ETA)	RWS	Alto	Normal	Izquierdo	Sí, 500 g
5	Espacio de trabajo funcional (ETF)	FWS	Alto	Normal	Derecho	No
6	Espacio de trabajo funcional (ETF)	FWS	Alto	Normal	Izquierdo	No


Consulte en la sección «Instrucciones para la recogida de datos de movimiento (Manual de funcionamiento)» (7) el modo de realizar estas mediciones. Una vez recogidos los datos, el evaluador debe ponerse en contacto con el equipo de Bioniks cuya información de contacto aparece en este manual, para realizar el análisis de los datos.

3.7 Cómo descargar las instrucciones de uso y las notas de la versión para el cliente

Las *Instrucciones de uso* pueden consultarse dentro de la aplicación Kinetigram, seleccionando [Ayuda](#) en el menú (flecha roja). Use las teclas RePág/AvPág o el desplazador de su ratón para cambiar entre las páginas del documento. También puede usar <Ctrl>+<desplazamiento del ratón> para acercar/alejar el documento. Para verlas mejor o para imprimirlas, puede abrir las *Instrucciones de uso* en un visor externo de PDF haciendo clic en el enlace [Abrir en Explorador de Internet](#) en la parte inferior de la pantalla (flecha verde).



Las notas de la versión para el cliente son accesibles haciendo clic en el botón [Acerca de](#) en el menú (flecha roja) y pulsando el enlace a [Notas de la versión para el cliente](#) (flecha verde). Esto abrirá el sitio web de Bioniks, donde las notas de la versión para el cliente pueden abrirse haciendo clic en el enlace para el idioma deseado y visualizarse en el visor de PDF predeterminado de su sistema (p. ej., Edge, Acrobat Reader).

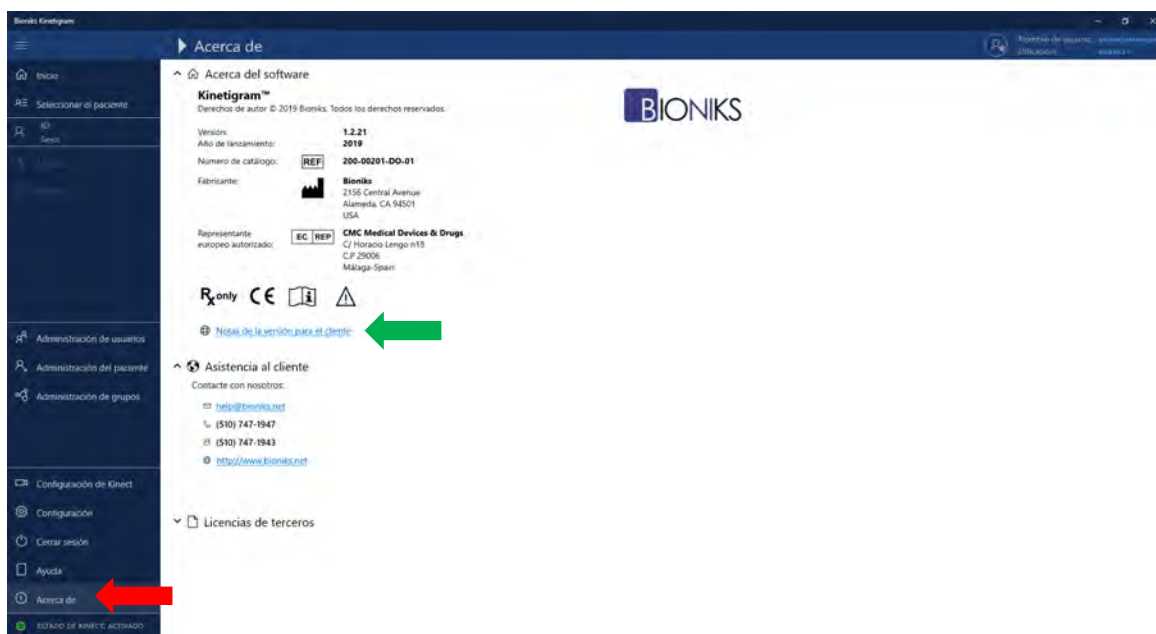

4 Gestión de usuarios

4.1 Gestión de usuarios / Gestión de cuentas de Microsoft Azure

La autenticación y los datos de los usuarios de Kinetigram están gestionados por el servicio de autenticación Microsoft Azure B2C. El servicio de autenticación está integrado en la plataforma de identidad de Azure Active Directory (Azure AD), una solución de calidad empresarial para la gestión de identidad y acceso en la nube. Las cuentas que son necesarias para el acceso a Kinetigram son exclusivamente cuentas locales (locales para el directorio Azure), almacenadas en un solo espacio seguro en la nube que está gestionado por Bioniks en servidores ubicados en los EE.UU. Ninguna autenticación o información personal se comparte o recupera desde servicios externos, como las plataformas de los medios sociales. El marco de Azure y la aplicación Bioniks Kinetigram cumplen el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Por lo tanto, se conservan los siguientes derechos individuales:

- Bioniks nunca compartirá ninguna información con un tercero.
- Los usuarios pueden ver y editar todos los datos asociados a su identidad.
- Las cuentas de los usuarios y todos los datos relacionados con la identidad de un usuario se pueden eliminar.
- Las violaciones de seguridad de los datos, si las hubiera, deberán notificarse a un sitio web.


Escriba un correo electrónico al servicio de Bioniks, a help@bioniks.net para preguntas relativas a la gestión de usuarios y al RGPD.

4.2 Crear / Eliminar usuarios

Las solicitudes de nuevos usuarios o de eliminación de usuarios deben enviarse a help@bioniks.net. El proceso para la creación de una nueva cuenta se describe en la sección 3.3.

4.3 Página de gestión de usuarios

La página de gestión de usuarios en la aplicación muestra la lista de usuarios activos actuales asignados al centro. Esta página incluye enlaces para actualizar su propia información de cuenta (botón [Editar perfil](#)) o restablecer la contraseña (botón [Restablecer contraseña](#)).

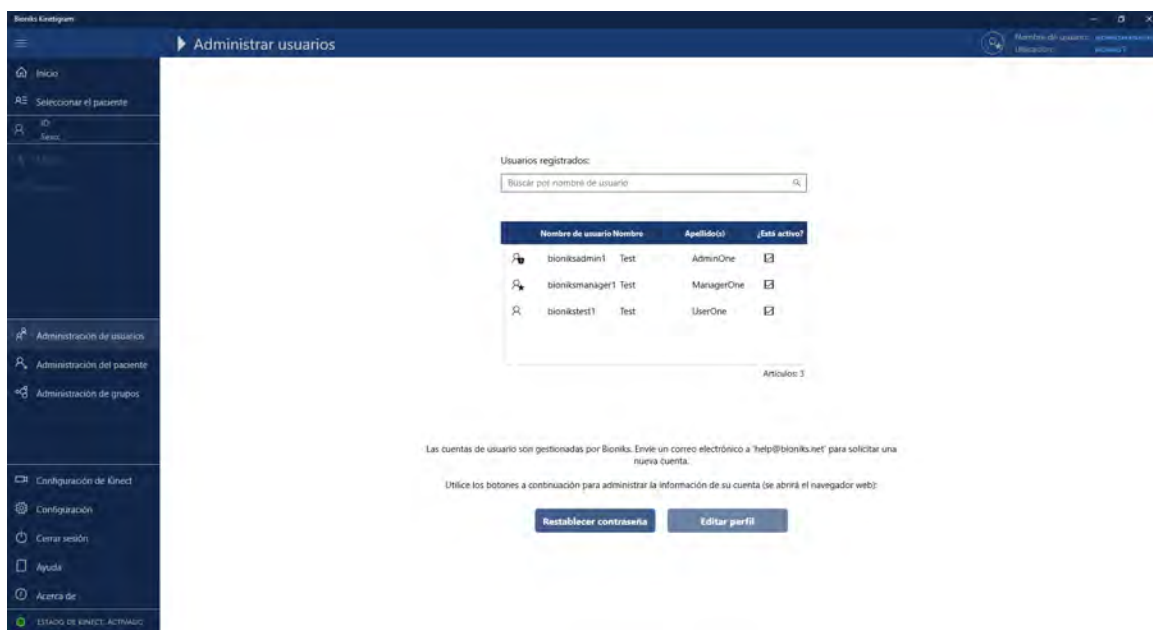

4.4 Tipos de usuarios de Kinetigram


El software Kinetigram opera con tres tipos de usuarios que tienen diferentes niveles de privilegios para usar la aplicación:

1. **Usuario normal:** asignado al evaluador o los evaluadores del centro
2. **Usuario con poderes:** asignado a un gestor del centro
3. **Administrador:** asignado al Administrador de Bioniks

Cada usuario tiene diferentes autorizaciones para realizar tareas dentro de la aplicación (véase el gráfico siguiente).

Tareas autorizadas	 Usuario normal	 Usuario con poderes	 Administrador
Cambiar la propia información de cuenta	X	X	X
Cambiar la propia contraseña	X	X	X
Cambiar el rol de administración de la cuenta		X	X
Crear/editar/eliminar grupos de estudio		X	X
Crear/editar nuevos pacientes	X	X	X
Eliminar pacientes		X	X
Acceder a los registros de exportación		X	X
Establecer el formato de ID del paciente en la página Configuración			X

El nivel de autorización está indicado por el icono de usuario (véase el gráfico anterior) que se muestra en la esquina superior derecha de la barra del título de la aplicación:

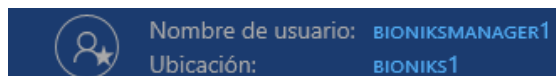


5 Gestión de los grupos de estudio

Los grupos de estudio se usan para organizar a los participantes en grupos a fin de diferenciar fácilmente a los participantes que pertenecen a un estudio particular o distinguir a los pacientes de los sujetos de control. Pueden predefinirse varios grupos de estudio cuando ejecute el sistema por primera vez. Pueden añadirse grupos adicionales según sea necesario.


Para gestionar los grupos, seleccione [Administración de Grupos](#) en el menú.

5.1 Crear nuevo grupo


Sólo los gestores pueden crear nuevos grupos en [Administración de grupos](#). Los grupos activos están enumerados en la página de Administración de grupos.

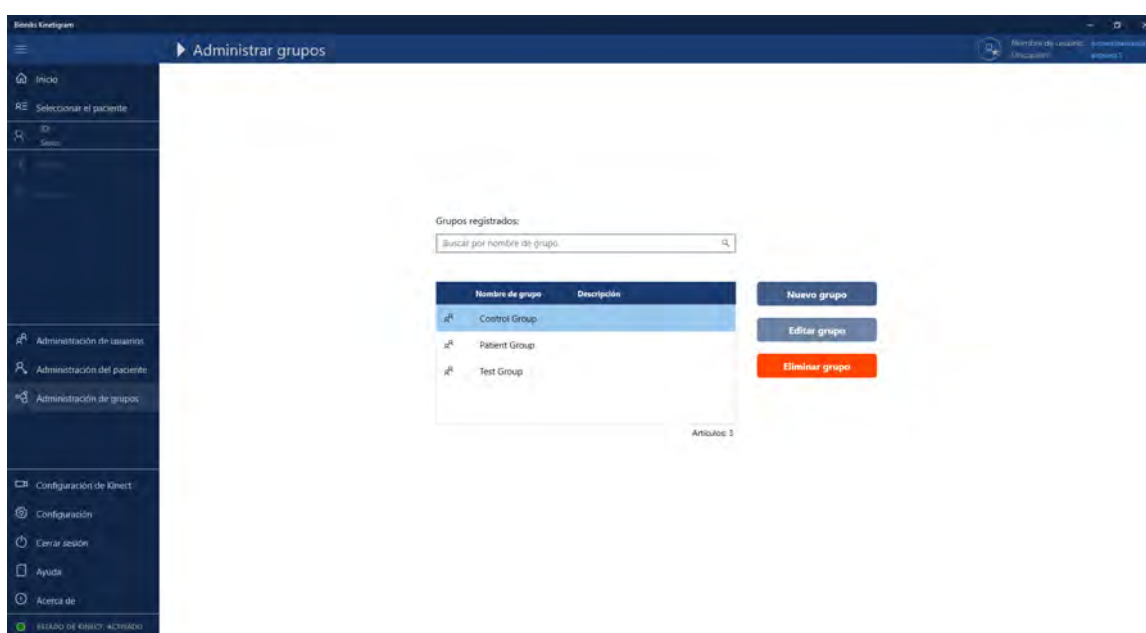

Para añadir un nuevo grupo, seleccione el [Nombre de grupo](#) y añada Descripción/comentarios. El nombre de grupo debe ser único. El sistema no le permitirá crear dos grupos con el mismo nombre.

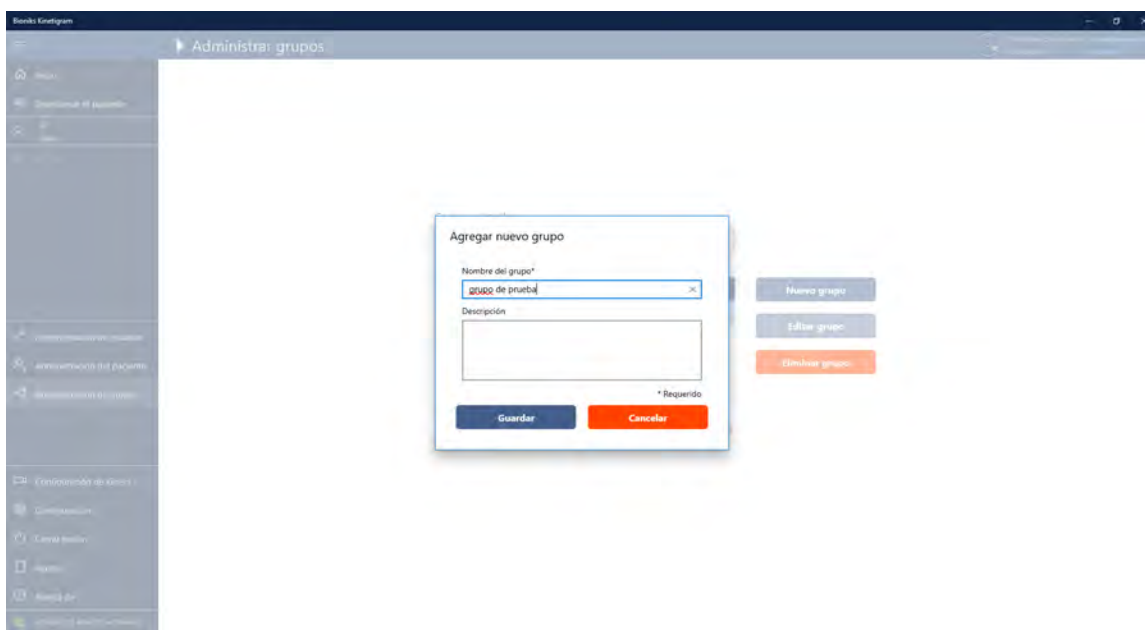


5.2 Editar un grupo existente

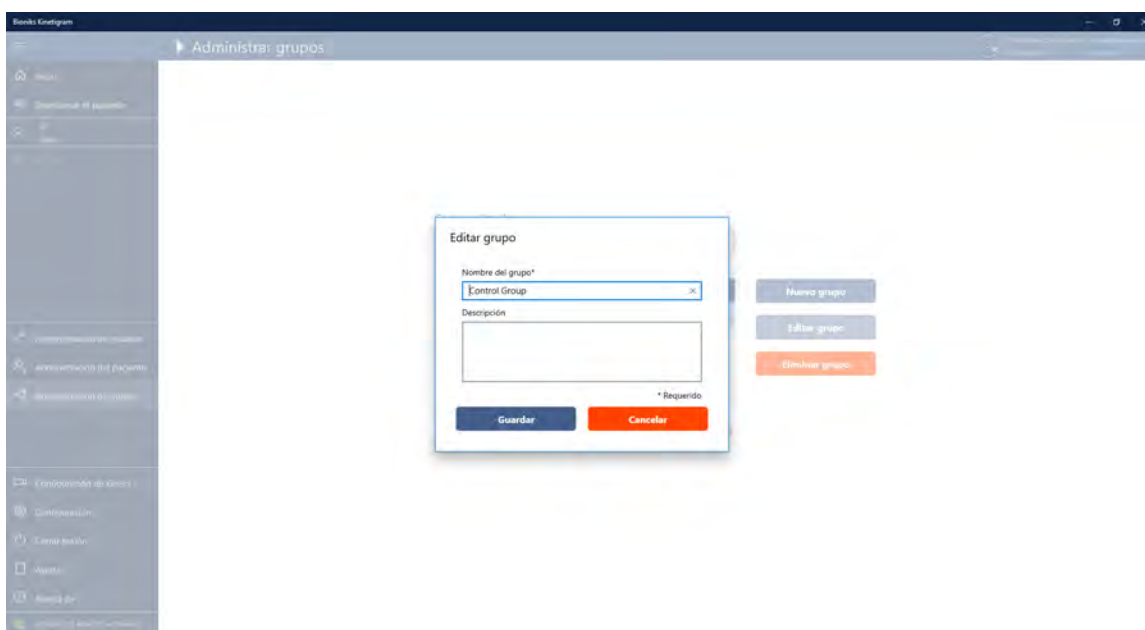

Puede editar un grupo existente desde la página de Administración de grupos. Para editar un grupo existente, seleccione primero el grupo de la lista y pulse el botón **Editar grupo**. Se mostrará la ventana Editar grupo. Cuando haya terminado de editar la información del grupo, pulse **Guardar** para actualizar la información o **Cancelar** para desechar la nueva información.

5.3 Eliminar grupos


Para eliminar un Grupo existente, vaya a la página Administración de grupos y seleccione el grupo que desea eliminar de la lista. Pulse el botón **Eliminar grupo**.

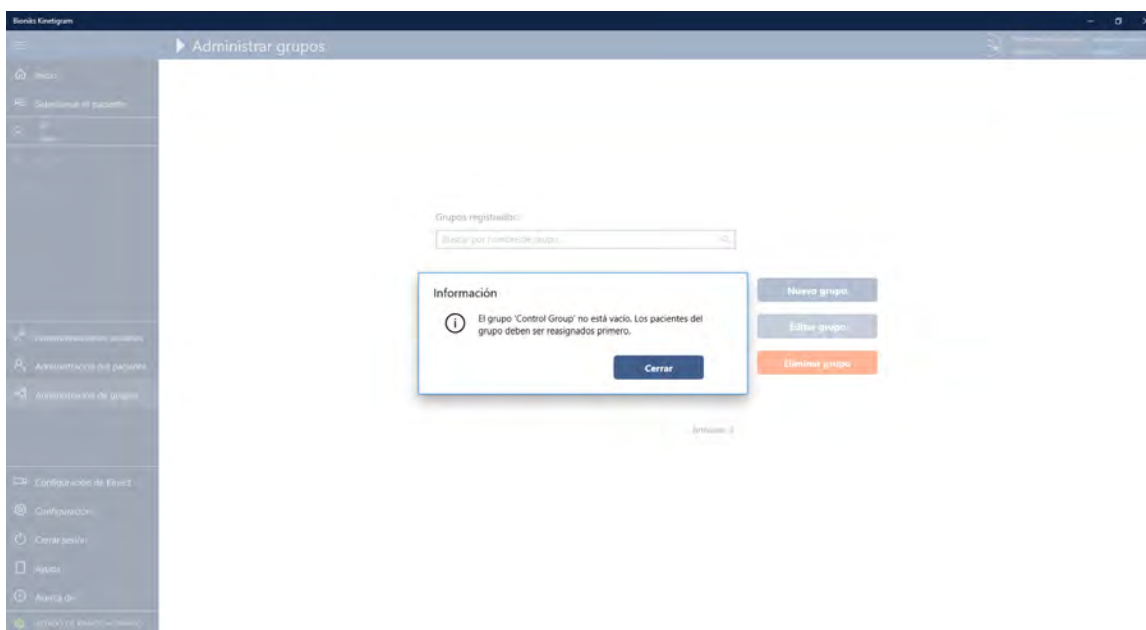

Importante: Un grupo no se eliminará si tiene pacientes asignados a dicho grupo. Primero, reasigne todos los pacientes que están en el grupo a través del diálogo Editar el paciente y luego, elimine el grupo.

6 Gestionar pacientes

Para gestionar pacientes, seleccione [Gestión del paciente](#) del menú. Puede buscar pacientes existentes introduciendo la ID del paciente en el recuadro de búsqueda. Puede incluir pacientes que están desactivados en la búsqueda.

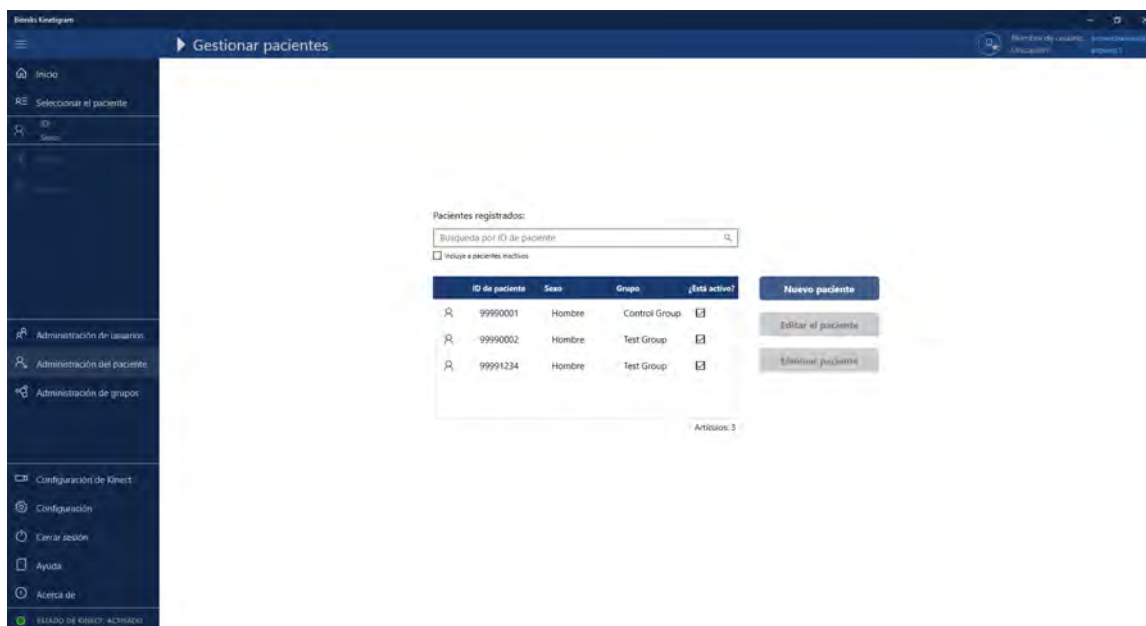

6.1 Añadir un nuevo paciente

Para añadir un nuevo paciente, seleccione [Nuevo paciente](#) de la lista. En el diálogo [Agregar nuevo paciente](#),

introduzca la ID del paciente, el grupo de estudio, el sexo, la estatura, el peso y si es zurdo o diestro.

La información sobre estatura y peso puede introducirse en unidades del sistema métrico (estatura en *cm*, peso en *kg*) o bien en unidades imperiales (estatura en *pulgadas*, peso en *libras*). El diálogo las convertirá automáticamente de una a otra al marcar el correspondiente botón de unidades. Pulse **Guardar** para guardar la información del paciente.

Nota: La ID del paciente se puede restringir a un formato específico. El Administrador de Bioniks puede especificar el formato de ID del paciente a través de la Página [Configuración](#). El formato de ID del paciente puede aparecer diferente a las capturas de pantalla mostradas en este documento.

Importante: Asegúrese de cumplir los requisitos de etiquetado/ID del estudio. No añada ninguna otra información identificable.

6.2 Editar un paciente existente

Para editar los datos de un paciente existente, seleccione el paciente que desea editar de la lista de la Página [Gestión del paciente](#) y pulse el botón **Editar el paciente**. Una vez actualizada la información, puede guardarla pulsando el botón **Guardar** o desecharla pulsando el botón **Cancelar**.

Gestionar pacientes

Editar el paciente

ID de paciente* (ID de control de 4 dígitos) (ID de paciente de 4 dígitos)
 99990001

Grupo*
 Control Group

Sexo*
☒ Hombre ☐ Mujer ☐ Sin informe

Lateralidad*
 Sin preferencias

Altura (cm)*
 165.1

Peso (kg)*
 55.0

Unidades:
☐ Estados Unidos ☒ Métrico

Está activo*
☒ Sí ☐ No

* Requerido

Guardar **Cancelar**

Nuevo paciente
Editar al paciente
Eliminar paciente

6.3 Eliminar un paciente existente

Para eliminar un paciente existente, vaya a [Gestión del paciente](#) y seleccione de la lista el paciente que desee eliminar. Seleccione **Sí** cuando se le pregunte si elimina el paciente.

Gestionar pacientes

Pacientes registrados:
 Buscar por ID (ID de paciente)

☐ Ver pacientes inactivos

Advertencia

⚠ El paciente '99990001' y todos sus datos serán eliminados. ¿Está seguro?

Sí **No**

Nuevo paciente
Editar al paciente
Eliminar paciente

Importante: Los pacientes con datos Kinect existentes no pueden borrarse de la aplicación, solo pueden desactivarse. Puede reactivar al paciente buscando en la lista de todos los pacientes (incluidos los inactivos) de la página Gestión del paciente y editando la información del paciente.

7 Instrucciones para la recogida de datos de movimiento (Manual de funcionamiento)

Importante: Siga detalladamente las instrucciones siguientes para realizar las mediciones con los participantes del estudio.

Frecuencia de administración: La medición debe administrarse tal como se identifique en el protocolo del estudio con el que vaya a utilizarse Kinetigram.

Duración de la administración: Cada prueba dura aproximadamente 1-2 min. El tiempo total de prueba es de alrededor de 15-20 min. La duración de la evaluación puede variar dependiendo del estado del paciente y otros factores externos.

Hora de administración: Dado que la medición exige ejercicio físico, que puede requerir un esfuerzo considerable a algunos participantes, deberá administrarse al menos 15 minutos después de una comida.

Protocolo y métodos de medición:

Para recopilar los datos de movimiento en cada visita, deberán seguirse los siguientes pasos:

1. Seleccione el paciente existente (o cree un nuevo paciente si es necesario)
2. Obtenga las medidas antropométricas de la extremidad superior
3. Determine si el paciente tiene funcionalidad baja o alta
4. Recopile los datos de Kinect de acuerdo con el protocolo
5. Compruebe que se han recopilado todos los datos

Nota: El idioma del vídeo puede adaptarse a la preferencia personal del sujeto antes de efectuar las mediciones con Kinect.


Importante: El ordenador debe estar encendido y conectado a Internet al menos 30 minutos antes de tomar medidas con la aplicación Kinetigram para completar cualquier actualización pendiente de Windows.

7.1 Paso 1: Seleccionar el paciente para la medición


Para seleccionar al paciente para la medición, elija [Seleccionar el paciente](#) del menú. La página mostrará una lista de todos los pacientes activos. La lista se puede filtrar seleccionando el grupo de estudio apropiado. Para encontrar el paciente, puede seleccionarlo de la lista o escribir la ID del paciente. Tenga en cuenta que el recuadro de búsqueda filtrará automáticamente a los pacientes que se ajusten al patrón escrito introducido. Los filtros de búsqueda pueden reiniciarse pulsando el conmutador de cambio de filtros situado en la parte inferior de la lista.

Si es la primera visita del participante, puede crear su información pulsando el botón [Agregar rápid.](#) O introduciendo sus datos en la sección [Gestión del paciente](#).


Después, seleccione el paciente de la lista y pulse el botón [Continuar](#).

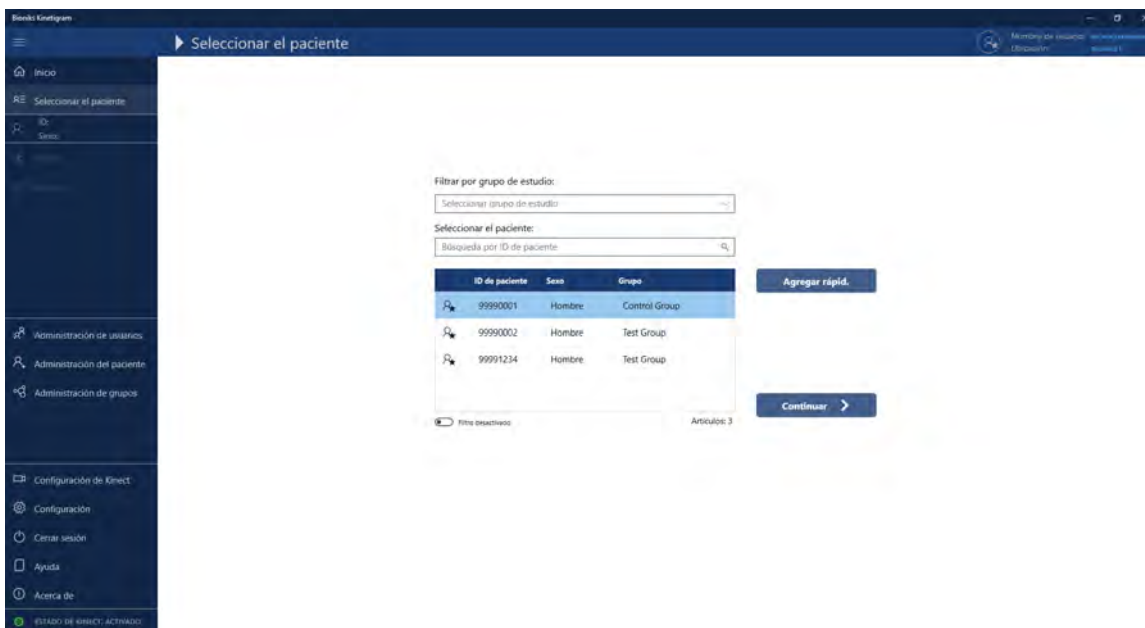

Si esta es la primera visita del día del paciente, aparecerá automáticamente el diálogo de Mediciones antropométricas.

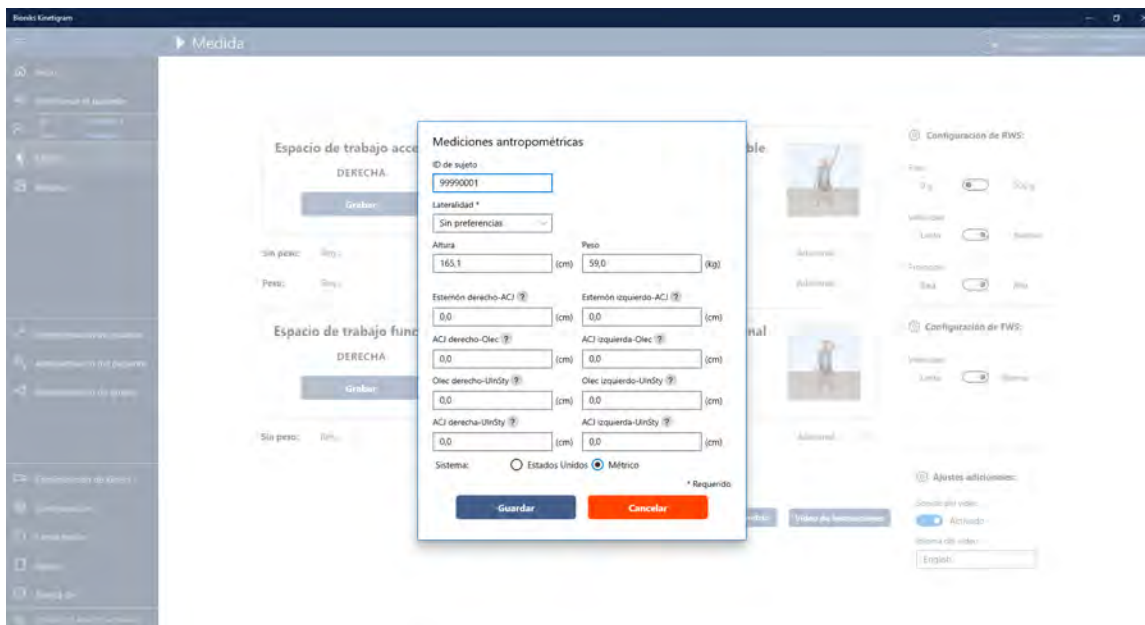

De forma alternativa, se puede acceder al diálogo pulsando el botón [Antropometría](#) en la página de Medidas.

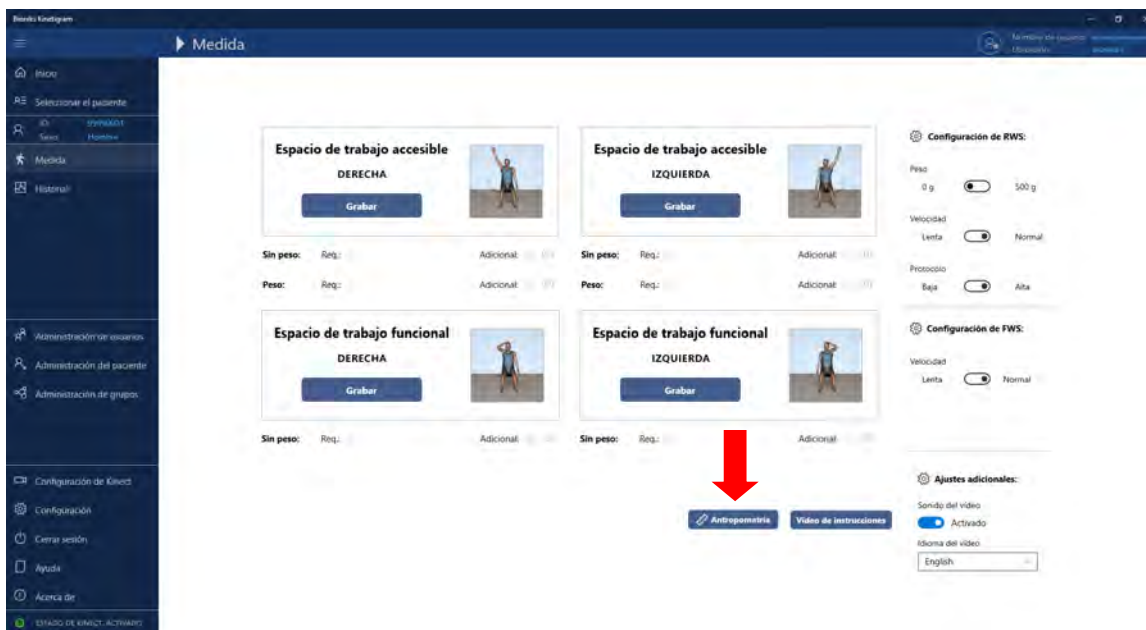

7.2 Paso 2: Medir los parámetros de la extremidad superior de los participantes en el estudio

En cada visita, se deben obtener **CUATRO** mediciones del brazo para cada lado del cuerpo:

1. Esternón-AAC (esternón a articulación acromioclavicular)
2. AAC-Olec (articulación acromioclavicular a olécranon)
3. Olec-EstiCub (olécranon a estiloides cubital)
4. AAC-EstiCub (articulación acromioclavicular a estiloides cubital)

Además de la estatura y el peso de los participantes y si son zurdos o diestros, obtenga las cuatro mediciones en cada lado e introdúzcalas en el diálogo de Antropometría.

Importante: Los parámetros deben medirse con la cinta métrica para una mayor exactitud.

A continuación se muestra el modo de obtener correctamente estas medidas:


1. **Esternón-AAC** (esternón a articulación acromioclavicular)




2. **AAC-Olec** (articulación acromioclavicular a olécranon)



3. **Olec-EstiCub** (olécranon a estiloides cubital)

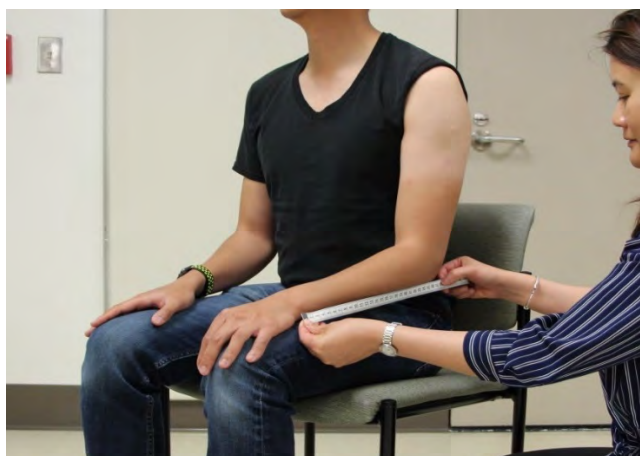

4. **AAC-EstiCub** (articulación acromioclavicular a estiloides cubital) en extensión completa del codo

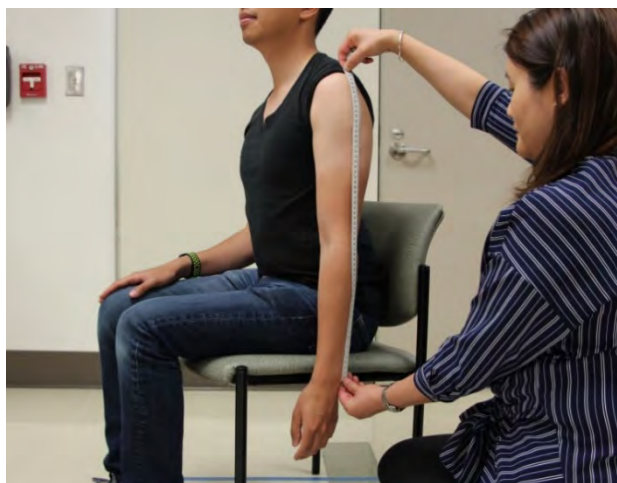

*Si existe una contractura en el codo, mida desde la **AAC al estiloides cubital** como se muestra a continuación

(estamos midiendo la hipotenusa del triángulo).




Introduzca los valores medidos en el diálogo y pulse **Guardar** para conservarlos.

Nota: Si no puede obtenerse una medida, introduzca «0» para ese valor.

Si necesita editar las medidas después de haberlas guardado, se pueden actualizar para la visita actual seleccionando el botón **Antropometría** en la Página de Medidas.



7.3 Paso 3: Cómo determinar si debe utilizar el módulo de función alta o baja

- Con el participante sentado erguido en una silla, pídale que levante el brazo de prueba lo más alto que pueda (flexión del hombro hacia adelante). Si es capaz de levantar el brazo **a la altura del hombro o por encima (como se muestra a continuación)**, debe elegir el módulo de evaluación **función ALTA**.

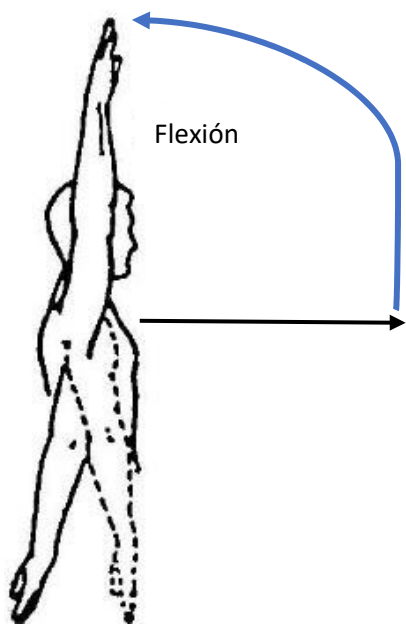


Use el módulo «Función alta»

Por ejemplo:

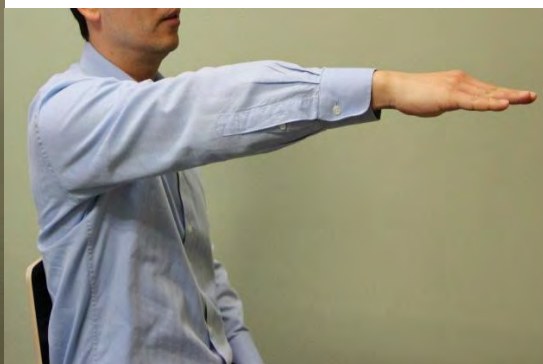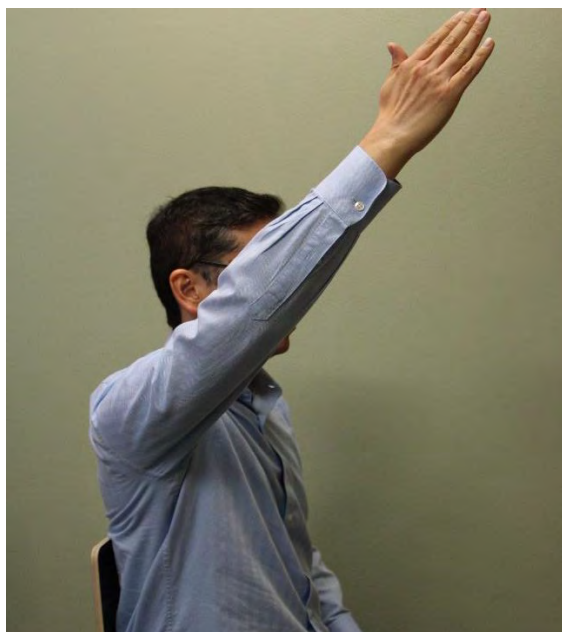

- B. Con el participante sentado erguido en una silla, pídale que levante el brazo de prueba lo más alto que pueda. Si solo puede levantar el brazo hasta zonas **por debajo del nivel del hombro (como se muestra a continuación)**, debe elegir el módulo de evaluación **función BAJA**.

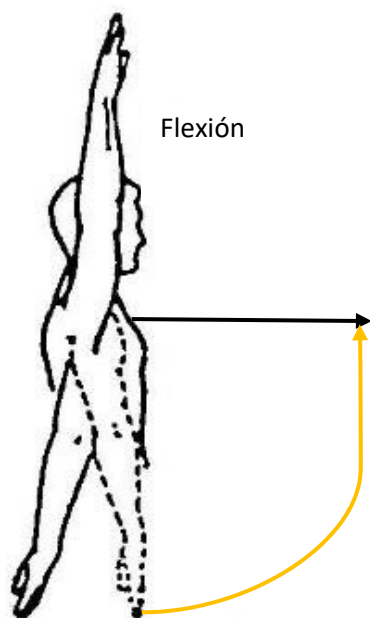

Use el módulo «Función baja»

Por ejemplo:



7.4 Paso 4: Realizar la evaluación de Kinect – Iniciar la recogida de datos

Una vez que haya tomado las medidas antropométricas de la extremidad superior y haya determinado el nivel funcional del participante, puede comenzar el protocolo de medición.

Las mediciones se realizan mientras se observa un protocolo guiado por vídeo. La cámara Kinect captura el

movimiento del usuario y registra la información de sus articulaciones. No se conserva información de vídeo de ningún participante en ningún momento. Para seleccionar el protocolo de vídeo correcto, la selección debe hacerse en la [Página de Medidas](#) principal que se muestra a continuación.



Durante la visita, deberá seguirse el **protocolo** siguiente para la evaluación de cada participante. Para configurar los parámetros correctos para la medición, haga selecciones de acuerdo con la tabla siguiente en cada secuencia:

Evaluación	Módulo	Lado	Peso
1	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Derecho	No
2	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Izquierdo	No
3	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Derecho	Sí, 500 g
4	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Izquierdo	Sí, 500 g
5	Espacio de trabajo funcional (ETF)	Derecho	No
6	Espacio de trabajo funcional (ETF)	Izquierdo	No

Nota: En general, todos los protocolos deben realizarse a **velocidad normal**, a menos que el participante tenga dificultad para seguir los movimientos. En ese caso, seleccione **velocidad baja**. Los vídeos de velocidad lenta se ralentizan alrededor del 20 %.

Nota: Se puede seleccionar el idioma de las pistas de audio en los protocolos guiados por vídeo para adaptarse a la preferencia del paciente. Esto no cambia el idioma que se muestra en la interfaz del usuario. El idioma del archivo de audio se selecciona en Configuración Adicional y puede cambiarse en cualquier momento.


Importante: Seleccione el nivel funcional adecuado para cada lado. El participante puede no tener la misma capacidad en cada lado.

Nota: Antes de cada medición, debe mostrar el vídeo de instrucciones al participante, pulsando el botón [Vídeo de instrucciones](#) en la parte inferior de la página de [Medidas](#).

Antes de iniciar la medición:

- **Importante:** Para la medición del espacio de trabajo accesible (ETA), asegúrese de que el participante está sentado con la espalda contra la silla, sin girarse a un lado ni inclinarse hacia adelante y de que no

dobra el codo a menos que se le indique.

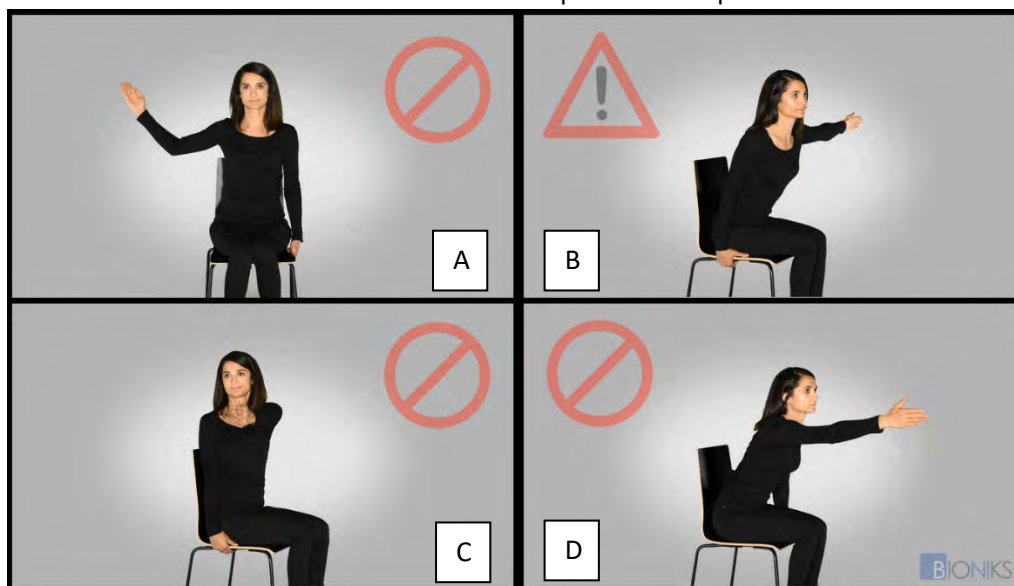


Recuadro	Instrucciones
A	No doble el codo
B	Mantenga la espalda apoyada en la silla
C	No se gire a un lado
D	No se incline hacia adelante

- **Importante:** Posicionamiento del sujeto para la medición del espacio de trabajo funcional (ETF): sentado con la espalda apoyada en la silla, derecho, manteniendo la cabeza y el tronco rectos.
- Durante la evaluación del ETF, asegúrese de que no hay flexión cervical/de cuello, flexión o rotación del tronco, no hay movimiento compensador excesivo (p. ej., balanceo de los brazos); el paciente debe realizar movimientos fluidos y bien controlados.


Espacio de trabajo accesible (ETA):

Evaluación 1: ETA lado derecho, sin peso

- Primero, obtenga la medida de ETA para la condición **sin peso** en el **lado derecho**. Asegúrese de que el conmutador para el **Peso** no esté activo (flecha verde):
- Seleccione la **Velocidad** de reproducción de vídeo (flecha naranja). Velocidad **normal** para empezar. Si el participante no puede continuar mientras realiza el protocolo, repita la medición seleccionando velocidad **lenta**.
- Si el participante fue capaz de flexionar hacia adelante el brazo a la altura del hombro o por encima, debe marcarse el **Protocolo** de función **Alta** (flecha azul).
- Cuando el participante esté listo, inicie la recogida de datos pulsando el botón **Grabar** bajo el módulo Espacio de trabajo accesible – DERECHA. (flecha amarilla).

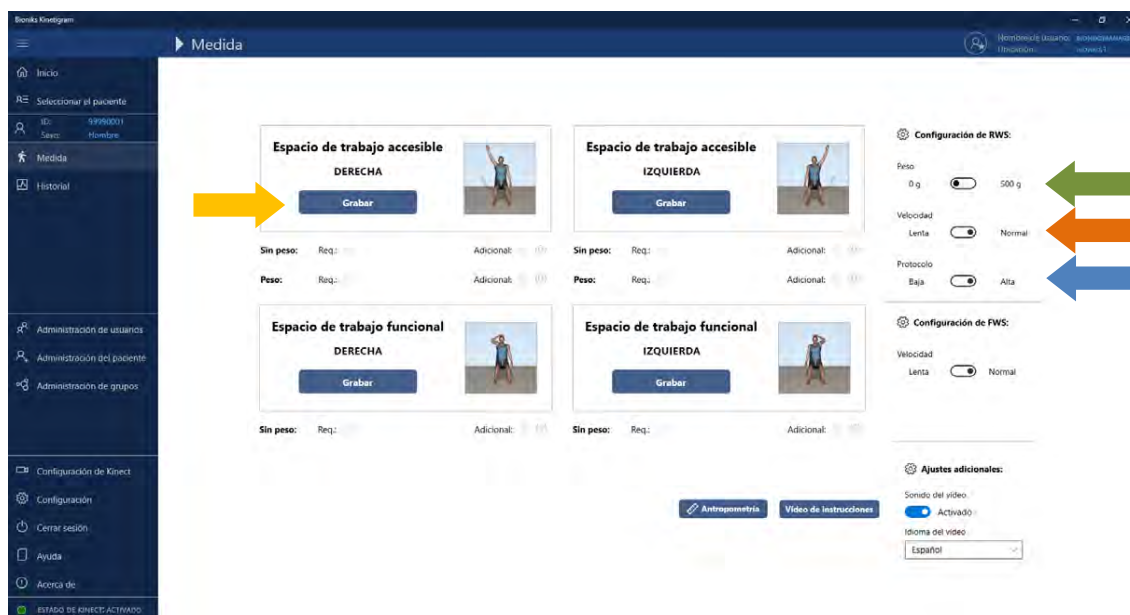

Esto abrirá la página de Medidas con el protocolo guiado por vídeo. La página de orientación por vídeo tiene los siguientes elementos:

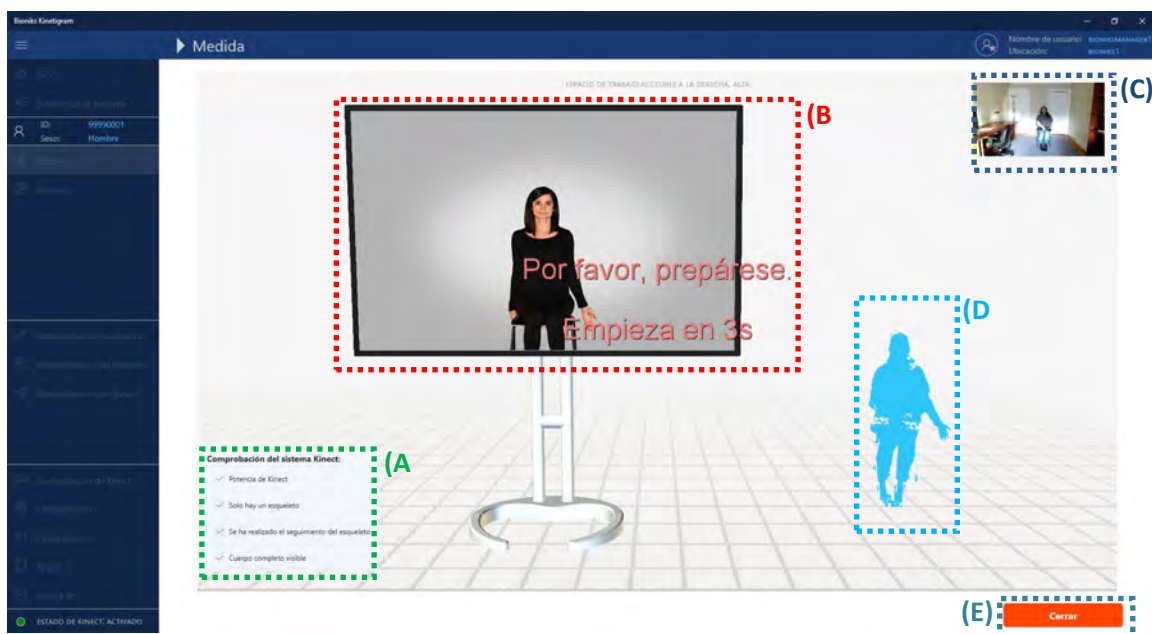

Elementos de la página de orientación por vídeo: A – Comprobación del sistema Kinect, B – Respuesta de vídeo, C – Vista de cámara Kinect, D – Vista de respuesta de Kinect, E – Cerrar/Detener grabación

La página muestra una cuenta atrás durante los primeros 5 segundos que permite al participante prepararse. Durante este tiempo, el sistema también comprueba las condiciones de medición apropiadas usando el módulo de comprobación del sistema Kinect. Los resultados de esta comprobación se muestran en la esquina izquierda. Si cualquiera de los apartados falla, aparecerá la ventana de Comprobación del Sistema Kinect. Véase más adelante la Sección 9 sobre resolución de problemas.


Una vez terminada la cuenta atrás, el paciente debe seguir las instrucciones del vídeo y realizar el movimiento al mismo tiempo. Durante la grabación, se muestra el signo ● Grabación en la esquina superior

izquierda. La barra de progreso en la parte inferior de la pantalla de respuesta indica la posición relativa de la reproducción de vídeo.



La grabación se detiene automáticamente cuando termina el vídeo. Si es necesario, puede detener la grabación en cualquier momento pulsando el botón [Detener grabación](#). Cuando se detiene la grabación, la etiqueta del botón cambiará a [Cerrar](#).


Al terminar la grabación, se comprueba la secuencia de grabación para ver si es válida. Si se determina que la secuencia de grabación no es válida, aparecerá la siguiente advertencia:

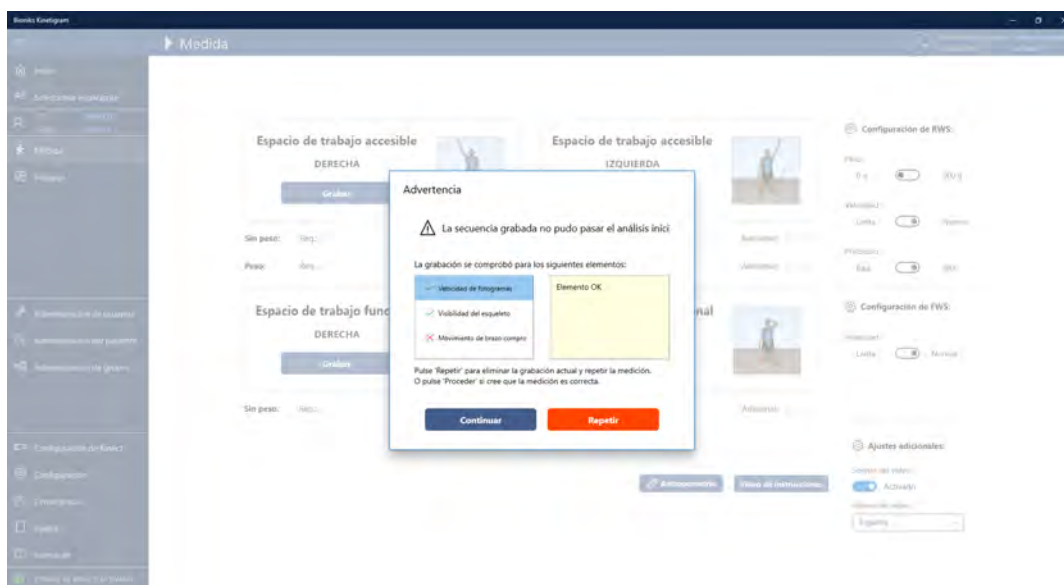

Se puede hacer clic en la información de cada elemento enumerado para obtener más detalles.

Importante: Si recibe esta advertencia, debe examinar cuidadosamente la información. Se aconseja que repita la medición pulsando en el botón [Repetir](#), lo que le devolverá a la página de [Medidas](#).

Si la grabación fue satisfactoria, aparecerá el diálogo [Guardar medida](#).

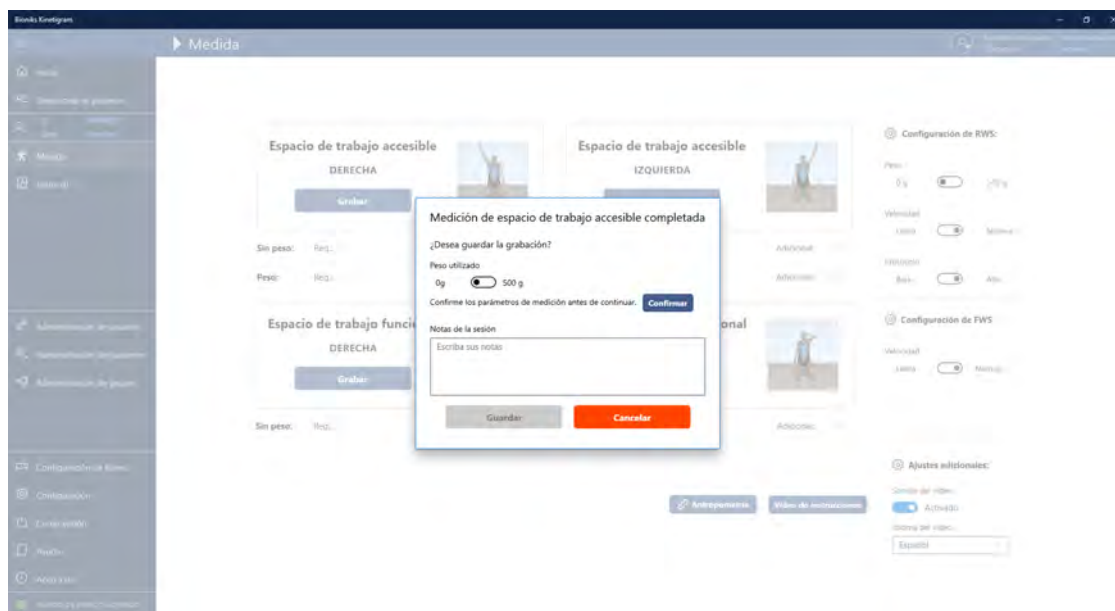


Para el protocolo [Espacio de trabajo accesible](#), compruebe que el parámetro del peso corresponde a la condición de la medición (paciente que no lleva peso en la muñeca = peso 0 g, paciente que lleva peso en la muñeca = peso 500 g). Confírmelo pulsando el botón [Confirmar](#); esto le permitirá guardar la medida.

Introduzca cualquier nota relevante a la medida que pueda estar relacionada con la sesión de medición. Por ejemplo, «el paciente no se encontraba bien».

Pulse [Guardar](#) para conservar la medida o pulse [Cancelar](#) para desechar los resultados. ¡Recuerde que una vez que pulse [Cancelar](#) no se guardarán datos de la sesión!

Una vez que se hayan guardado los datos, volverá a la página de menú. Tenga en cuenta que una vez que se ha grabado una sesión, aparecerá con una marca de comprobación verde bajo el módulo correspondiente (rodeado en rojo más abajo). Las casillas [Req](#) marcan las evaluaciones necesarias, mientras que la marca [Adicional](#) marca las sesiones adicionales que se hayan grabado. Tenga en cuenta que los contadores de sesión se reinician cada día.

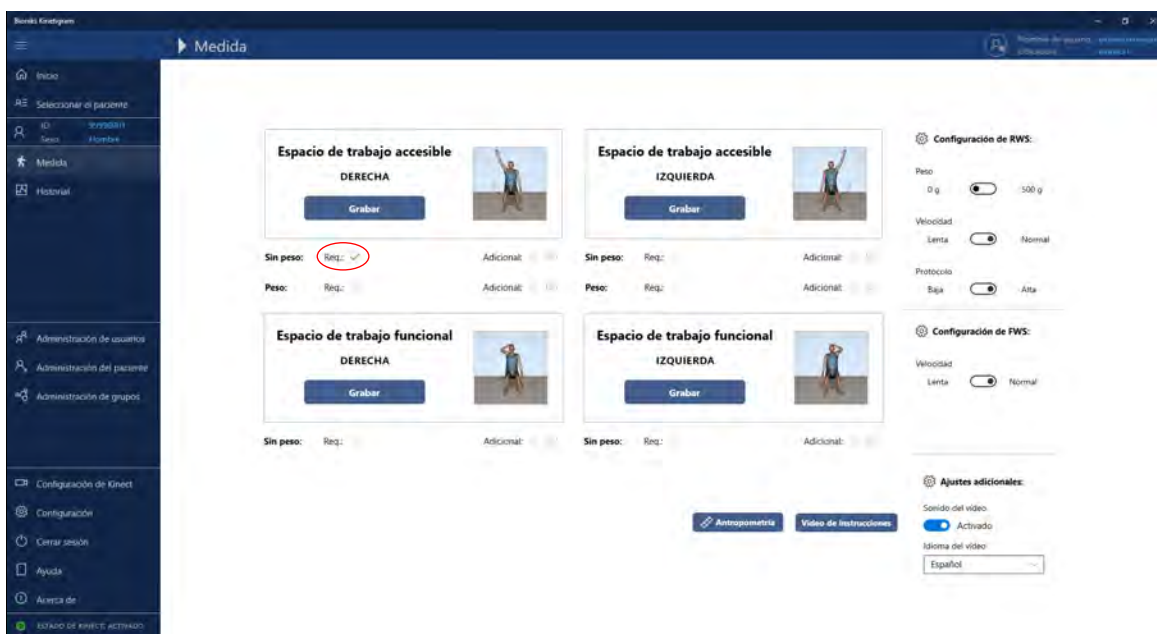

Nota: Para todas las mediciones restantes, siga el mismo proceso indicado para la evaluación 1. Consulte las figuras anteriores para determinar la configuración de ETA y ETF descrita a continuación.

Evaluación 2: ETA lado izquierdo, sin peso

Repita la evaluación de ETA para el **Brazo izquierdo, sin peso**.

- Si el/la participante fue capaz de flexionar hacia adelante el brazo a la altura del hombro o por encima, elija el nivel **ALTO**; en caso contrario, use el módulo **BAJO** (y siga los mismos pasos indicados anteriormente).
- Al finalizar la grabación, pulse **Guardar** para conservar los datos de la evaluación si está satisfecho con la actuación del participante.

Evaluación 3: ETA lado derecho, con peso

Repita la evaluación de ETA para el **Brazo derecho, con peso**

- El participante sigue en el mismo Nivel funcional, por lo que **NO** habrá cambios en la opción del **Protocolo** (Bajo o alto).
- Aplique **UN peso de muñeca (500 g)** a la **Muñeca derecha** del participante y seleccione **Peso = 500 g**.
- Cuando esté listo para empezar, haga clic en **Grabar**.
- Al final de la evaluación, asegúrese de que la opción de peso es correcta. Después, haga clic en **Guardar** para conservar la evaluación si está satisfecho con la actuación del participante.
- Escriba notas breves si desea introducir comentarios para esta evaluación, tal como se describió previamente. Si no desea conservarla, haga clic en **Cancelar** y repita la evaluación.

Evaluación 4: ETA lado izquierdo, peso

Repita la evaluación de ETA para el **Brazo izquierdo, con peso**.

- El participante sigue en el mismo Nivel funcional, por lo que **NO** habrá cambios en la opción del **Protocolo** (Bajo o alto).
- Aplique **UN peso de muñeca (500 g)** a la muñeca de prueba del participante. En este caso, el peso se aplicará a la **Muñeca izquierda** (continúe tal como se indicó antes).
- Al final de la evaluación, asegúrese de que la opción de peso es correcta. Después, haga clic en **Guardar** para conservar la evaluación si está satisfecho con la actuación del participante. Escriba notas breves si desea introducir comentarios para esta evaluación, tal como se describió previamente. Si no desea conservarla, haga clic en **Cancelar** y repita la evaluación.

Nota: Si el participante no fue capaz de flexionar hacia adelante el brazo de prueba a la altura del hombro, elija el **Protocolo** de nivel **BAJO** para la evaluación de ETA. Siga los pasos descritos anteriormente.

Importante: Un participante puede tener UN brazo que tenga una función de nivel **ALTO** y el otro brazo de nivel de función **BAJO**, durante la misma visita.


Evaluación del espacio de trabajo funcional (ETF):

Para la evaluación del espacio de trabajo funcional, se puede continuar de forma similar a lo anterior, con la diferencia de que aquí **NO SE USA PESO**.

Importante: Observe al participante y fíjese si es capaz de llegar a los objetivos necesarios. Deberá introducir esas observaciones al terminar la medición.

Evaluación 5: ETF Lado derecho


Comience con el **lado derecho** para el módulo del espacio de trabajo funcional.

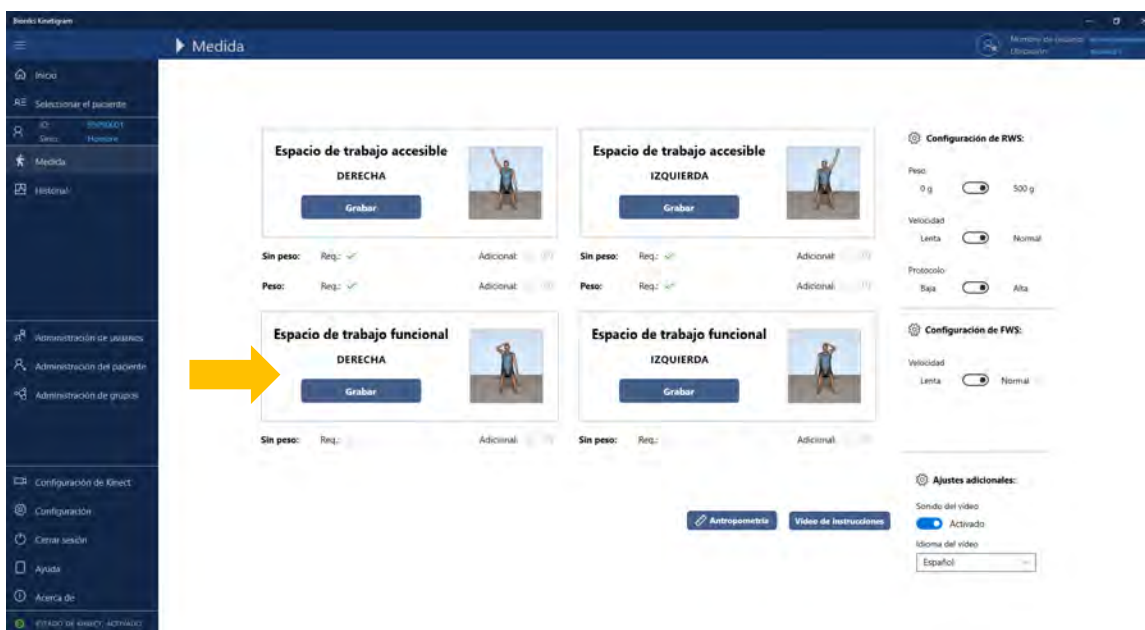

El paciente sigue el protocolo del vídeo:



Al final de la evaluación, aparecerá el siguiente diálogo para el ETF:

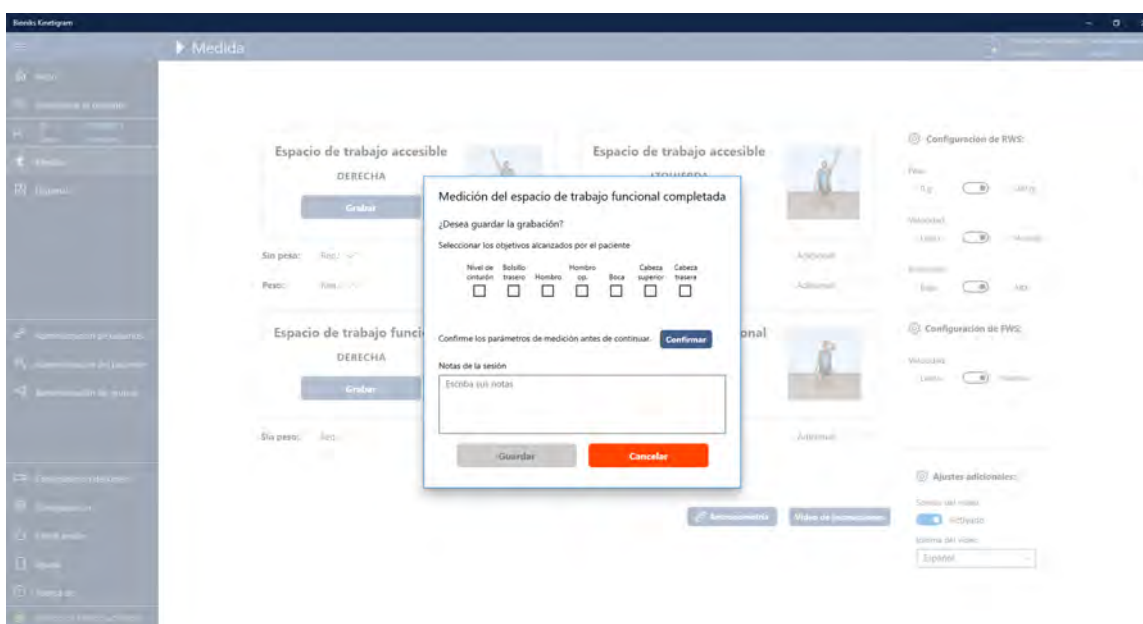

Marque las casillas de los objetivos que que el paciente esté alcanzando. Tenga en cuenta que el paciente debe **TOCAR** los objetivos para que cuenten, igual que en el vídeo. Después de revisar las observaciones, haga clic en **Confirmar** para confirmar los parámetros introducidos.

En este punto, puede introducir también cualquier nota y observación relativa a la evaluación. Después, haga clic en **Guardar** para conservar la evaluación si está satisfecho con la actuación del participante. Si no desea conservarla, haga clic en **Cancelar** y repita la evaluación.

Evaluación 6: ETF Lado izquierdo


Repita el mismo procedimiento para el ETF en el lado izquierdo.

Después de la medición, marque las casillas de los objetivos que el paciente esté alcanzando. Tenga en cuenta que el paciente debe **TOCAR** los objetivos para que cuenten, igual que en el vídeo. Después de revisar las observaciones, haga clic en [Confirmar](#) para confirmar los parámetros introducidos.


En este punto, puede introducir también cualquier nota y observación relativa a la evaluación. Después, haga clic en [Guardar](#) para conservar la evaluación si está satisfecho con la actuación del participante. Si no desea conservarla, haga clic en [Cancelar](#) y repita la evaluación.

7.5 Comprobación doble de los datos:

Debe ser capaz de ver todas las evaluaciones grabadas para este participante del estudio en la página principal. Esto debe incluir todas las evaluaciones previas de este participante. Las evaluaciones completadas están señaladas con una marca de comprobación verde (véanse a continuación las imágenes rodeadas con un círculo rojo).

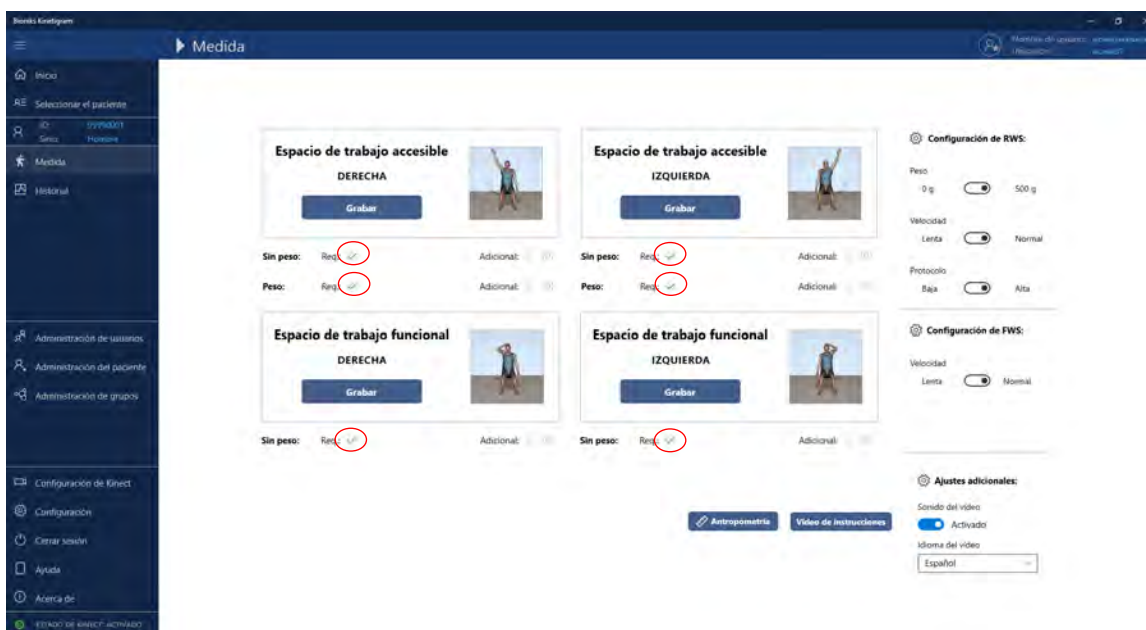


Debe confirmar también las evaluaciones haciendo clic en la página de [Historial](#) en el menú. Esto abrirá la página de Historial con todas las grabaciones del paciente hasta la fecha. Tenga en cuenta que puede filtrar por tipos de evaluación. Desde esta página, puede descargar los datos ASCII sin procesar para cada medida haciendo clic con el botón derecho en una medida y seleccionando [Descargar Datos](#). Consulte en el Apéndice A una descripción del formato de archivo de datos ASCII.

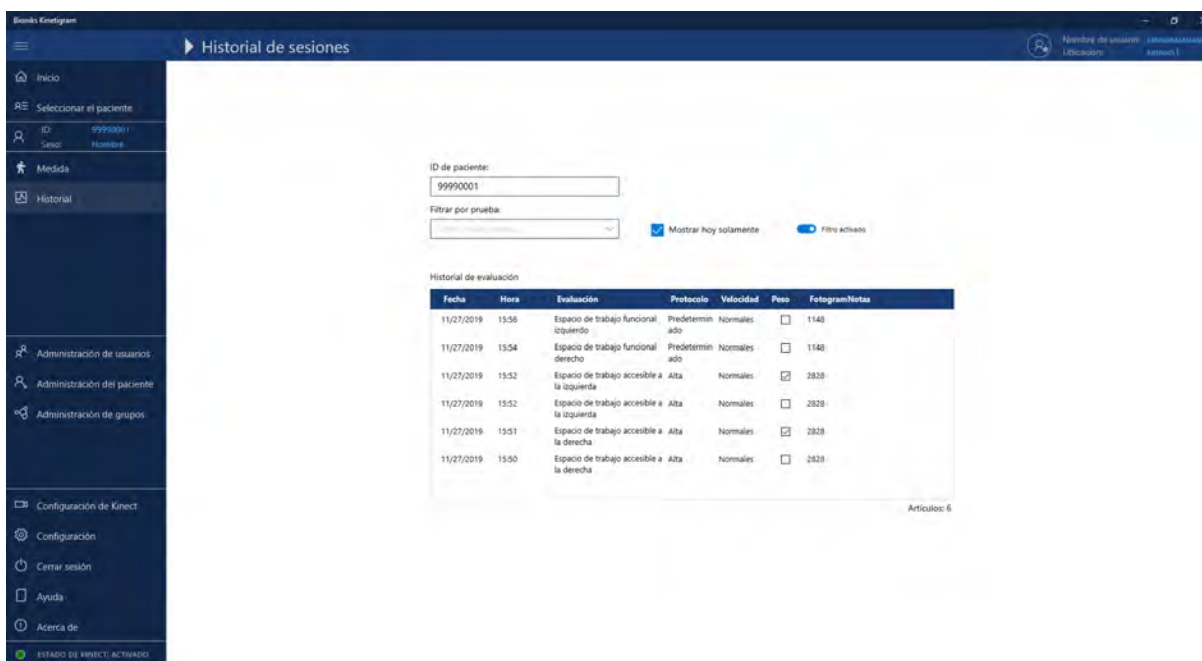


7.6 Comprobación del sistema Kinect mientras se toman las medidas

La comprobación del sistema Kinect se realiza al comienzo de cada sesión de medición para asegurar la validez de los datos. Como se indicó previamente, todos los elementos deben tener marcas de comprobación verdes al comienzo de la medición.

En caso de errores, aparecerá un diálogo y se detendrá la medición. El diálogo de comprobación del sistema Kinect aporta información sobre qué elementos no son válidos. Puede hacer clic en la lista para obtener más detalles sobre cómo corregir el problema.

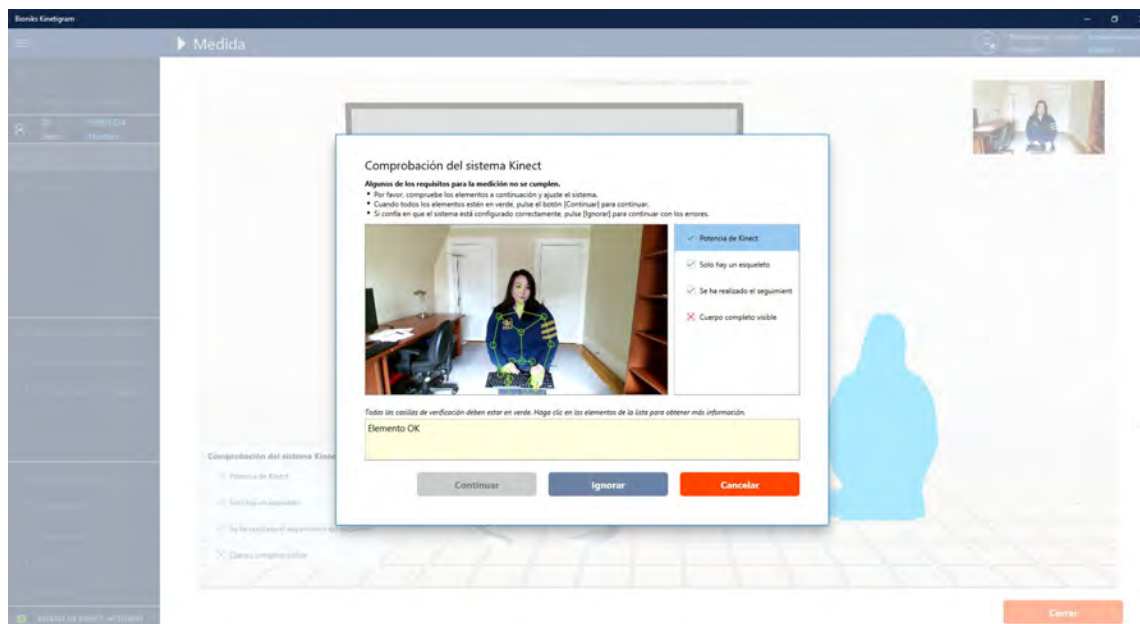

Una vez que todos los problemas se hayan corregido, se habilitará **Continuar** para continuar con la medición. La ventana se cerrará y la cuenta atrás se reiniciará, a fin de que el paciente pueda prepararse para la medición.

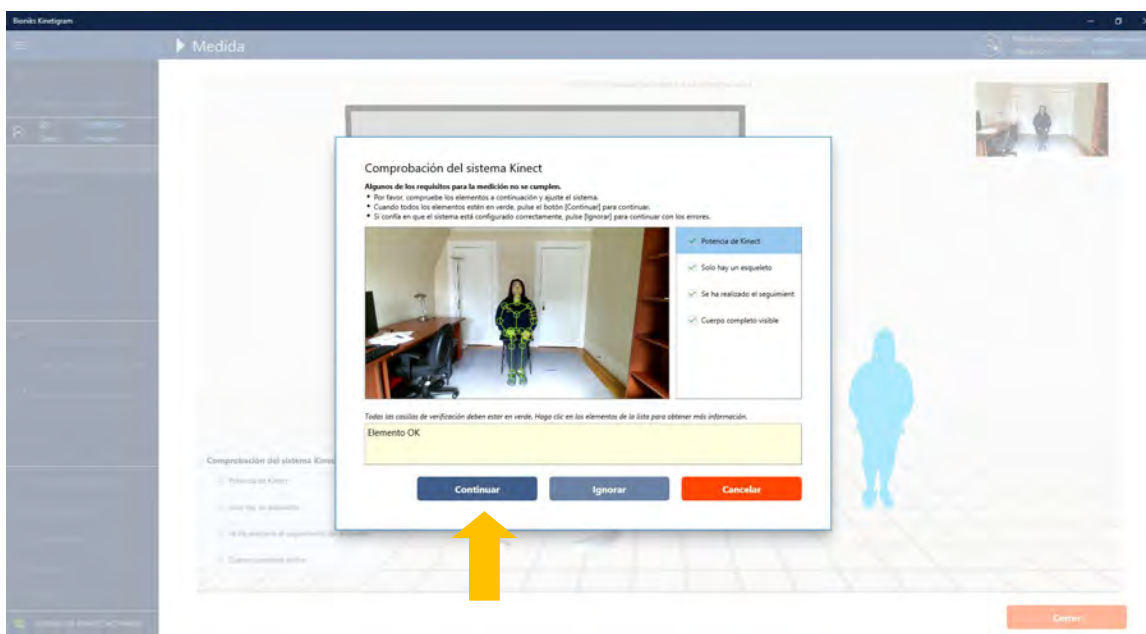

La comprobación del sistema Kinect también ofrece la opción de continuar midiendo con errores, pulsando el botón **Ignorar**.

Importante: «Ignorar» la comprobación del sistema Kinect solo debe usarse en caso de que esté seguro de que la medida no se verá afectada por los problemas identificados (p. ej., los pies son visibles, pero no los detecta el sistema debido al material del zapato).

Si no está listo para continuar con la medición, también puede pulsar **Cancelar** y volver a la pantalla inicial.

7.7 Referencias adicionales

- Nota para la introducción de datos de ETA y ETF (es opcional usarla o no)
- Módulo de evaluación de función alta
- Módulo de evaluación de función baja

Puede usar la plantilla de la página siguiente para registrar las medidas y recoger datos mientras evalúa a un paciente. Este formulario se le facilita para ayudarle a recopilar y organizar la información que debe introducirse en el Kinetigram.

Notas para la introducción de datos de ETA y ETF (es opcional usarlas o no)

*Este formulario se le facilita para ayudarle a recopilar y organizar la información que debe introducirse en el ETA y el ETF. Rodee con un círculo las unidades empleadas para la medida.

ID del sujeto: _____

Fecha: _____

Sexo (círculo): Varón / Mujer / No especificado

Mano dominante (círculo):

Derecha / Izquierda / Sin preferencia

Estatura: _____ cm/pulgadas

Peso: _____ kg/libras

I. Espacio de trabajo accesible (ETA)

Medidas de la longitud de la extremidad superior (realice las mediciones en cada visita del paciente):

		Derecho	Izquierdo
1	Esternón-AAC (desde la escotadura supraesternal a la articulación acromioclavicular)	cm/pulgadas	cm/pulgadas
2	AAC-Olec (articulación acromioclavicular a olécranon)	cm/pulgadas	cm/pulgadas
3	Olec-EstiCub (Olécranon a estiloides cubital)	cm/pulgadas	cm/pulgadas
4	AAC-EstiCub (articulación acromioclavicular a estiloides cubital)	cm/pulgadas	cm/pulgadas

¿Puede el participante flexionar hacia adelante el brazo hasta la altura del hombro o por encima?
(Rodee con un círculo)

Brazo derecho Sí/ No

Brazo izquierdo Sí/ No

Sí = Módulo de función alta

No = Módulo de función baja

NOTA: Un participante puede tener un brazo con función alta y otro con función baja durante la misma visita.

II. Espacio de trabajo funcional (ETF) – observe si el sujeto es capaz de tocar estos SIETE objetivos corporales y marque las casillas correspondientes para indicar que «Sí»

	Objetivos corporales	Derecho	Izquierdo
1	Nivel del cinturón		
2	Bolsillo trasero		
3	Mismo hombro		
4	Hombro opuesto		
5	Boca		
6	Parte superior de la cabeza		
7	Parte posterior de la cabeza		

8 Transcripciones del protocolo de vídeo

Video de instrucciones:

Está a punto de ver un vídeo de demostración de diferentes movimientos del brazo. El objetivo de los ejercicios es medir cómo se mueve el brazo en todas las direcciones. Intente seguir los movimientos a la misma velocidad como mejor pueda. Levante el brazo solo hasta donde pueda.

Empezará con el brazo estirado al lateral de su cuerpo. Se le pedirá que suba el brazo hasta el lateral, que levante el brazo a 45 grados, en perpendicular al cuerpo,

y finalmente que levante el brazo delante de usted. Cuando se le pida que mueva el brazo sobre su cuerpo, será hacia la cadera contraria a la altura del cinturón y hacia el hombro contrario, si puede. Puede doblar el codo durante estas dos acciones, para todo lo demás estire el brazo. Realice una breve pausa al final de todos los movimientos del brazo.

Recuerde: no doble el codo,

apoye la espalda contra la silla, no doble el lateral

y no se incline hacia delante.

Siga las indicaciones y los movimientos del brazo que se muestran en la pantalla.

Espacio de trabajo accesible - Módulo de función alta:

Empezando con el brazo estirado al lateral, con la palma hacia el frente y el pulgar hacia el lateral, levante el brazo tan alto como pueda.

Luego colóquelo a un ángulo de 45 grados y levante el brazo hasta la cabeza tan alto como pueda.

Luego levante el brazo hacia el frente tan alto como pueda.

Luego mueva el brazo sobre su cuerpo tan alto como pueda.

Coloque la mano al lateral, a la altura del cinturón y muévela sobre el cuerpo hacia el lado contrario de la cadera; puede doblar el codo. Luego vuelva y muévela hacia detrás tanto como pueda.

A continuación, con el brazo recto, levante la mano hasta el hombro

y muévela sobre el cuerpo hacia el hombro contrario; puede doblar el codo. Luego vuelva y muévela hacia detrás tanto como pueda.

Levante la mano por encima de la altura del hombro y muévela sobre el cuerpo.

Ahora, con la palma hacia la pierna y el pulgar hacia delante, estire el brazo hacia atrás tanto como pueda.

Espacio de trabajo accesible - Módulo de función baja:

Empezando con el brazo estirado al lateral, con la palma hacia el frente y el pulgar hacia el lateral, levante el brazo tan alto como pueda.

Luego colóquelo a un ángulo de 45 grados y levante el brazo tan alto como pueda.

Luego levante el brazo hacia el frente tan alto como pueda.

Luego mueva el brazo sobre su cuerpo tan alto como pueda.

Coloque la mano al lateral, a la altura del cinturón y muévela sobre el cuerpo hacia el lado contrario de la cadera; puede doblar el codo. Luego vuelva y muévela hacia detrás tanto como pueda.

Ahora, con la palma hacia la pierna y el pulgar hacia delante, estire el brazo hacia atrás tanto como pueda.

Espacio de trabajo funcional - Brazo derecho:

Empiece con la mano derecha estirada al lateral. Álcela delante suyo hasta la altura del cinturón, luego hasta el bolsillo trasero, hasta el hombro derecho y luego hasta el hombro izquierdo. Si puede, levante la mano a la altura de la boca, tóquese la coronilla y finalmente la nuca. Ahora coloque la mano en la posición inicial estirada al lateral.

Espacio de trabajo funcional - Brazo izquierdo:

Empiece con la mano izquierda estirada al lateral. Álcela delante suyo hasta la altura del cinturón, luego hasta el bolsillo trasero, hasta el hombro izquierdo y luego hasta el hombro derecho. Si puede, levante la mano a la altura de la boca, tóquese la coronilla y finalmente la nuca. Ahora coloque la mano en la posición inicial estirada al lateral.


9 Características de rendimiento

La aplicación cliente Kinetigram registra el movimiento mediante el seguimiento de la posición de 25 puntos de referencia del cuerpo (articulaciones) en un espacio tridimensional con unas tasas de fotogramas mínima y máxima de 15 Hz y 30 Hz, respectivamente. Las medidas almacenadas por el software se registran en milímetros e incluyen marcas de tiempo con precisión de milisegundos para cada fotograma grabado.

10 Resolución de problemas

10.1 Problema de conexión del servidor

Mensaje de error: al cargarse la aplicación, aparece el siguiente mensaje de error:

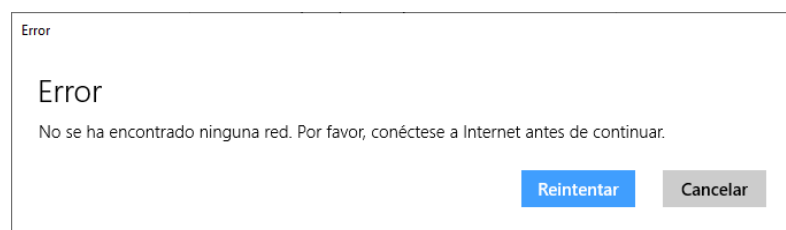


Motivo: El PC no está conectado a Internet. La aplicación requiere conexión a Internet.

Solución: Compruebe su conexión a Internet (Wi-Fi o con cable). Póngase en contacto con su personal informático si no puede conectarse a Internet.

Problema 1: Las páginas no responden, el contenido no se carga.

Mensaje de error: *Error de conexión con el servidor...* [El mensaje de error puede incluir otros detalles relativos a la comunicación con el servidor]

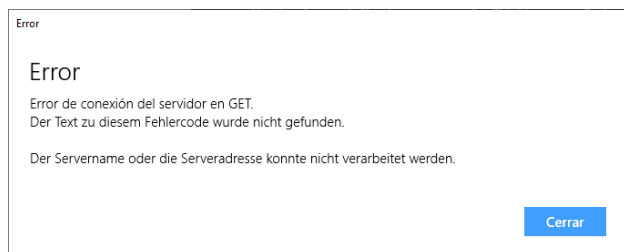


Motivo: La aplicación no puede contactar con el servidor.

Solución: Compruebe su conexión a Internet. Si es necesario, cierre la aplicación e inicie sesión de nuevo.

10.2 Problemas de Kinect

Problema 1: La barra de estado de Kinect debajo del menú tiene un indicador rojo y muestra el estado OFF.

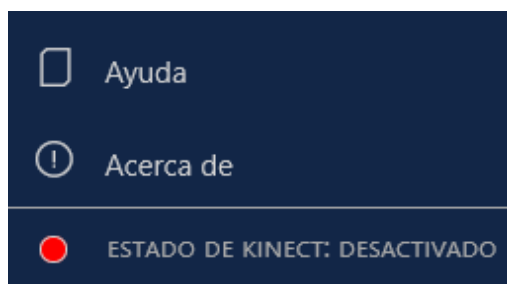

Motivo: Kinect no puede conectarse al ordenador.


Solución 1: Salir de la aplicación. Compruebe si Kinect está conectado a la toma de corriente. Compruebe si la alimentación de Kinect tiene corriente. La luz del conector debe estar en amarillo o blanco.

Solución 2: Salir de la aplicación. Compruebe si Kinect está conectado al puerto correcto USB 3.0 en el PC como se describe en la sección de instalación.

Solución 3: Salir de la aplicación. Reinicie el PC. Ejecute la aplicación de nuevo.

Problema 2: El vídeo de Kinect está congelado o aparece una pantalla negra durante la sesión de medición.

Mensaje de error: *Kinect no parece estar conectado. Cierre la aplicación y compruebe las conexiones.*

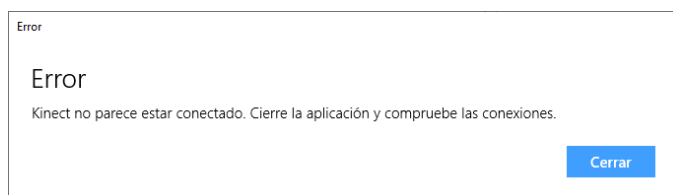

Motivo: Kinect no puede conectarse al ordenador.


Solución 1: Salir de la aplicación. Compruebe si Kinect está conectado a la toma de corriente. Compruebe si la alimentación de Kinect tiene corriente. La luz del conector debe estar en amarillo o blanco.

Solución 2: Salir de la aplicación. Compruebe si Kinect está conectado al puerto correcto USB 3.0 en el PC como se describe en la sección de instalación.

Solución 3: Salir de la aplicación. Reinicie el PC. Ejecute la aplicación de nuevo.

Problema 3:

Mensaje de error: Se ha denegado a la aplicación el acceso a la cámara. Se deniega el acceso.

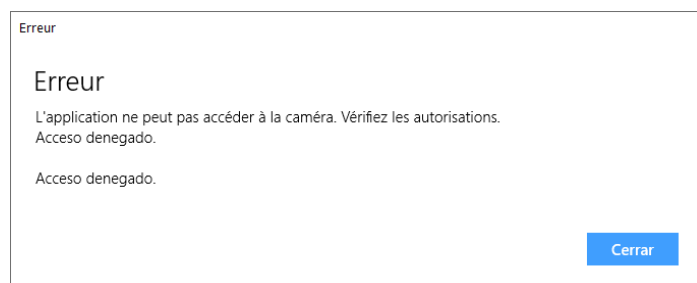

Motivo: La aplicación tiene una restricción sobre el acceso a la cámara


Solución: Busque la [Configuración de privacidad](#) en la búsqueda de barras de tareas de Windows. Seleccione [Cámara](#) bajo [Permisos de la aplicación](#) y asegúrese de que Bioniks Kinetigram tiene activado el acceso a la cámara (ponga el conmutador en On).




10.3 Problemas de software y hardware

Problema 1: Las instrucciones de uso del software tienen un texto muy grande o muy pequeño y/o partes de la aplicación están ocluidas.

Solución: Cierre la aplicación. Compruebe la configuración de la pantalla. Haga clic con el botón derecho en el escritorio de Windows y seleccione [Configuración de pantalla](#):

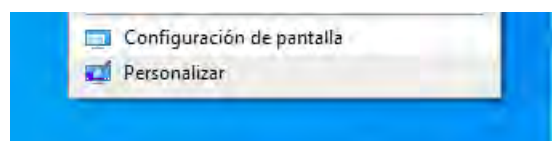

Seleccione su pantalla y ajuste la escala del texto y la resolución. La resolución recomendada es 1920x1080 (escala del 100 %). Sin embargo, para diferentes tamaños de pantalla, los dos parámetros pueden necesitar ajustes (p. ej., un monitor 4K puede funcionar mejor con 3840x2160 px y escala del 225 %).

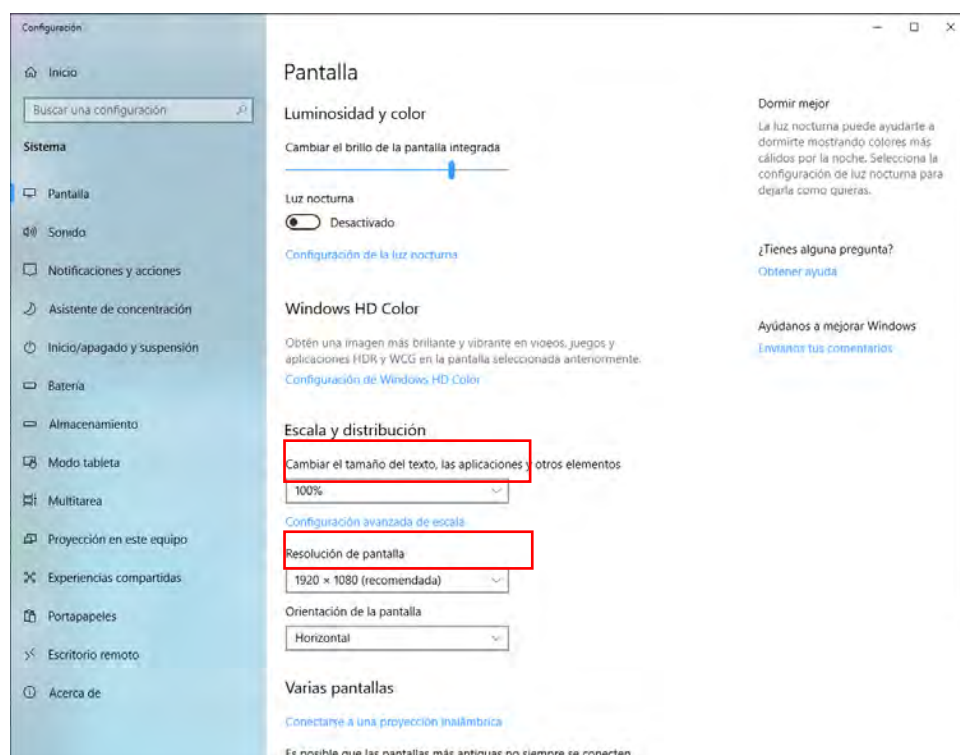

Reinicie la aplicación de Kinetigram después de resetear el tamaño de pantalla.

Problema 2: El software de repente se congela y deja de responder.

Solución: Intente cerrar la aplicación. Si se puede cerrar, reinicie la aplicación.

Problema 3: El software se colapsa de repente (la ventana desaparece).

Solución: Intente reiniciar la aplicación. Si eso no resuelve el problema, reinicie el PC.

Problema 4: Se produce un apagón durante la evaluación.

Solución: Espere a que se recupere la corriente e inicie el PC. Arranque la aplicación Kinetigram, inicie sesión con sus credenciales y seleccione el paciente que está evaluando. La evaluación que no se haya concluido debido al apagón deberá repetirse.

Problema 5: El ordenador no se inicia o no se carga.


Solución: Póngase en contacto con el equipo de Bioniks en help@bioniks.net

10.4 Otros problemas - Póngase en contacto con el equipo de Bioniks


Si las soluciones anteriores no resuelven su problema, póngase en contacto con el equipo de Bioniks en help@bioniks.net

Consiga capturas de pantalla de los errores, si es posible.

Es posible que le pidan archivos de registro del software. Los registros pueden descargarse desde la sección Configuración. Seleccione Configuración del menú (flecha amarilla) y después pulse el botón **Descargar** bajo Archivos de registro (flecha verde).

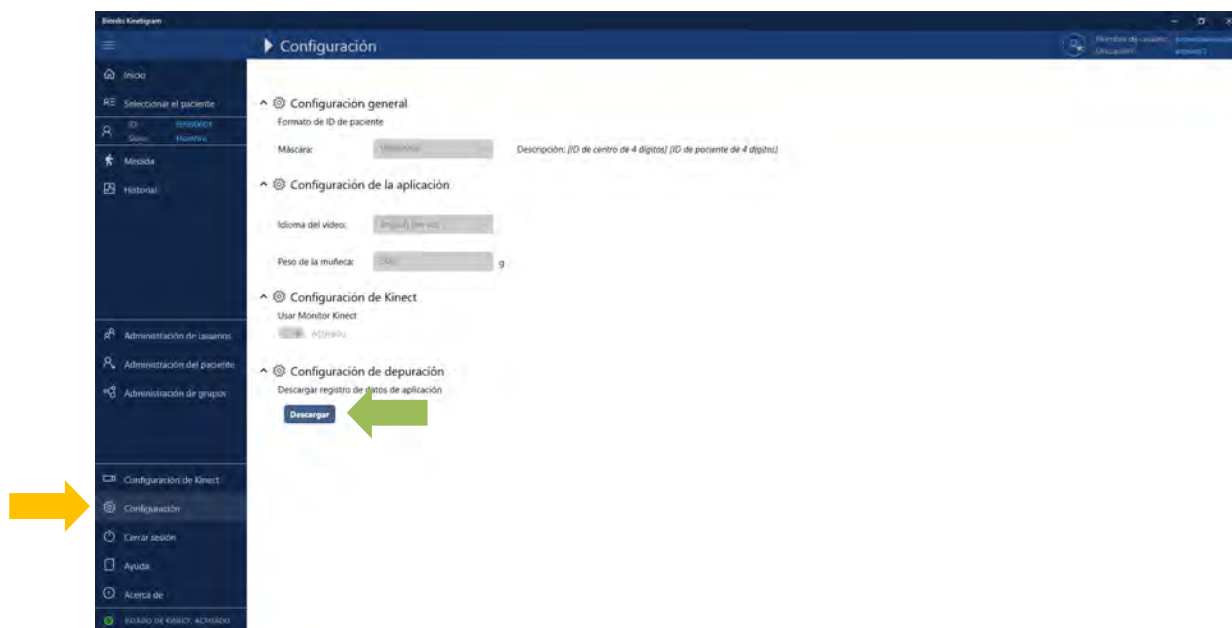

Se le indicará que guarde el archivo.

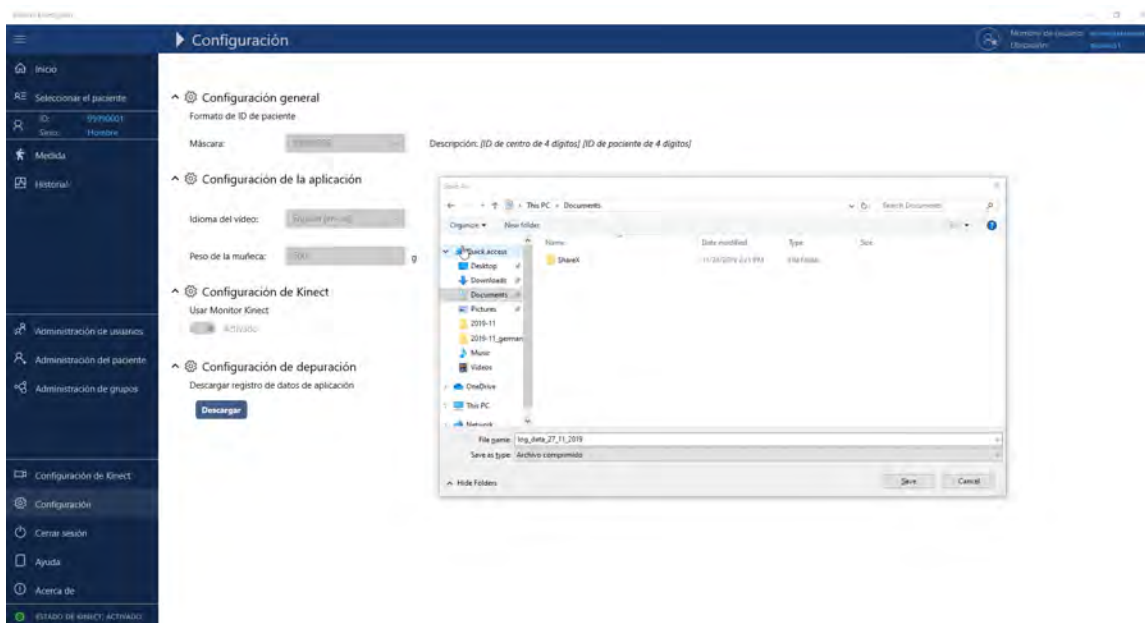

Guarde el archivo y envíelo por correo electrónico al equipo de Bioniks.


10.5 Acceso remoto para el equipo de soporte de Bioniks

Si el problema no puede resolverse por correo electrónico, es posible que el equipo de Bioniks deba acceder al ordenador de forma remota. Siga las instrucciones que vienen a continuación acerca de cómo proporcionarles acceso.


Acceso remoto

Para activar el acceso remoto, ejecute TeamViewer* desde el menú Inicio o haga clic en el icono de TeamViewer

en el escritorio para abrir TeamViewer.

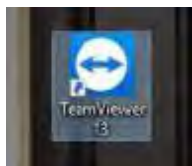

Póngase en contacto con el equipo de Bioniks (help@bioniks.net) sobre cómo proporcionar la ID y Contraseña de TeamViewer (véase a continuación) antes de su conexión remota. No cierre la aplicación TeamViewer.

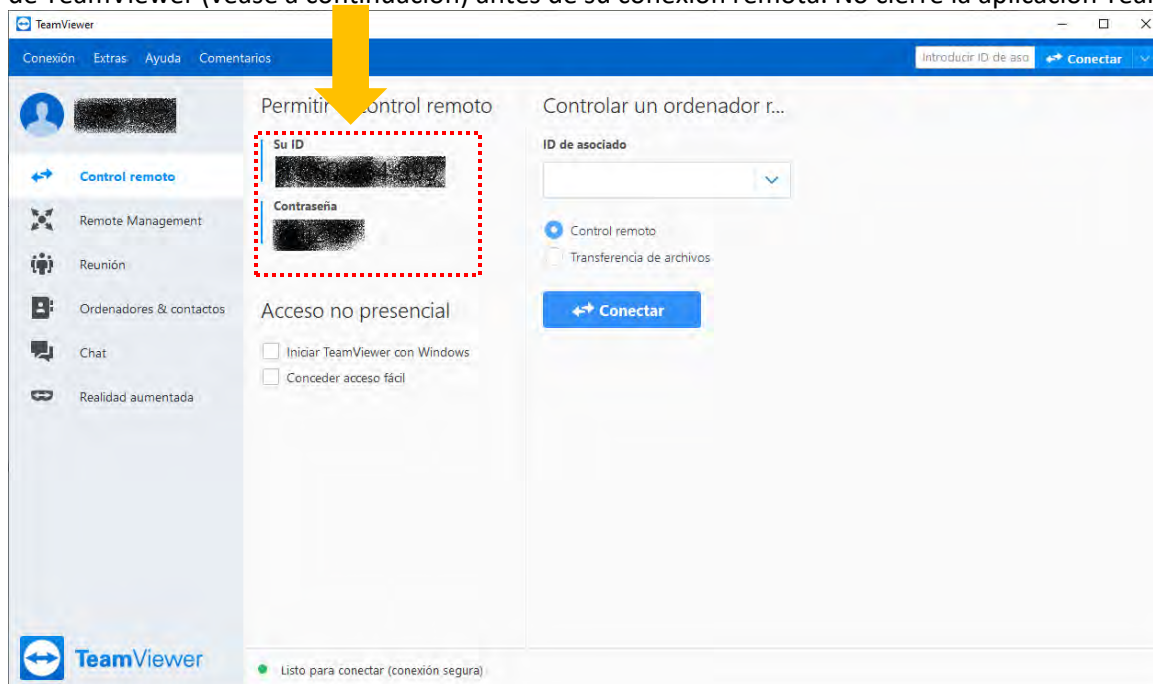

*Si no está instalado TeamViewer en su ordenador, puede descargarla desde:
<https://www.teamviewer.com/es-ES/download>

La instalación puede requerir el acceso de administrador que se le concedió al Coordinador del Estudio.

11 Informes

Cualquier acontecimiento grave que haya ocurrido en relación con el producto debe notificarse a Bioniks y a la autoridad reguladora gubernamental de su país (conocida como autoridad competente). Un acontecimiento grave es un suceso que ha tenido alguna de las siguientes consecuencias:

- Fallecimiento
- Deterioro grave de la salud del sujeto que cause:
 - o (i) enfermedad o lesión potencialmente mortales,
 - o (ii) deterioro permanente de una función corporal o de una estructura corporal,
 - o (iii) hospitalización o prolongación de la hospitalización del paciente,
 - o (iv) intervención médica o quirúrgica para evitar una enfermedad o lesión potencialmente mortales o el deterioro permanente de una función corporal o de una estructura corporal,

- o (v) enfermedad crónica,
- Sufrimiento fetal, muerte fetal o una deficiencia física o psíquica congénitas o malformaciones;

Informe a Bioniks enviando un correo electrónico a help@bioniks.net y proporcionando el número de versión del producto (que se encuentra en el cuadro Acerca de), la fecha del incidente y los detalles de este.

12 Retirada definitiva

El servicio técnico de Bioniks se encarga de la retirada definitiva del software Kinetigram al final de su vida útil. La aplicación Kinetigram se desinstala de todas las cuentas del sistema informático y se eliminan todos los archivos de configuración. La aplicación Kinetigram no almacena ningún dato personal o de usuario en el sistema local. Los datos personales o de usuario se almacenan en el espacio de la nube dedicado a tal fin. Si la cuenta de inquilino también se cancela, los datos de usuario y personales se tratarán conforme al acuerdo establecido con el titular de la cuenta de inquilino (p. ej., archivado de datos, eliminación de datos).

Para la retirada definitiva del software Kinetigram, póngase en contacto con el servicio técnico de Bioniks en la dirección help@bioniks.net.


13 Guía de referencia rápida

KINECT SETUP:

Participante



230 cm o 90 pulgadas

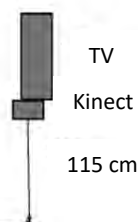

La línea comienza en la parte frontal de la silla

Evaluación	Módulo	Lado	Peso
1	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Derecho	No
2	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Izquierdo	No
3	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Derecho	Sí, 500 g
4	Espacio de trabajo accesible (ETA)	Izquierdo	Sí, 500 g
5	Espacio de trabajo funcional (ETA)	Derecho	No
6	Espacio de trabajo funcional (ETA)	Izquierdo	No

Selección de protocolo

Parámetros de ETA

Parámetros de ETF

14 Apéndice A: Formato de exportación de datos de medición

14.1 Formato de archivo

El uso de la función Exportar datos en la IU de Kinetigram genera un archivo ASCII que contiene datos de medición (esqueleto) para una medida dada. El archivo se guarda en este formato predeterminado: *[id_paciente]_[AAAA-MM-dd]-[Nombre de evaluación].txt*, a menos que el usuario elija un nombre personalizado durante la exportación del archivo.

Los datos del esqueleto se conservan dentro del archivo ASCII exportado en el formato indicado a continuación (cada línea se define más abajo).

```
1 4 399 22.339 1559597885 45000 1
2 1 0 0 0 0 -0.106576 -0.9943045 0 0 0.9943045 -0.106576 0 0 0 0 1
3 1669 40
4 4 194.8973 -1189.81 -641.7673 181.4502 -1239.118 -354.7636 165.9387 -1272.167 -75.4511 118.8528 -1275.584
66.87695 8.992752 -1341.531 -188.045 -7.303061 -1323.103 -451.1639 -38.2849 -1178.362 -641.8266 -25.97022
-1131.252 -627.8994 329.1897 -1209.943 -147.0807 472.5066 -1055.39 -172.0084 531.9854 -860.2631 -121.6273
526.4506 -849.414 -107.7036 115.159 -1181.064 -638.5977 -75.88136 -894.8329 -576.7145 -275.5174 -613.6846
-522.7556 -315.4126 -491.2498 -481.6838 265.1941 -1142.75 -614.9377 394.0589 -758.9908 -585.5616 496.4054
-472.6153 -568.6656 450.9759 -347.501 -528.6959 170.0748 -1266.352 -144.1324 -50.63766 -1071.792 -636.3106
-62.08339 -1103.618 -651.3463 531.8972 -783.4961 -73.39566 518.698 -776.9888 -117.8638
5 4 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
6
7 4 400 22.377 1559597885 82000 1
8 1 0 0 0 0 -0.1076432 -0.9941896 0 0 0.9941896 -0.1076432 0 0 0 0 1
9 1669 40
10 4 194.7695 -1189.329 -642.7255 181.4013 -1238.958 -355.9482 165.9751 -1272.289 -76.79041 118.7541 -1275.711
65.47572 10.20862 -1341.304 -188.0502 -7.096902 -1322.078 -452.3699 -38.76529 -1180.692 -650.7208 -25.94866
-1132.598 -630.0411 327.6746 -1208.49 -146.5651 470.9203 -1051.601 -148.8448 529.9245 -860.0125 -86.204
524.1371 -839.9326 -53.49569 115.0653 -1181.157 -639.5438 -75.47367 -894.543 -578.1636 -274.6686 -612.8696
-524.7296 -315.1109 -490.7507 -483.6104 265.0025 -1141.922 -615.6357 394.6768 -758.4405 -587.3826 497.6772
-472.174 -571.3522 451.7534 -347.2575 -531.3791 170.0906 -1266.409 -145.4393 -46.25969 -1057.706 -627.926
-49.2795 -1088.952 -639.1887 527.2102 -778.1188 2.46756 525.1263 -800.885 -68.29763
11 4 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
12
```

1. Línea 1

[versión de formato = 4] [número de fotograma] [tiempo desde el comienzo en segundos] [tiempo en segundos de unix epoch] [tiempo en microsegundos de unix epoch] [número de esqueletos detectados]

NOTA: Las siguientes líneas solo están incluidas si se ha detectado como mínimo un esqueleto.

2. Línea 2

[fila-matriz de transformación homogénea principal (4x4); cámara Kinect en el sistema de coordenadas mundial]

3. Línea 3

[indicadores de formato] [formato delimitador]

4. Línea 4

[versión de formato] [coordenadas mundiales x y z para las 25 articulaciones en unidades de mm]

NOTA: Consulte el vector de coordenadas 3D a continuación para ver el orden de los puntos de datos en relación con las articulaciones óseas


5. Línea 5

[versión de formato] [visibilidad de la articulación para las 25 articulaciones: 0 no visible, 0.5 inferida, 1 visible]

14.2 Vector de coordenadas 3D para las 25 articulaciones

Las coordenadas [x y z] para las 25 articulaciones se enumeran en el orden siguiente:

1. ColumnaBase
2. ColumnaMedia
3. Cuello
4. Cabeza
5. Hombrolzquierdo
6. Codolzquierdo
7. Muñecalzquierda
8. Manolzquierda
9. HombroDerecho
10. CodoDerecho
11. MuñecaDerecha
12. ManoDerecha
13. Caderalzquierda
14. Rodillalzquierda
15. Tobillolzquierdo
16. Pielzquierdo
17. CaderaDerecha
18. RodillaDerecha
19. TobilloDerecho
20. PieDerecho
21. ColumnaHombro
22. PuntaManolzquierda
23. Pulgarlzquierdo
24. PuntaManoDerecha
25. PulgarDerecho

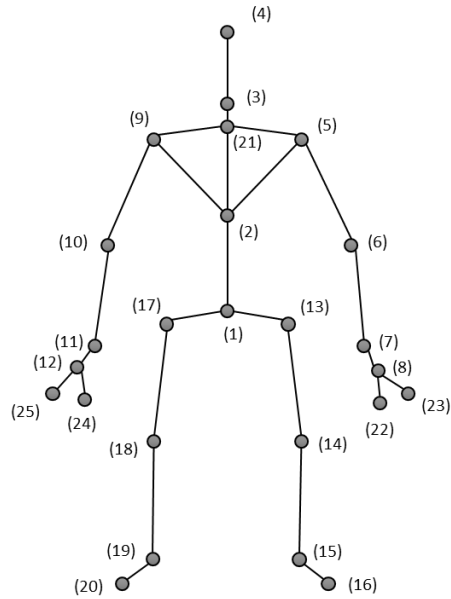

Representante europeo autorizado:

CMC Medical Devices & Drugs, S.L.
C/ Horacio Lengo n18
C.P 29006
Málaga, España

Importador:

European Union
MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM The Hague
Países Bajos

