

Brugsanvisning til Kinetigram™

FORSIGTIG (USA): I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af en læge eller efter lægeordination.

Dokumentnummer 320-00201-DA-DK-DO-02 Rev 8, 2023-10

Producent:

Bioniks

2156 Central Avenue

Alameda, CA 94501

USA

help@bioniks.net

+1 (510) 747-1947

<http://www.bioniks.net>



Symbol	Standard / Forordning	Standardens referencenr. / Symboltitel / Definition
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.4.3 / Se brugsanvisningen / Angiver nødvendigheden for brugeren af at læse brugsanvisningen.
R_xonly	USA FDA 21 CFR 801.109: Receptpligtigt udstyr.	Receptpligtigt udstyr / Produktet er medicinsk udstyr. I henhold til amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges af en læge eller efter lægeordination.
	Forordning om medicinsk udstyr (Medical Device Regulation, MDR)	MDR artikel 20 CE-mærket skal fremtræde i en synlig, letlæselig og uudslettelig form på selve udstyret eller på den sterile pakning. Hvis dette ikke er muligt eller ikke relevant pga. udstyrets beskaffenhed, skal CE-mærket placeres på emballagen. CE-mærket skal også være inkluderet i alle brugsanvisninger og på al salgsemballage. CE-mærket skal placeres på udstyret, inden det bliver bragt i omsætning. Mærket kan eventuelt ledsages af et piktogram eller andet mærke, der gør opmærksom på en særlig risiko eller anvendelse.
	Forordning om medicinsk udstyr (Medical Device Regulation, MDR)	MDR 23.1 (g) Resterende risici, der skal kommunikeres til brugeren og/eller anden person, skal inkluderes som begrænsninger, kontraindikationer, forholdsregler eller advarsler i oplysningerne fra fabrikanten.
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.1.1 / Fabrikant
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.1.2 / Autoriseret repræsentant i EU
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.7.7 / Angiver, at produktet er medicinsk udstyr.
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.1.6 / Katalognummer

Symbol	Standard / Forordning	Standardens referencenr. / Symboltitel / Definition
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.1.8 / Importør
	ISO 15223-1: Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav	5.7.10 / Unik udstyrsidentifikator
	Ikke relevant	Angiver oplysninger, der er beregnet til brugeren og vises i en pop op-boks på skærmen

Indhold

1	Introduktion.....	6
1.1	Indikationer for anvendelse	6
1.2	Retningslinjer vedrørende ordination.....	6
1.3	Påkrævede færdigheder eller viden.....	6
1.4	Tilsigtede kliniske fordele.....	6
1.5	Sikkerhedsoplysninger – definitioner	6
1.6	Sikkerhedsoplysninger – Liste over forholdsregler	6
1.7	Andre bemærkninger	6
1.8	Informations-, fejl- og advarselsmeddelelser	7
1.9	Skærbilleder i softwaren	7
2	Start	7
2.1	Påkrævet hardware og software til Kinetigram	7
2.2	Installation	8
2.3	Miljøopsætning	8
2.4	Indledende hardwareopsætning.....	10
2.5	Bærbar computer.....	13
3	Første logon.....	13
3.1	Start af programmet	13
3.2	Valg af sprog.....	14
3.3	Anmodning om konto og Bruger-login	14
3.4	Nulstilling af adgangskode	15
3.5	Indledende opsætning af Kinect	15
3.6	Datavalideringstest	18
3.7	Sådan henter du brugsanvisning og kundeproduktbemærkninger	18
4	Dataændringer	19
4.1	Redigering af eksisterende optegnelse.....	20
4.2	Sletning af eksisterende optegnelse	20
5	Brugeradministration	21
5.1	Brugeradministration / Microsoft Azure kontoadministration.....	21
5.2	Opret / slet brugere	21
5.3	Brugeradministrationssiden.....	22
5.4	Kinetigram-brugertyper	22

6	Administration af studiegrupper	23
6.1	Oprettelse af ny gruppe	23
6.2	Redigering af eksisterende grupper	25
6.3	Sletning af grupper	26
7	Administration af patienter	27
7.1	Tilføjelse af ny patient	27
7.2	Redigering af eksisterende patienter	28
7.3	Sletning af eksisterende patienter	29
8	Instruktioner til indsamling af bevægelsesdata (betjeningsvejledning)	29
8.1	Trin 1: Vælg patienten til målingen	30
8.2	Trin 2: Mål forsøgsdeltagerens parametre for den øvre ekstremitet	32
8.3	Trin 3: Bestemmelse af modul for høj eller lav funktion	34
8.4	Trin 4: Udførelse af en Kinect-vurdering – Start af dataindsamling	37
8.5	Dobbeltkontrol af data	47
8.6	Kinect-systemtjek ved udførelse af målinger	48
8.7	Andre henvisninger	50
9	Videoprotolkopier	52
10	Præstationsevne	53
11	Fejlfinding	53
11.1	Problem med forbindelsen til serveren	53
11.2	Problemer med Kinect	55
11.3	Software- og hardwareproblemer	56
11.4	Andre problemer - kontakt Bioniks-teamet	57
11.5	Fjernadgang for Bioniks Team Support	59
12	Auditeringslogfiler	59
13	Indberetning	59
14	Dekommissionering	59
15	Hurtigvejledning	60
16	Appendiks A: Måledataformat til eksport	61
16.1	Filformat	61
16.2	Vektor for 3D-koordinater for alle 25 led	62

1 Introduktion

1.1 Indikationer for anvendelse

Kinetigram er software som medicinsk udstyr, der anvendes med Microsoft Kinect til Xbox One til at evaluere ledfunktion i de øvre ekstremiteter ved hjælp af 3D kinematisk dataregistrering hos voksne. Produktet er beregnet til anvendelse for læger **i forbindelse med andre tilgængelige patientparametre** som et værktøj til bevægelsesanalyse. Kinetigram er beregnet til brug til flere patienter og til brug flere gange.

1.2 Retningslinjer vedrørende ordination

Der findes ingen specifikke retningslinjer udover brugsanvisningen. Hvis Kinetigram-softwaren skal anvendes som led i et klinisk forsøg, henvises der til forsøgsprotokollen vedrørende korrekt brug.

1.3 Påkrævede færdigheder eller viden

Brugere af Kinetigram er typisk klinikere eller fysioterapeuter, kinesiloger eller klinikassistenter, som overvåges af klinikere. Brugere er uddannet i dette dokument og andet uddannelsesmateriale fra Bioniks.

1.4 Tilsigtede kliniske fordele

Kinetigram-softwaren er et avanceret værktøj til læger, der hjælper med at diagnosticere og håndtere degenerative skulder tilstande og andre svækkelser i overekstremiteten. Kinetigram er et unikt klinisk bevægelsesanalysesystem, der kan anvendes til fysisk vurdering i medicinske miljøer, atletiktræning og personlige fitnesssammenhænge. Softwaren registrerer leddenes bevægelsesbaner under en foruddefineret serie af bevægelser. De indsamlede data leveres som input til en biomekanisk model (databehandlersubsystemet), der filtrerer de dynamiske kinetiske data for at: 1) forbedre nøjagtigheden; 2) beregne ledbevægelser og 3) ekstrahere testspecifikke bevægelsesparametre.

Derudover giver Kinetigram-plattformen mulighed for at følge en forsøgspersons fremskridt over tid. Da brugergrænsefladen, kameradataene og den biomekaniske model kan anvendes på hele overkroppens skelet, tilbyder Kinetigram en omfattende tilgang til behandling af muskuloskeletale tilstande i overkroppen. Ved at kvantificere, hvordan folk bevæger sig, giver Kinetigram mulighed for ny indsigt i skadesrisiko samt restitutionsprocesser. Dette kan give supplerende oplysninger, der kan vejlede i korrekt brug af kirurgi og ikke-kirurgisk behandling for at gøre behandlingen mere effektiv og omkostningseffektiv.

1.5 Sikkerhedsoplysninger – definitioner

Forsigtig – Oplysninger om udvisning af særlig forsigtighed med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Kinetigram-softwaren.

1.6 Sikkerhedsoplysninger – Liste over forholdsregler

Forholdsregel: Resultaterne fra softwaren må ikke alene bruges som grundlag for bestemmelser om patientens behandling.

Forholdsregel: Der må ikke køres andre softwareprogrammer, mens procedurerne er i gang.

1.7 Andre bemærkninger

Termer brugt i denne brugsanvisning:

Bemærkninger: Oplysninger, der hjælper dig med den korrekte betjening af softwaren, eller fortolkning af de


resulterende oplysninger.

Vigtigt: Vejledning, som, hvis den ikke følges, kan føre til fejl diagnoser og/eller tab af brugen af patientdata.


1.8 Informations-, fejl- og advarselsmeddelelser

I softwaren vises undertiden de følgende pop op-vinduer. Bemærk, at ordet Advarsel og advarselssymbolet er standardadvarslen i Windows og ikke den forordningsmæssige definition af advarsler (hvor der er rimelige tegn på en associeret alvorlig fare ved anvendelsen af softwaren). En risikovurdering af udstyret har vist, at der ikke er nogen risici, der kunne resultere i alvorlige farer i forbindelse med dette udstyr.


Informationsmeddelelser er angivet med pop op-vinduet med symbolet ⓘ, f.eks.:

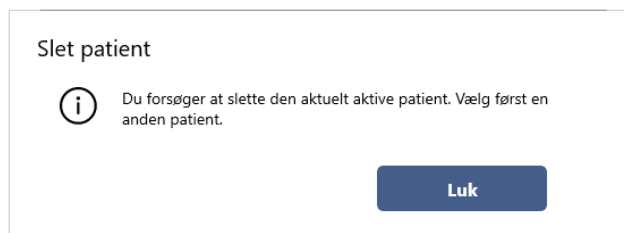

Advarsler i softwaren er angivet med et pop op-vindue med symbolet ⚠, f.eks.:

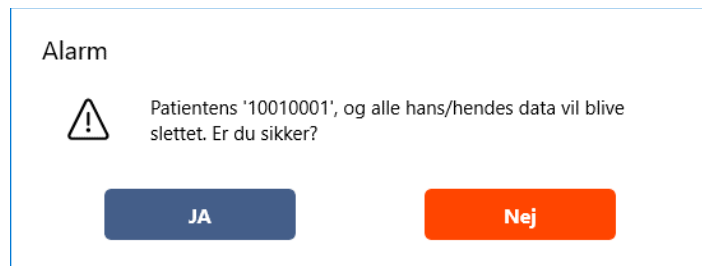

Fejl i softwaren er angivet med et pop op-vindue med titlen Fejl, f.eks.:

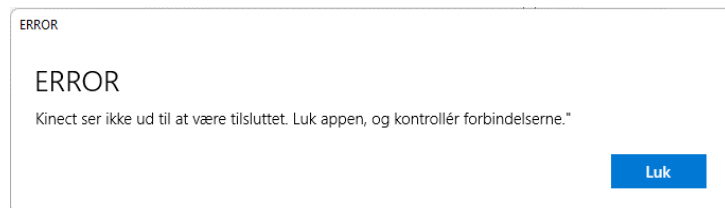

1.9 Skærbilleder i softwaren

Skærbilleder (billeder) af brugergrænsefladen i denne vejledning kan se anderledes ud end i den aktuelle version af Kinetigram-softwaren, der er installeret på din computer, men indholdet og instruktionerne gælder for alle versioner.

2 Start

2.1 Påkrævet hardware og software til Kinetigram


Kinetigram-softwaren kræver den følgende hardwarekonfiguration for at kunne fungere:

- Microsoft Kinect sensor til Xbox One med Kinect Adapter til Windows (Xbox One S/Xbox One X)

- Standard-pc (skrivebord eller bærbar) med de følgende minimumshardwarekrav: CPU: Quad-core i5 2,1 GHz, 64-bit, RAM: 8 GB, dedikeret USB 3,0 Bus (Intel eller Renesas chipsæt), grafikort: DX11 Capable Graphics Card (f.eks. Intel 4400+, Nvidia GeForce GT 640+)

Pc'en skal have følgende softwarekonfiguration:

- Windows 10 operativsystem: 64-bit, version 1803 (opdateret april 2018) eller nyere, eller Windows 11 operativsystem: 64-bit, version 21H2 eller nyere
- Installation af Microsoft Kinect Runtime 2.0 (version 2.0.1410 og nyere) og de seneste Kinect Sensor drivere fra Windows Update
 - Bemærk: Den indledende tilslutning af Kinect-kameraet vil kræve indstillingstilladelser for at softwaren kan få adgang til kameraet. Dette bør foretages af Bioniks-teamet under softwareinstallationen.

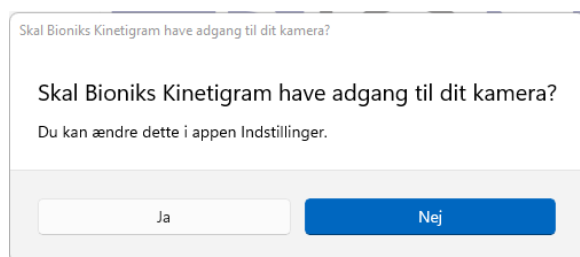

- Aktiv internetforbindelse (Ethernet eller Wi-Fi)

TV-monitoren bør have de følgende minimumsspecifikationer:


- Diagonal dimension: 53,3 cm (21 tommer)
- Opløsning: 1920x1080

2.2 Installation


Installation af Kinetigram skal udføres af Bioniks-teamets personale.

2.3 Miljøopsætning


For at kunne spore bevægelser korrekt under udførelsen af Kinetigram-protokoller skal kameraet være placeret i en afstand på ca. 230 cm (90 tommer) fra deltageren og i en højde på 115 cm (45 tommer) som vist i figurerne herunder. Kinect skal pege nedad mod deltageren, og vinklen skal justeres, så kameraet optager deltagerens fødder og spidsen af armen, når armen er strakt helt ud oven over hovedet. Placeringen af stolen og TV-stativet skal markeres med tape, så det er let at placere ved senere testsessioner. Vurderinger bør så vidt muligt altid foretages på det samme sted.

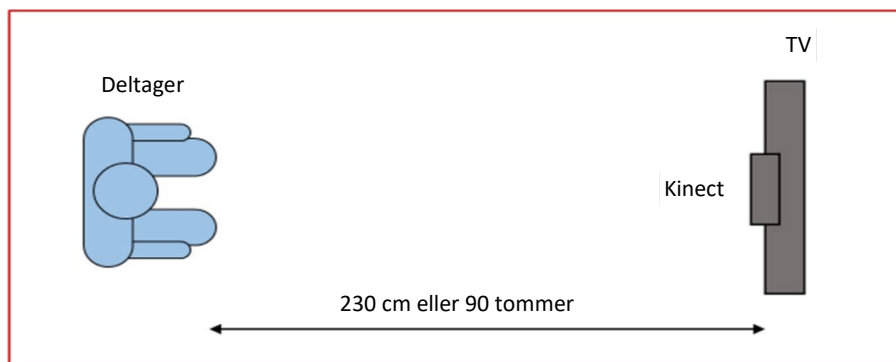

Figur 1: Opsætning af Kinect. Set fra oven.

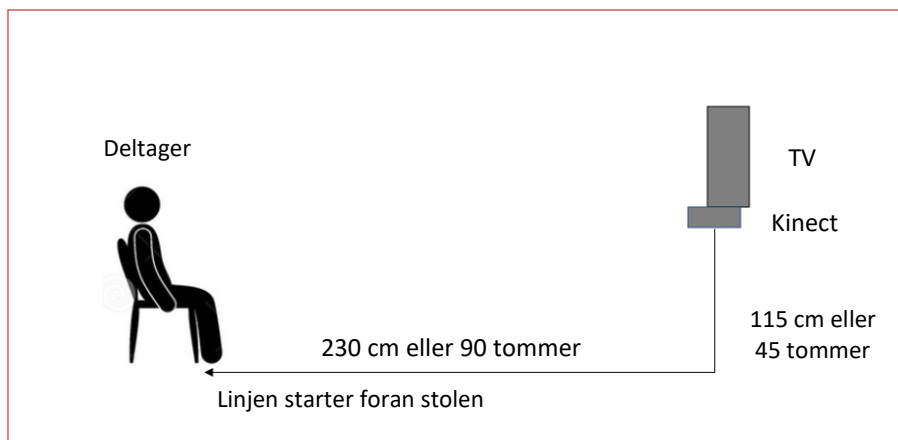

Figur 2: Opsætning af Kinect. Set fra siden.

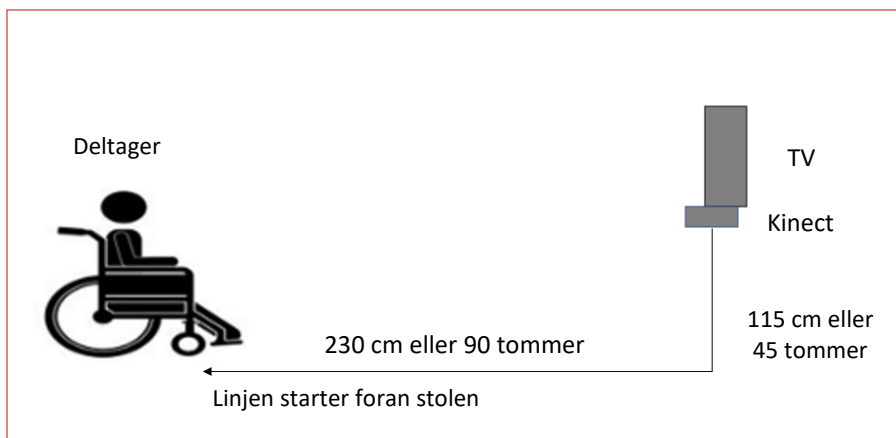

Figur 3: Opsætning af Kinect for patienter i rullestol. Set fra siden.

Yderligere krav:


- **Bemærk:** Sørg for, at rummet er tilstrækkeligt oplyst. For lidt lys kan reducere optagelsens billedhastighed.
- **Bemærk:** Der må ikke være nogen synlige forhindringer mellem Kinect-sensoren og deltageren. Sørg så vidt muligt for at rydde op i området/rummet.
- **Bemærk:** Der bør ikke være nogen tætstående genstande, rod, vinduer eller gardiner bagved patienten.
- **Bemærk:** Deltageren bør ikke bære løse beklædningsdele.

- **Bemærk:** Pårørende bør ikke befinde sig i nærheden af deltageren.
- **Vigtigt:** Sørg for, at deltageren befinder sig mindst 0,91 m til 1,22 m (3 til 4 fod) fra væggen, så der er frirum under bevægelse.
- **Vigtigt:** Undgå direkte sollys på sensoren og på deltageren, da det kan påvirke målingen.
- **Vigtigt:** Sørg for, at alle forbindelser og strømkabler er sikrede for at undgå snublefare/fald.


2.4 Indledende hardwareopsætning

På skrivebordscomputerens bagside tilkobles alle komponenter som vist i figuren herunder. (Bemærk: Billederne herunder viser en Dell XPS 8950, men de fleste almindelige skrivebordscomputere har tilsvarende hardwareforbindelser):

- Tilslut HDMI-kablet til TV'et og den modsatte ende til pc'en videoindgang (som vist herunder. Dette kan allerede have fundet sted i forbindelse med opsætning af tidligere udstyr. Kontrollér venligst, at kablet er tilsluttet korrekt):

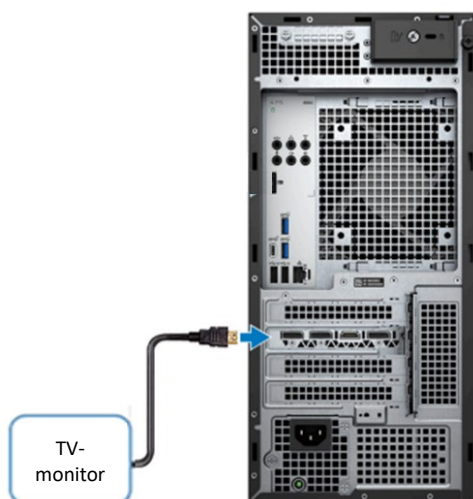

- Tilslut alle komponenter fra Microsoft Kinect som vist:

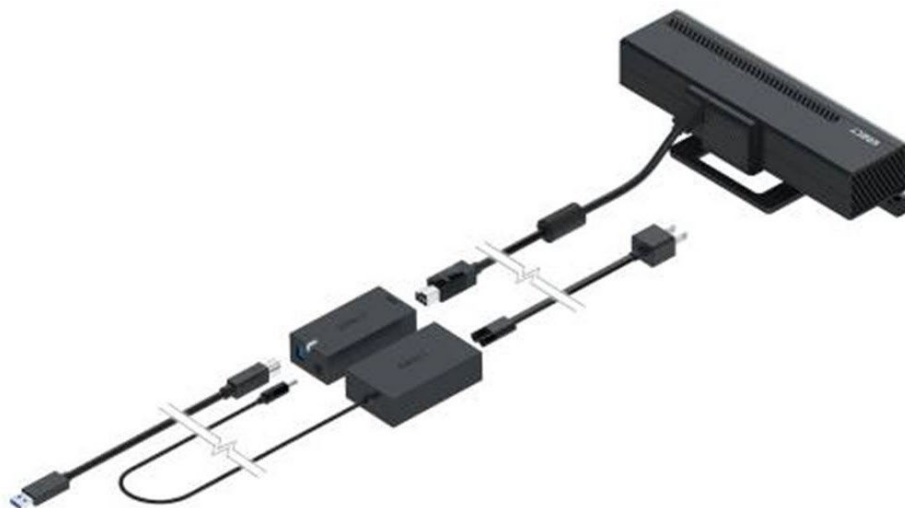

- Tilslut Microsoft Kinect USB-adapteren på bagsiden af pc'en (en hvilken som helst af de blå USB3-åbninger med **SS** symbol):



Yderligere oplysninger om Microsoft Kinect-kameraet findes på Microsoft Support-siderne:


- Kinect til Windows
<https://support.xbox.com/en-US/xbox-on-windows/accessories/kinect-for-windows-info>
- Opsæt Kinect til Windows v2 eller en Xbox Kinect sensor med Kinect-adapter til Windows
<https://support.xbox.com/en-US/xbox-on-windows/accessories/kinect-for-windows-v2-setup>
- Tilslut strømkablet:




- Opret Ethernet- eller Wi-Fi-forbindelse

Tjek med IT-personalet, om computeren kan kobles til kabelforbundet internet. I så fald tilsluttes ethernetkablet til klinikkens/hospitalets netværk på pc'ens bagside. Windows skal muligvis konfigureres manuelt for at få internetadgang.

Hvis der anvendes Wi-Fi, finder du Wi-Fi-netværket ved at klikke på symbolet  på logonskærmens værktøjslinje. Vælg **Opret forbindelse**:

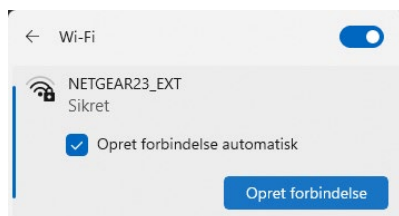


Og indtast din sikkerhedsnøgle:

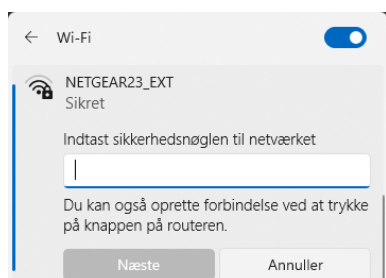

Tjek med IT-personalet for at få de påkrævede brugeroplysninger til registrering.

- Tilslut musen og tastaturet

Musen og tastaturet kan tilsluttes enten foran eller bag på pc'en i USB-portene (angivet med rødt herunder). En USB-dongle følger med, hvis en trådløs mus og et trådløst tastatur skal anvendes. Donglen sættes i en af USB-portene på forsiden. Sørg for at tænde for eller tilslutte strømmen på det trådløse tastatur og den trådløse mus.

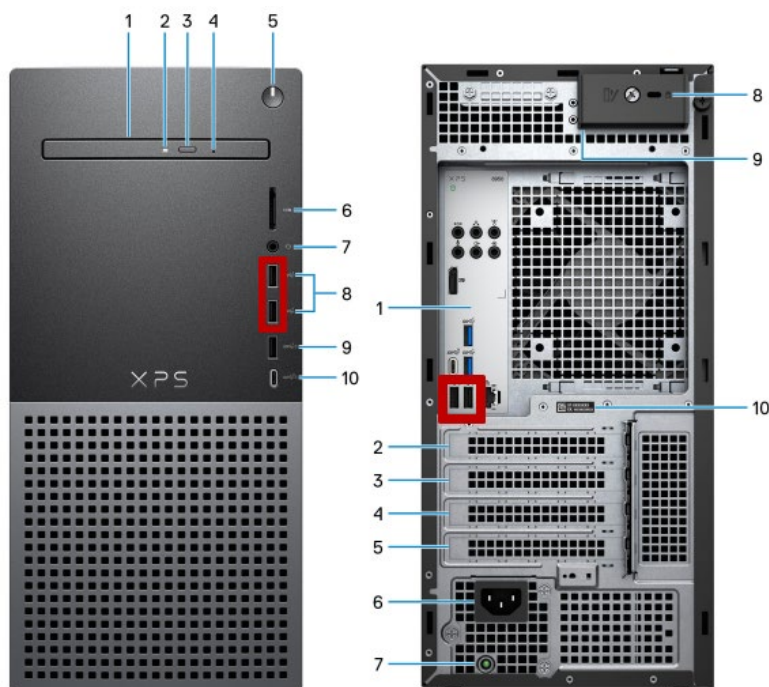

Når alle hardwarekomponenterne er tilsluttet, tænder du for TV'et (monitoren) og trykker på tænd/sluk-knappen på pc'en. Nu er du klar til at tilgå computeren og starte den indledende logon.

2.5 Bærbar computer

Hvis du bruger en bærbar computer til Kinetigram, skal den bærbare computer overholde de samme specifikationer som beskrevet i afsnit 2.1. Den bærbare computer skal altid være koblet til den eksterne strømforsyning, når der indsamles data. En ekstern skærm kan anvendes ved brug af HDMI-forbindelsen eller anden displayforbindelse. Kinect-sensoren skal altid kobles til en USB-kontakt type 3.0 eller højere, mærket med symbolet . Undgå at tilslutte andre USB-anordninger på samme side af den bærbare computer.

3 Første logon


3.1 Start af programmet

Når du tænder computeren, vil Windows 10 logonskærmen blive vist, hvor du kan indtaste dine brugeroplysninger for at logge på Windows. For computere, der konfigureres af Bioniks, vil du få logonoplysninger for to prækonfigurerede konti: En standard Windows-brugerkonto og en administrativ Windows-brugerkonto. Standard Windows-brugerkontoen bruges til udførelse af målinger med Kinetigram-softwaren, og den administrative Windows-brugerkonto anvendes til håndtering af computeren (f.eks. foretage påkrævede opdateringer, installere software etc.).

Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden må appen kun anvendes med standardbrugerkontoen i Windows (ikke administrativ).

Vigtigt: Inden Kinetigram-programmet køres, skal det sikres, at computeren er koblet til internettet, enten med en trådløs (Wi-Fi) eller med en kabelforbundet (LAN)-forbindelse. Softwaren kan kun betjenes med en aktiv internetforbindelse.

Når du er logget på computeren, åbner du programmet [Bioniks Kinetigram](#) på skrivebordet eller via Start-menuen.

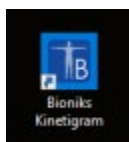

Når Bioniks Kinetigram er startet, viser programmet login-siden.

Vigtigt: Du må ikke køre nogen anden software, mens der udføres procedurer, da softwaren kan påvirke dataindsamlingen.


3.2 Valg af sprog

Før du logger på Kinetigram, skal du vælge det ønskede sprog til brugergrænsefladen (på login-siden). Du gør dette ved at klikke på rullemenuen for valg af sprog (øverst til højre) og vælge det ønskede sprog. Bemærk, at sproget kan ændres når som helst under en session ved at logge ud af softwaren og vende tilbage til login-siden. Lyden til videoerne om patientmålinger gives på det lokale sprog og kan vælges særskilt på siden om målinger. Som med brugergrænsefladen kan videosproget ændres når som helst. Standardsproget for lyden forudindstilles sammen med installationen af softwaren.

3.3 Anmodning om konto og Bruger-login

Login-oplysninger i Kinetigram administreres af Bioniks via en godkendelsestjeneste i Microsoft Azure B2C¹. Anmodninger for nye brugere skal sendes til help@bioniks.net. Hver ny bruger vil modtage et link via e-mail til at oprette login ved hjælp af en særlig webformular (se nedenfor).

¹ <https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory-b2c/>

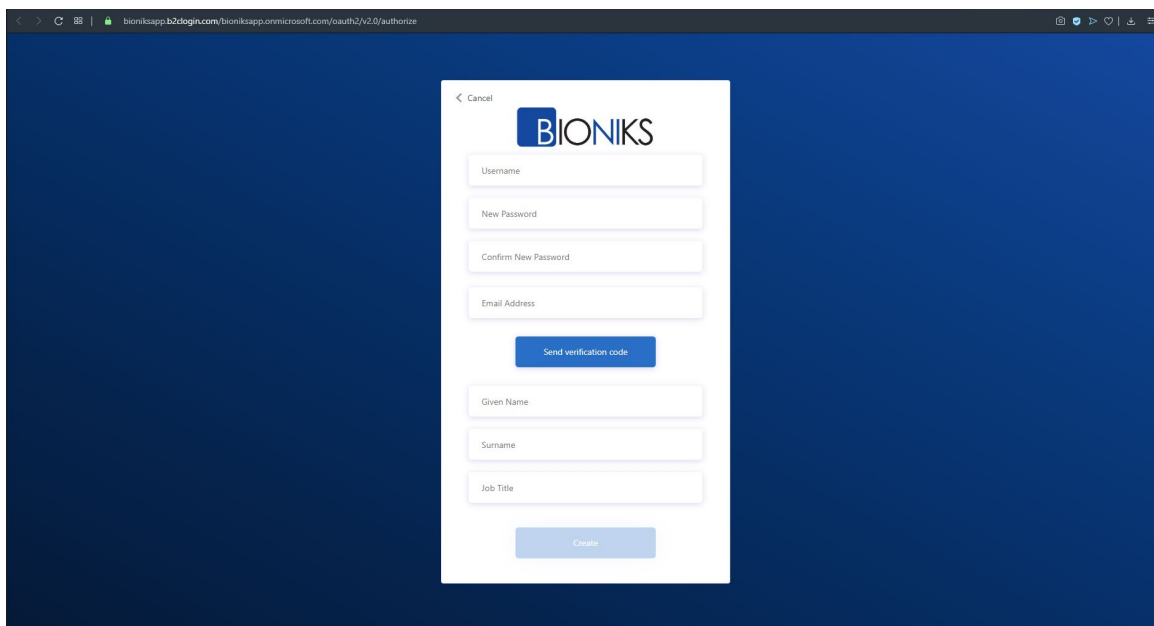

Besøg linket via en webbrowser for at få formularen frem. Indtast brugernavn, adgangskode og e-mailadresse i formularen. Hver bruger skal vælge et unikt brugernavn og en adgangskode, der overholder Azure's strenge regler for adgangskoder. Adgangskoder skal være på mindst 8 tegn og ikke mere end 64 tegn og skal indeholde tre af de følgende tegntyper: små bogstaver, store bogstaver, tal og symboler. Inden der fortsættes, skal e-mailadressen bekræftes ved at klikke på [Send bekræftelseskode](#). Efter nogle øjeblikke får du en numerisk kode via e-mail. Indtast koden i formularen, og klik på [Bekræft kode](#). Efter bekræftelsen via e-mail indtastes de resterende tilmeldingsoplysninger i webformularen (navn, institution, undersøgelsesstedets nummer [hvis relevant] etc.). Klik på [Opret](#) for at fuldføre kontooprettelsen. Efter kontoen er oprettet, aktiverer Bioniks Service din konto til anvendelse med Kinetigram-programmet. Aktiveringen af kontoen kan tage op til et døgn. Når kontoen er blevet aktiveret, kan du starte programmet og logge på.

3.4 Nulstilling af adgangskode

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du anmode om at få nulstillet adgangskoden på Kinetigram login-siden ved at klikke på linket [Nulstil adgangskode](#). Linket åbner en webformular, hvor du kan anmode om nulstilling af adgangskoden. Du skal indtaste dit brugernavn og den e-mailadresse, du brugte for at få kontoen. Hvis kontoen bliver bekræftet, sendes anvisningerne til nulstilling af adgangskoden til denne e-mailadresse. Hvis du ikke ved, hvad din adgangskode er, bedes du sende en e-mail til help@bioniks.net for yderligere oplysninger.

3.5 Indledende opsætning af Kinect

Inden du foretager den første måling, og hver gang systemet flyttes, skal du sørge for, at Kinect-kameraet er indstillet korrekt. Der henvises til afsnit 2.3 og 2.4 vedrørende placering af Kinect-kameraet og stolen og opsætning af systemhardware.

Efter Kinect er blev tilsluttet korrekt, skal du bekræfte, at kameraet kan se deltageren. Kameravisningen åbnes ved at vælge [Kinect-opsætning](#) fra menuen. Systemtjekvinduet for Kinect åbner. Systemtjekket udfører flere forskellige diagnostiske kontroller for at sikre, at systemet er sat korrekt op til optagelserne:

1. Kinect-kraft – Kontrollerer, at Kinect-kameraet får strøm og kører med mindst 15 FPS.
2. Skelet sporet – Kontrollerer, at skeletsporingen er aktiveret.

3. Enkelt skelet til stede – Kontrollerer, at kun en enkelt person bliver sporet.
4. Fuld krop synlig – Kontrollerer, at det sporede skelet er helt synligt og ikke tildækket.
5. Gulv synligt – kontrollerer, at Kinect-systemet er i stand til at registrere gulvet og bekræfter, at den lodrette afstand fra gulvet er mindst 80 cm (31,5 tommer)


Når alle elementer har bestået tjekket, vises et grønt flueben: ☒.

Hvis et element ikke har bestået, vises et rødt kryds: ☐.

Vælg elementet på listen for at få flere oplysninger. Oplysninger om afhjælpning af problemet vises i det gule, rektangulære område. I figuren herunder er deltageren for tæt på kameraet, og hans/hendes fødder kan ikke ses, og af denne grund er elementet Fuld krop synlig markeret med et rødt kryds.

Kinect systemtjek

Gennemgå punkterne til højre for at opsætte Kinect-kameraet korrekt.

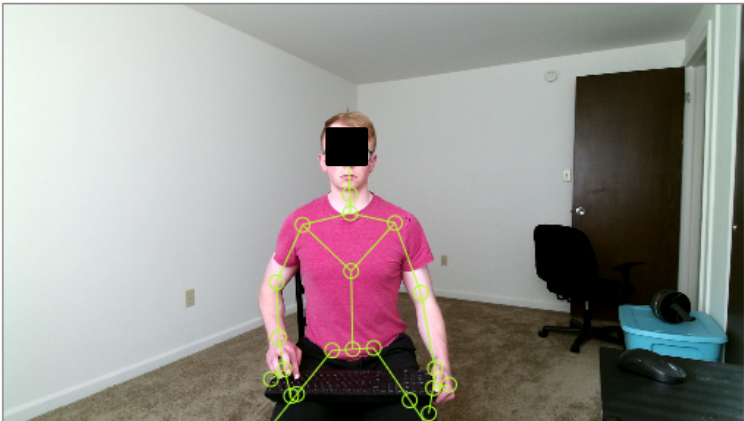

- ☒ Kinect-effekt
- ☒ Enkelt skelet til stede
- ☒ Skelet sporet
- ☐ Hele kroppen synlig
- ☒ Gulvsynlighed

Alle afkrydsningsfelter skal være grønne. Klik på de viste elementer for at få flere oplysninger.

Kinect kan ikke se hele kroppen. Juster vinklen på Kinect-sensoren nedad for at indfange hele kroppen, inklusive fødderne.

Hvis du oplever problemer med Kinect-kameraet, skal du følge nedenstående trin:


- 1) Bekræft, at kameraet er tilsluttet.
- 2) Kontrollér, om der er afventende Windows-opdateringer.
- 3) Genstart din computer efter behov.

Luk

Når deltageren bevæger sig bagud, vises der 5 grønne flueben, og systemet er opsat korrekt til målingen.

Kinect systemtjek

Gennemgå punkterne til højre for at opsætte Kinect-kameraet korrekt.

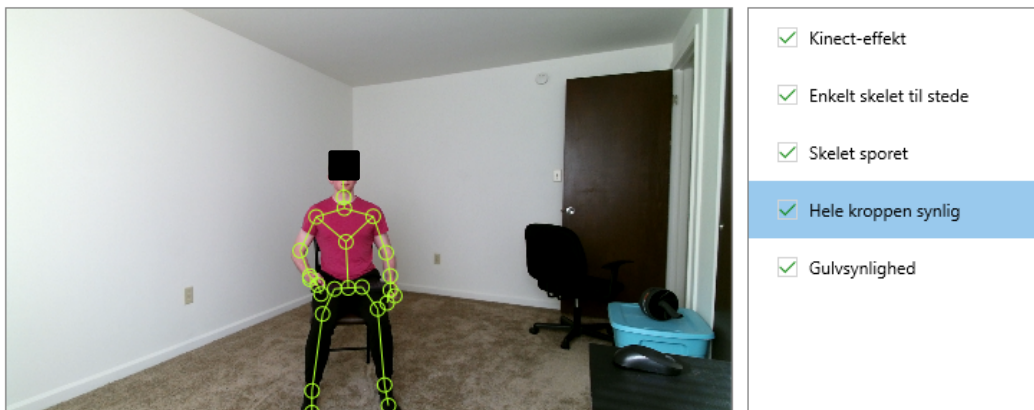

Alle afkrydsningsfelter skal være grønne. Klik på de viste elementer for at få flere oplysninger.

Element OK

Hvis du oplever problemer med Kinect-kameraet, skal du følge nedenstående trin:

- 1) Bekræft, at kameraet er tilsluttet.
- 2) Kontrollér, om der er afventende Windows-opdateringer.
- 3) Genstart din computer efter behov.

Luk

De følgende tips kan hjælpe med at opnå kun grønne flueben:

- Placér stolen i den korrekte afstand som vist i Figur 1 og Figur 2.
- Sørg for, at Kinect-kameraet er placeret i den rette højde ifølge Figur 2.
- Sørg for, at patienten eller kameraet ikke er i direkte sollys, som ville påvirke sporingen.
- Sørg for at bruge den korrekte type stol til vurderingen.
- Justér/peg/vip kameraet sådan, at patientens fødder er synlige på billedet. Sørg for, at hele kroppen er synlig (når armen er strakt helt ud over hovedet), og at fødderne er placeret adskilt på gulvet.
- Sørg for, at gulvet foran patienten er fri for forhindringer.
- Sørg for, at Kinect-kameraet er monteret mindst 80 cm (31,5 tommer) over jorden.

Vigtigt: Sørg for, at alle Kinect-systemtjkelementer markeres som gyldige, inden der foretages målinger med patienter.

3.6 Datavalideringstest

Vigtigt: Før der indsamles data om forsøgsdeltagere, skal hver evaluator indsamle et valideringsdatasæt, der valideres af Bioniks-teamet.

Evaluatoren bør anvende en frivillig person (rask) til testen under kontrolgruppen. Følg denne protokol som eksempel:


<i>Evaluering</i>	<i>Modul</i>	<i>Niveau</i>	<i>Hastighed</i>	<i>Side</i>	<i>Vægt</i>
1	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Høj	Normal	Højre	Nej
2	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Høj	Normal	Venstre	Nej
3	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Høj	Normal	Højre	Ja, 500g
4	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Høj	Normal	Venstre	Ja, 500g
5	Funktionelt arbejdsområde (FWS)	Høj	Normal	Højre	Nej
6	Funktionelt arbejdsområde (FWS)	Høj	Normal	Venstre	Nej

Der henvises til afsnittet “Instruktioner til indsamling af bevægelsesdata (betjeningsvejledning)” (7) for oplysninger om udførelse af disse målinger. Når alle data er indsamlet, skal evaluatoren kontakte Bioniks-teamet for at udføre dataanalysen.


Vigtigt: For kliniske studier henvises der til den forsøgsspecifikke betjeningsvejledning vedrørende dataindsamlingsprotokollen for kvalitetskontrol (QC).

3.7 Sådan henter du brugsanvisning og kundeproduktbemærkninger

Du kan læse *brugsanvisningen* i Kinetigram-applikationen ved at vælge [Hjælp](#) i menuen (rød pil). Brug <PgUp>/<PgDn> tasterne eller musens hjul til at skifte mellem siderne i dokumentet. Du kan også bruge <Ctrl>+<Mouse Scroll> til at zoome ind/ud på dokumentet. For bedre visning eller udskrivning kan du åbne *brugsanvisningen* i den eksterne PDF Viewer ved at klikke på linket [Åbn i internetbrowser](#) nederst på skærmen (grøn pil).

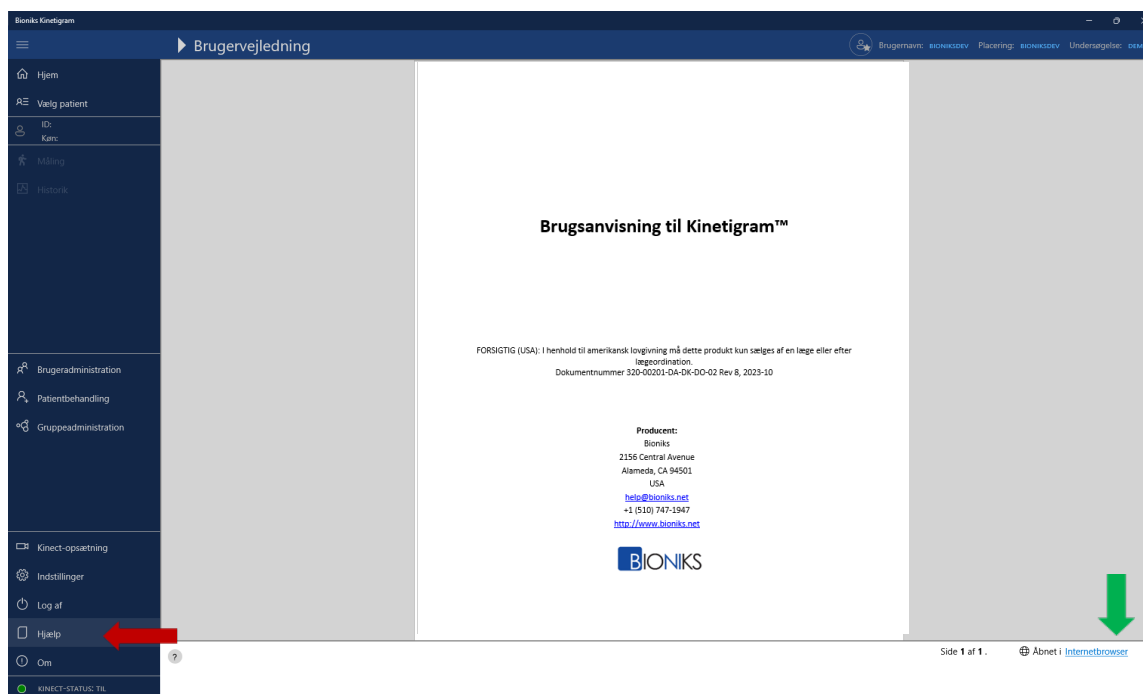

Kundeproduktbemærkninger tilgås ved at klikke på knappen **Om** i menuen (rød pil) og klikke på linket til **kundeproduktbemærkninger** (grøn pil). Dette åbner Bioniks-websitet, hvor kundeproduktbemærkningerne kan åbnes ved at klikke på linket til det ønskede sprog i standard PDF Viewer på dit system (f.eks. Edge, Acrobat Reader).

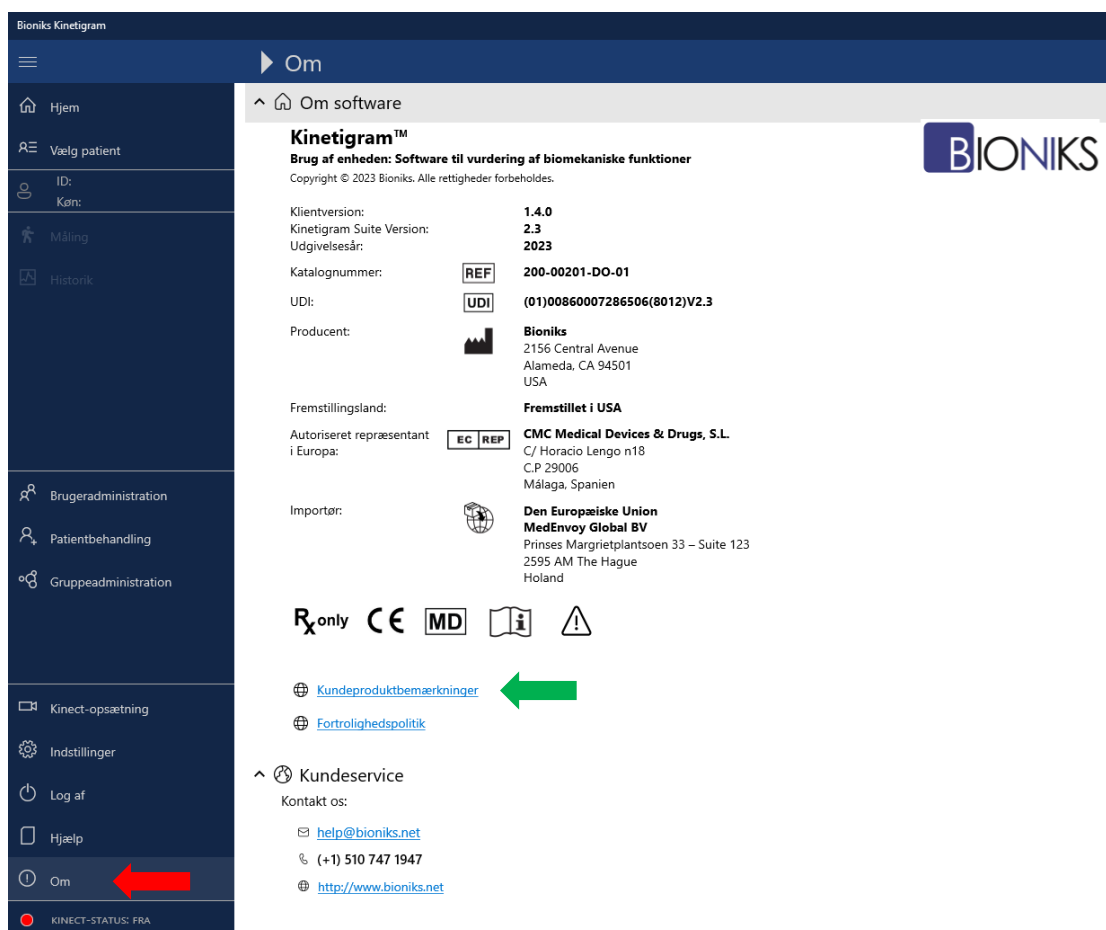

4 Dataændringer

Kinetigram-softwaren er designet til at registrere alle ændringer i patient-, gruppe-, sessions- og antropometriske data, herunder sletninger. Disse ændringer kræver, at brugeren angiver en "årsag til ændring", som registreres i redigeringsdialogboksene for hver datatype. Dette er nødvendigt for at opfylde auditeringskravene i forbindelse med FDA-forordningen: 21 CFR del 11, til elektroniske optegnelser.

Dialogboksen Årsag til ændring indeholder to felter:

- 1) **Årsag til ændring:** Et foruddefineret rullemenuvalg (**påkrævet**)
- 2) **Yderligere oplysninger:** Et åbent felt til at angive yderligere oplysninger, som er nødvendige, når årsagen til ændringen er "Andet".

4.1 Redigering af eksisterende optegnelse

Nedenfor ses et eksempel på en dialogboks til redigering af patientoplysninger, hvor en pop-up viser den foruddefinerede liste over tilgængelige elementer i listen Årsag til ændring:

Rediger patient

Patient-ID* (f.eks. Free Text)
 TestPatient1

Gruppe*
 Control Group

Køn*
☐ Mand ☒ Kvinde ☐ Ingen rapport

Hånddominans (håndethed) *
 Venstre

Højde (cm)*
 165,1

Vægt (kg)*
 68,0

Enheder
☐ US ☒ Metrisk

Er aktiv*
☒ Ja

* Påkrævet

Gem **Annuller**

Oplysninger om dataændring*

Årsag til ændring
 Vælg årsag til ændring

Yderligere oplysninger
 Indtast yderligere oplysninger


Bruger, der har logget på
 Bioniks Manager (bioniksmanager)

Andet
☐ Rettelse af dataindtastningsfejl
☐ Opdatering af eksisterende data
☐ Tilføjelse af manglende data
☐ Præcisering af data
☐ Sletning af forkerte data

Bruger, der har logget på
 Bioniks Manager (bioniksmanager)

4.2 Sletning af eksisterende optegnelse

Når en optegnelse slettes, såsom en forsøgsperson uden data eller en optaget session, vises en advarselsdialogboks. Denne dialogboks beder brugeren om at indtaste en årsag til sletningen af dataene under afsnittet **Årsag til ændring**, før der fortsættes med sletningen af optegnelsen. Bemærk, at aktiviteter relateret til sletning af optegnelser kun kan udføres af superbrugere.

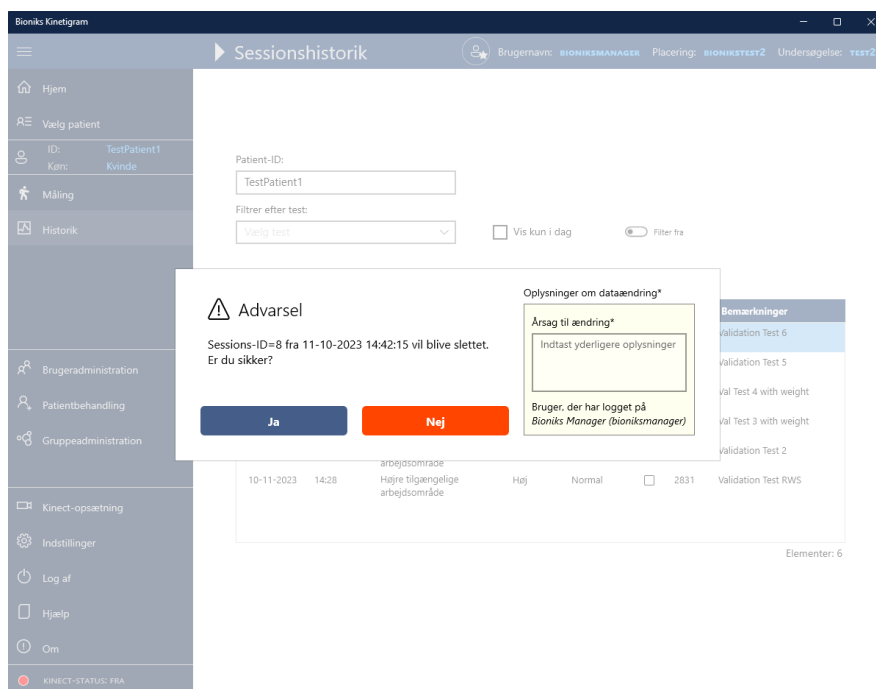

5 Brugeradministration

5.1 Brugeradministration / Microsoft Azure kontoadministration

Brugeroplysninger og autentificering i Kinetigram administreres af Microsoft Azure B2C autentificeringstjenesten. Autentificeringstjenesten er baseret på Azure Active Directory (Azure AD) identitetsplatformen, en enterprise-grade løsning til cloudidentitet og adgangsadministration. Konti, der er nødvendige for at få adgang til Kinetigram, er udelukkende lokale konti (lokale for Azure-mappen), og er lagret på en enkelt, sikker cloud-plads, som administreres af Bioniks, på servere i USA. Ingen autentificerings- eller personlige oplysninger deles eller hentes fra tredjepartstjenester som f.eks. sociale medieplatforme. Azure og Bioniks Kinetigram-applikationen overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR). De følgende individuelle rettigheder er således bevaret:

- Bioniks deler aldrig oplysninger med tredjeparter.
- Brugere kan se og redigere alle data forbundet med deres identitet.
- Brugerkontoen og alle data relateret til brugerens identitet kan slettes.
- Eventuelle brud skal indberettes til stedet.


Send venligst e-mails til Bioniks service på help@bioniks.net i tilfælde af spørgsmål vedrørende brugeradministration og GDPR. Fortrolighedspolitikken er tilgængelig på login-siden eller på følgende adresse: <http://docs.bioniks.net/kinetigram/privacy.html>

5.2 Opret / slet brugere

Anmodninger for nye brugere eller fjernelse af brugere skal sendes til help@bioniks.net. Forløbet for oprettelse af en ny konto er beskrevet i afsnit 3.3.

5.3 Brugeradministrationssiden

Siden Brugeradministration i applikationen viser en liste over aktuelle aktive brugere, der er tildelt til stedet. Siden indeholder links, hvor du kan opdatere dine kontooplysninger (**Rediger profil** knappen) eller nulstille din adgangskode (**Nulstil adgangskode** knappen).

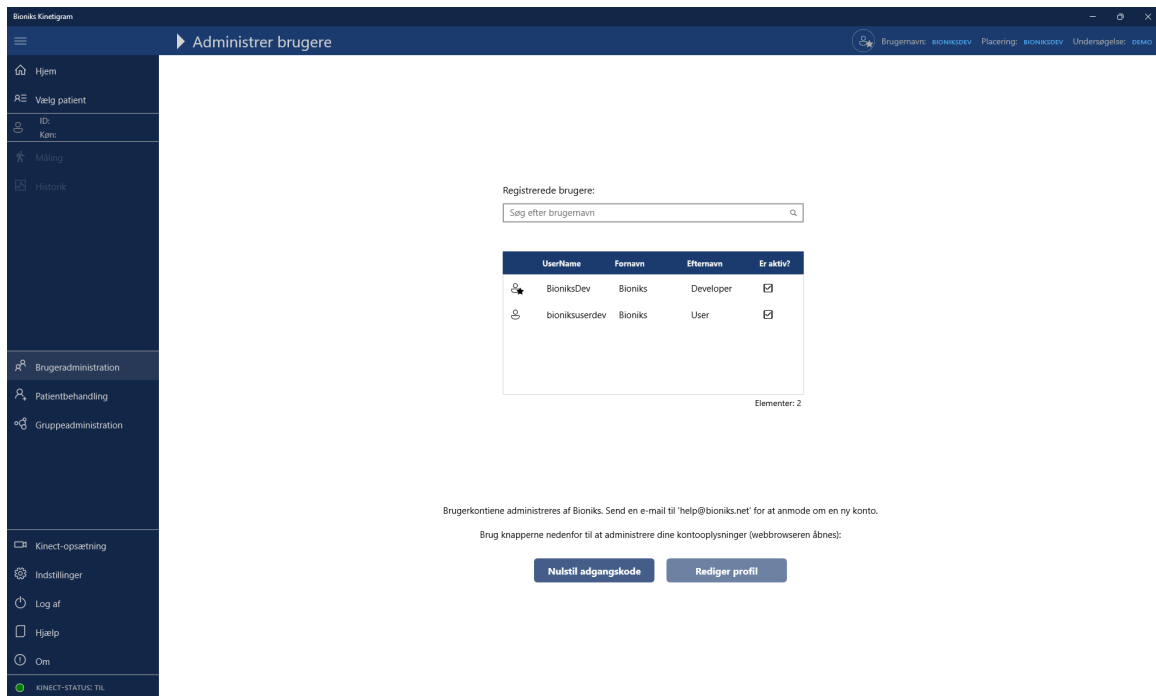

5.4 Kinetigram-brugertyper

Kinetigram-softwaren benytter tre forskellige brugertyper, som har forskellige privilegier med henblik på betjening af applikationen:

1. **Standardbruger**: tildelt til stedets evaluator(er)
2. **Superbruger**: tildelt til en leder på stedet
3. **Administrator**: tildelt til Bioniks-administrator
4. **Auditor**: yderligere rolle tildelt til administratorbrugere

Hver bruger har forskellige autoritetsområder for forskellige opgaver i applikationen (se skemaet herunder).

Godkendte opgaver	 Standardbruger	 Superbruger	 Administrator	Auditor
Ændre dine kontooplysninger	x	x	x	
Ændre din adgangskode	x	x	x	
Oprette/redigere/slette studiegrupper		x	x	
Oprette/redigere nye patienter	x	x	x	
Slette patienter		x	x	
Slet målingssessioner		x	x	
Adgang til eksportlogge	x	x	x	
Adgang til auditeringslogfiler				x

Autorisationsniveauet er angivet med brugerikonet (se skemaet herover), vist i øverste højre hjørne af applikationens titellinje:




6 Administration af studiegrupper

Studiegrupper bruges til at organisere deltagerne i grupper, så det er nemmere at skelne mellem deltagere, der hører til en bestemt undersøgelse, eller skelne patienter fra kontrolpersoner. Flere studiegrupper kan være blevet defineret på forhånd, når du kører systemet for første gang. Andre grupper kan tilføjes efter behov.


Vælg [Gruppeadministration](#) på menuen for at administrere grupperne.

6.1 Oprettelse af ny gruppe

Kun administratorer har lov til at oprette nye grupper under [Gruppeadministration](#). Aktive grupper er vist på siden Gruppeadministration.

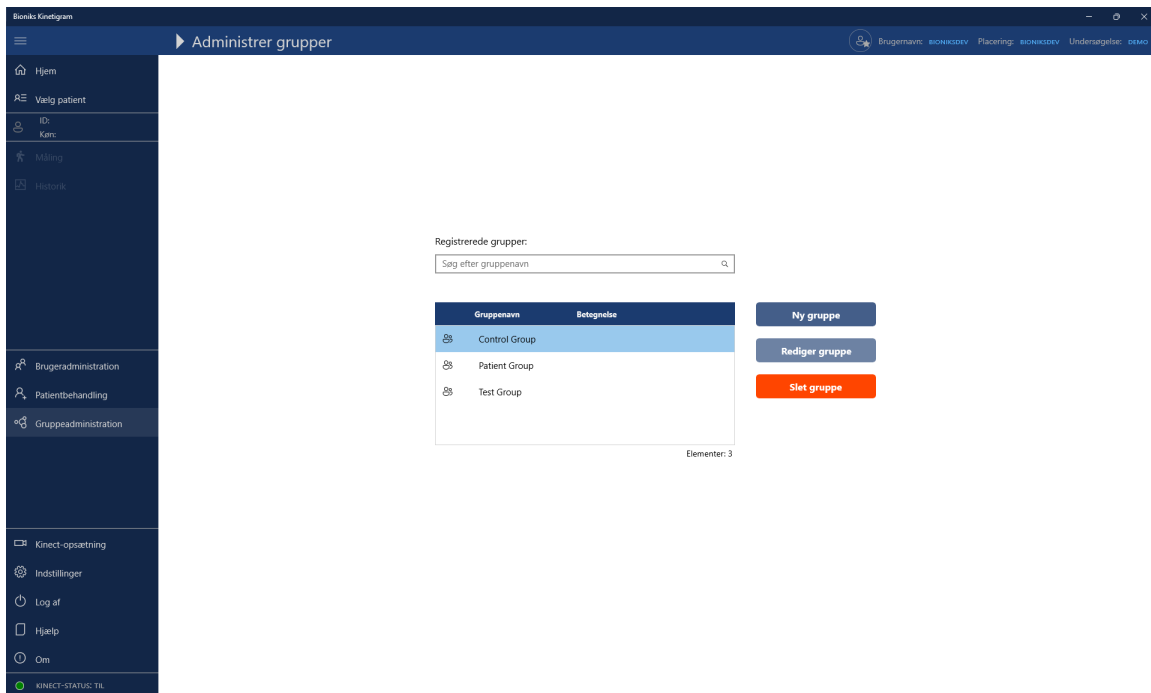

For at tilføje en ny gruppe vælger du **Gruppenavn** og tilføjer en beskrivelse/kommentarer. Gruppenavnet skal være unikt. Systemet tillader ikke, at der oprettes to grupper med det samme navn.

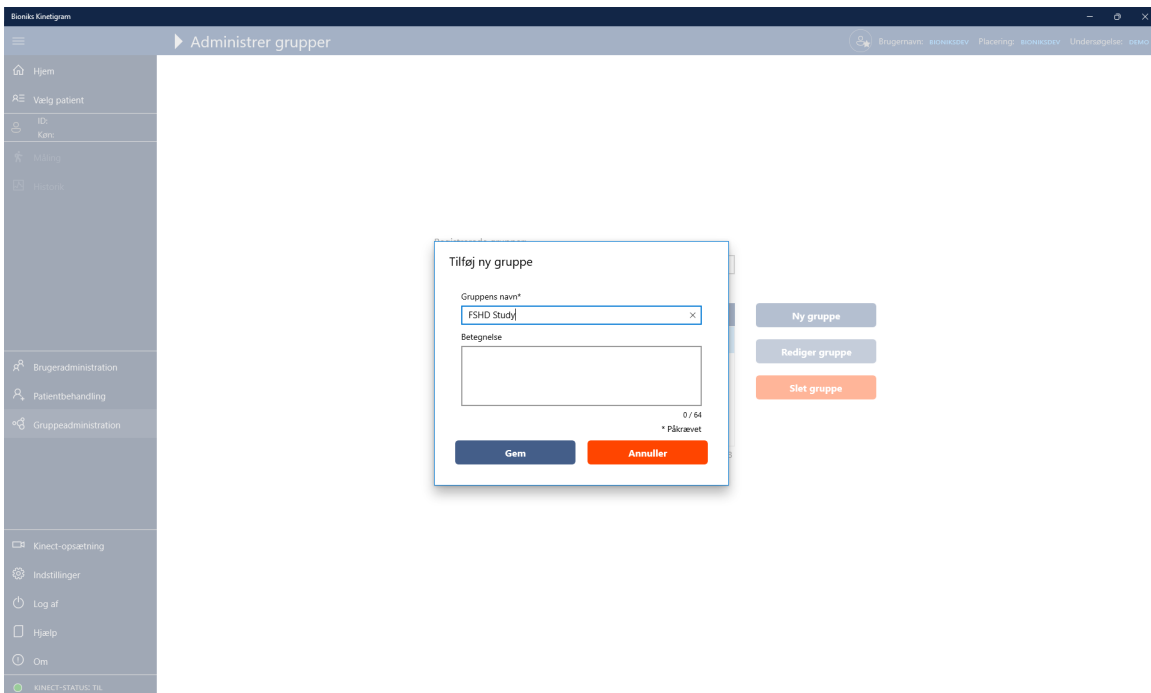

6.2 Redigering af eksisterende grupper

Bioniks Kinetigram

Administrer grupper

Brugernavn: BIONIKS-MANAGER Placering: BIONIKSTEST2 Undersøgelse: TEST2

Hjem

Vælg patient

ID: TestPatient1
Køn: Kvinde

Måling

Historik

Brugeradministration

Patientbehandling

Gruppeadministration

Kinect-opsætning

Indstillinger

Log af

Hjælp

Om

KINECT-STATUS: FRA

Redigér gruppe

Gruppenavn*
Control Group

Beskrivelse

0 / 64

* Påkrævet

Oplysninger om dataændring*

Årsag til ændring
Vælg årsag til ændring

Yderligere oplysninger
Indtast yderligere oplysninger

Bruger, der har logget på
Bioniks Manager (bioniksmanager)


Gem

Annuller

Du kan redigere en eksisterende gruppe fra siden Gruppeadministration. For at redigere en eksisterende gruppe skal du først vælge gruppen på listen og dernæst trykke på knappen **Redigér gruppe**. Vinduet Redigér gruppe vises. Når du er færdig med at redigere gruppeoplysningerne, trykker du på **Gem** for at opdatere oplysningerne, eller på **Annuller** for at kassere de nye oplysninger.

6.3 Sletning af grupper


For at slette en eksisterende gruppe fortsætter du til siden Gruppeadministration og vælger den gruppe du vil slette af listen. Tryk på knappen **Slet gruppe**, og indtast årsagen til ændringen (se afsnit 4 for yderligere oplysninger om ændringer).

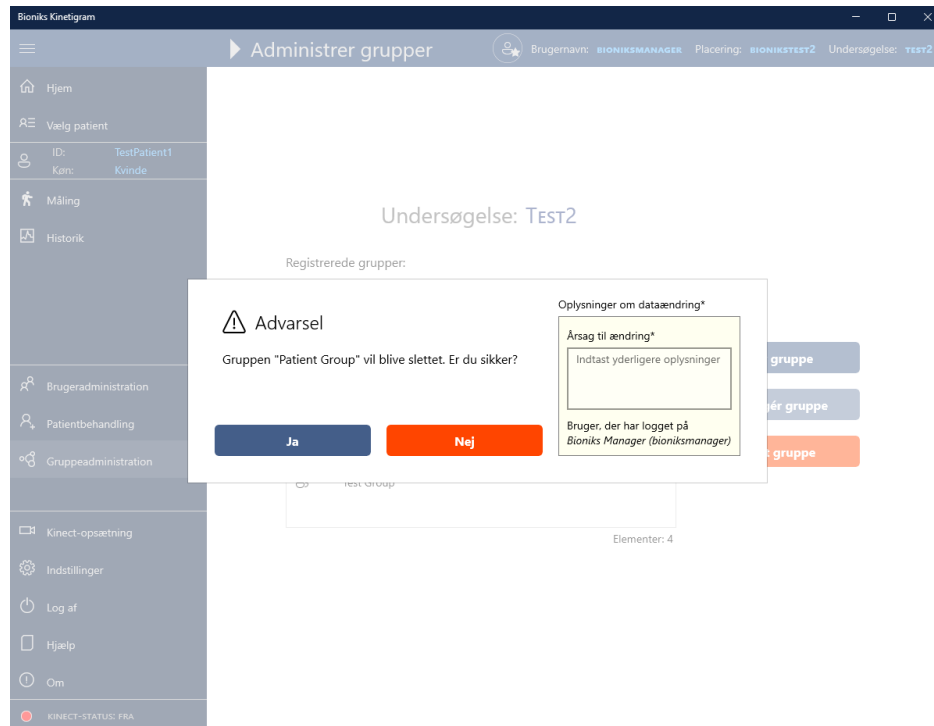

Vigtigt: En gruppe bliver ikke slettet, hvis den har fået tildelt patienter. Først skal alle patienter i gruppen omfordeles ved hjælp af dialogboksen Rediger patient, og derpå slettes gruppen.


7 Administration af patienter

For at administrere patienter skal du vælge **Patientadministration** på menuen. Du kan søge efter eksisterende patienter ved at indtaste patient-ID i søgefeltet. Du kan inkludere patienter, der er blevet deaktiveret, i søgningen.

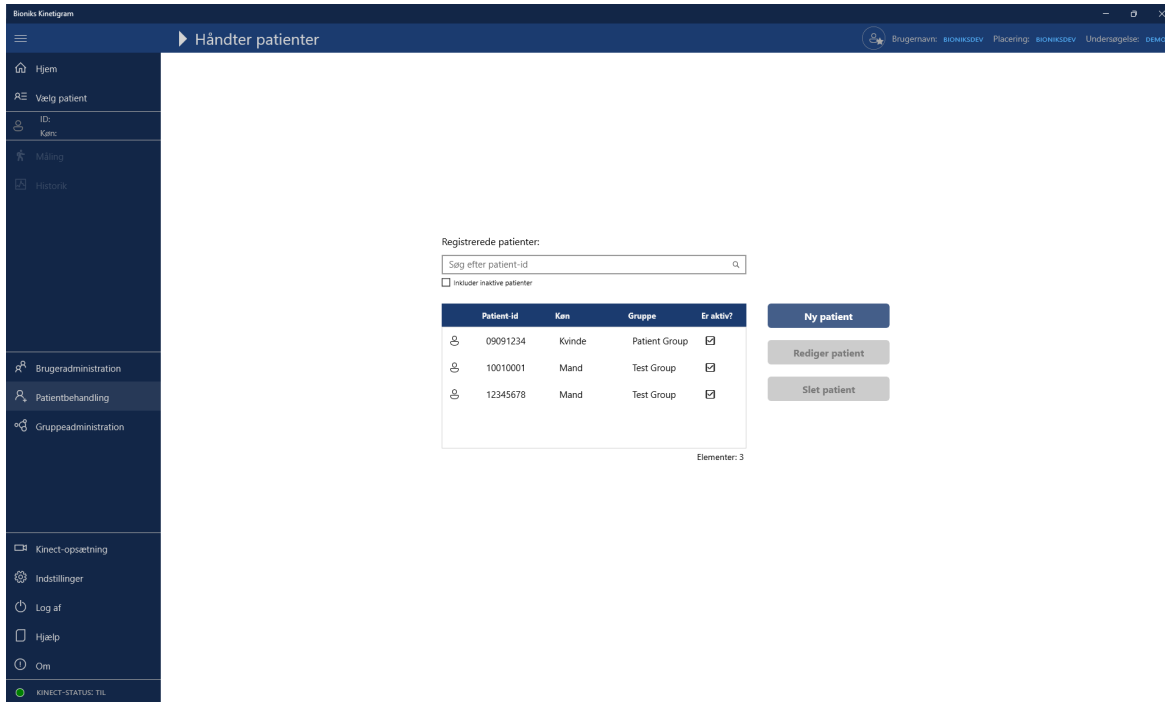

7.1 Tilføjelse af ny patient

For at tilføje en ny patient vælger du **Ny patient** fra listen. I dialogboksen **Tilføj ny patient** indtaster du Patient-ID, Studiegruppe, Køn, Højde, Vægt og Håndthed.

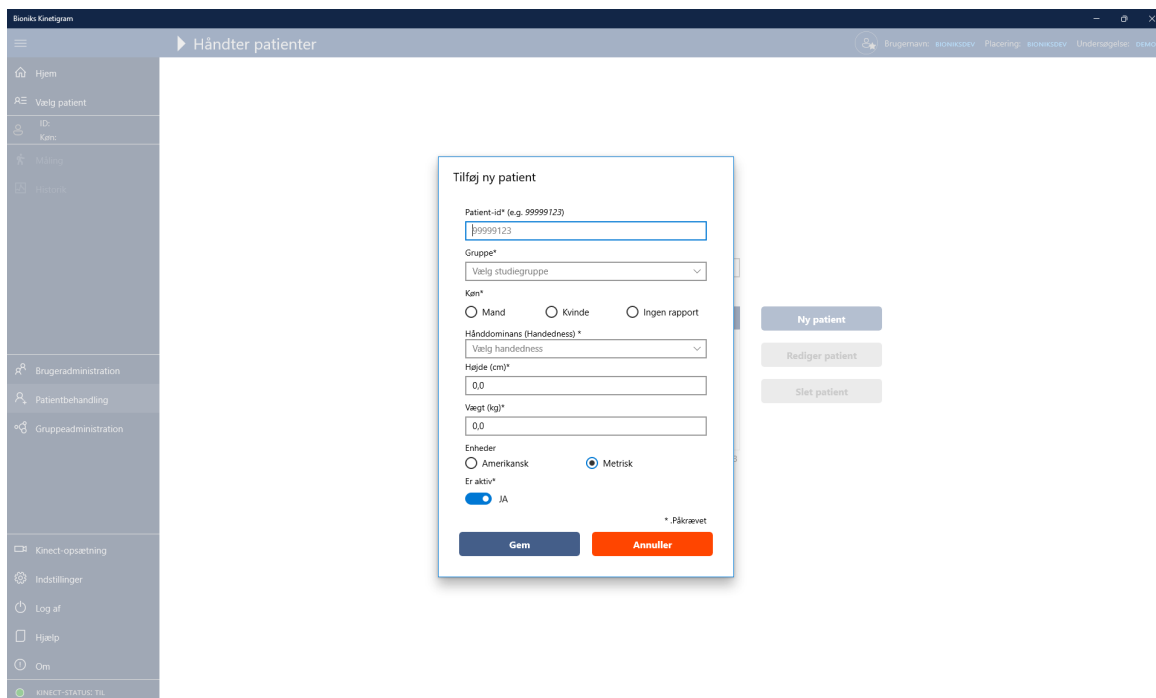

Information om højde og vægt kan enten indtastes i metriske enheder (højde i *cm*, vægt i *kg*) eller amerikanske enheder (højde i *tommer*, vægt i *pund*). Dialogboksen konverterer automatisk mellem de to, hvis der skiftes enheder med radioknappen. Tryk på **Gem** for at gemme patientens oplysninger.

Bemærk: Patient-ID kan begrænses til et specifikt format. Bioniks-administratoren kan specificere patient-ID-formatet på serveren. Patient-ID-formatet kan se anderledes ud end det, der er vist på skærbillederne i dette dokument.

Vigtigt: Sørg for, at undersøgelsens krav til mærkning/ID bliver overholdt. Tilføj ikke nogen andre identificerbare oplysninger.

7.2 Redigering af eksisterende patienter

For at redigere oplysninger om en eksisterende patient vælger du den patient, hvis oplysninger du vil redigere, på listen på siden **Patientadministration** og trykker på knappen **Rediger patient**. Når oplysningerne er blevet opdateret, kan du gemme dem ved at trykke på knappen **Gem**, eller du kan kassere dem ved at trykke på **Annuller**.

Bioniks Kinetigram

Håndter patienter

Brugernavn: BIONIKSMANAGER Placering: BIONIKSTEST2 Undersøgelse: TEST2

Rediger patient

Patient-ID* (feks. Free Text)

Gruppe*

Køn*
☒ Mand ☐ Kvinde ☐ Ingen rapport

Hånddominans (håndethed)*

Højde (cm)*

Vægt (kg)*

Enheder
☐ US ☒ Metrisk

Er aktiv*
☒ Ja

Oplysninger om dataændring*

Årsag til ændring

Yderligere oplysninger


Bruger, der har logget på
 Bioniks Manager (bioniksmanager)

* Påkrævet

Gem **Annuller**

7.3 Sletning af eksisterende patienter

For at slette en eksisterende patient fortsætter du til [Patientadministration](#) og vælger den patient, du vil slette af listen. Vælg **Ja**, når du bliver bedt om at slette patienten og indtaste årsagen til ændringen (se afsnit 4 for yderligere oplysninger med hensyn til ændringer).

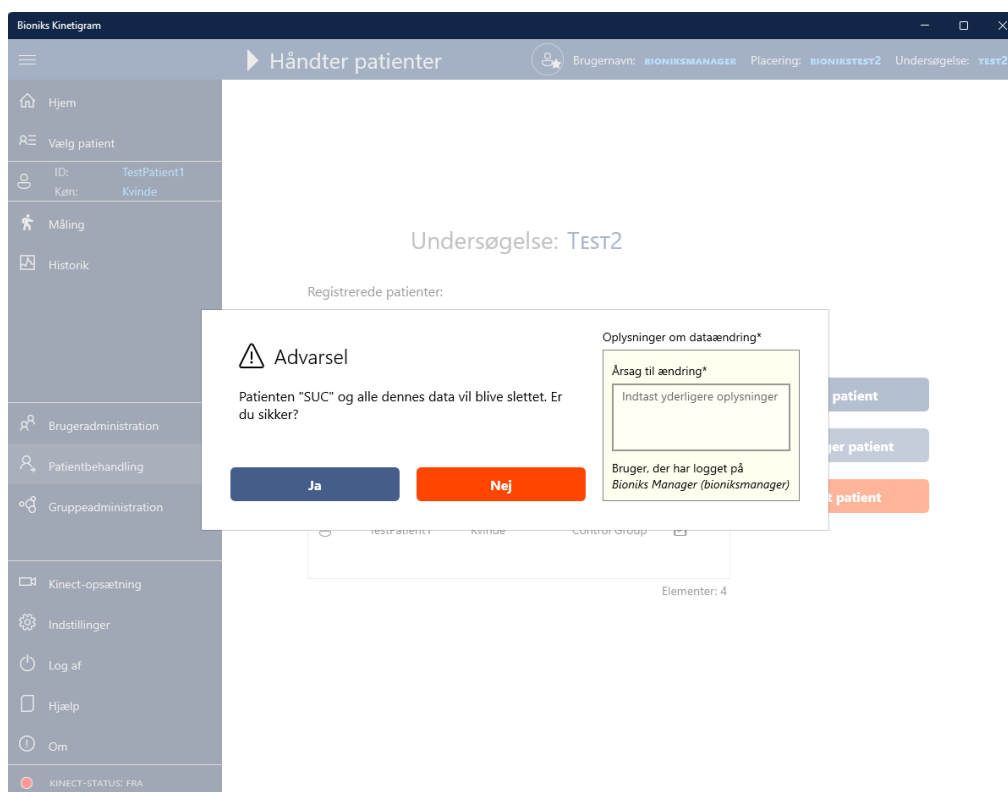

Vigtigt: Patienter med eksisterende data i Kinect kan ikke slettes fra appen - de kan kun deaktiveres. Du kan genaktivere en patient ved at opføre alle patienter (inklusive inaktive patienter) fra siden [Patientadministration](#) og redigere patientens oplysninger.

8 Instruktioner til indsamling af bevægelsesdata (betjeningsvejledning)

Vigtigt: Følg nøje anvisningerne herunder til udførelse af målinger med forsøgsparticipant.

Administrationshyppighed: Målingerne bør administreres som angivet i den forsøgsprotokol, som Kinetigram skal anvendes sammen med.

Administrationsvarighed: Hver test tager ca. 1-2 minutter. Den samlede testtid er ca. 15-20 minutter. Varigheden af vurderingen kan være forskellig afhængigt af patientens tilstand og andre udefrakommende faktorer.

Tidspunkt for administration: Da målingen kræver fysiske bevægelser, der kan være anstrengende for visse deltagere, bør målingen administreres mindst 15 minutter efter et måltid.

Måleprotokol og -metoder:

Til indsamling af bevægelsesdata i forbindelse med hvert besøg gøres følgende:

1. Vælg en eksisterende patient (eller opret en ny patient, hvis det er nødvendigt)

2. Indhent antropometriske målinger af den øvre ekstremitet
3. Afgør, om patienten har lavt eller højt funktionsniveau
4. Indhent Kinect-data i overensstemmelse med protokollen
5. Kontrollér, at alle data blev indhentet.

Bemærk: Videosproget kan ændres i henhold til patientens ønsker, inden Kinect-målingerne udføres.


Vigtigt: Computeren skal tændes og forbindes med internettet mindst 30 minutter, før målingerne tages med Kinetigram-applikationen, så eventuelle Windows-opdateringer vil være fuldført.

8.1 Trin 1: Vælg patienten til målingen


Klik på [Vælg patient](#) fra menuen. Siden viser en liste over alle aktive patienter. Listen kan filtreres ved at vælge den relevante studiegruppe. For at finde patienten kan du vælge denne på listen eller indtaste patientens ID. Bemærk, at søgefeltet automatisk filtrerer patienter, der svarer til de indtastede oplysninger. Søgefiltre kan nulstilles ved, at der trykkes på on/off-knappen Filter under listen.

Hvis dette er deltagerens første besøg, kan du oprette vedkommendes oplysninger ved at trykke på knappen [Tilføj hurtigt](#) eller indtaste oplysningerne under [Patientadministration](#).


Dernæst vælger du patienten fra listen og trykker på knappen [Fortsæt](#).

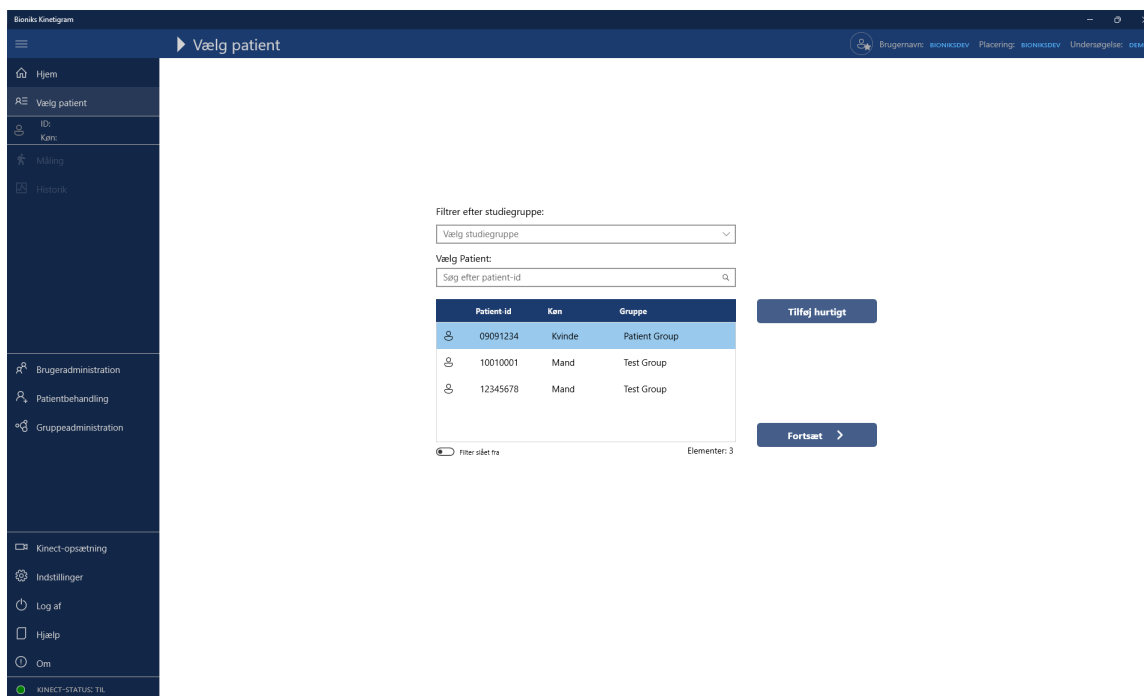

Hvis dette er patientens første besøg på den pågældende dag, vises en dialogboks med de antropometriske målinger automatisk.

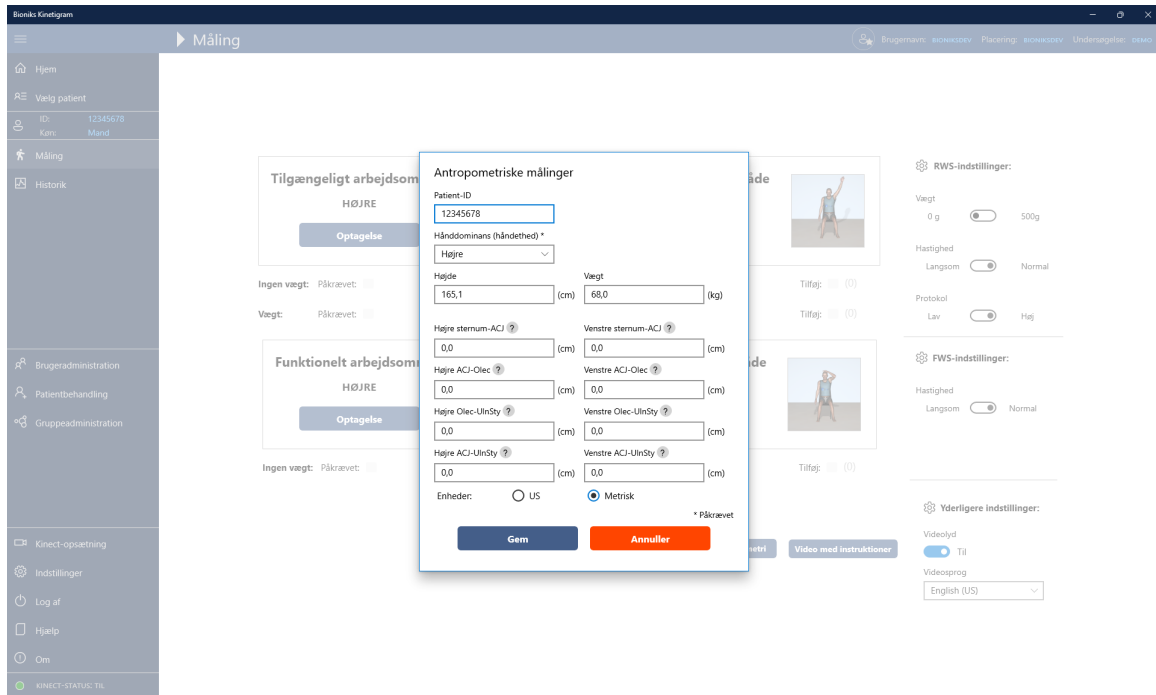

Dialogboksen kan også tilgås ved at trykke på **Antropometri** på siden Måling.

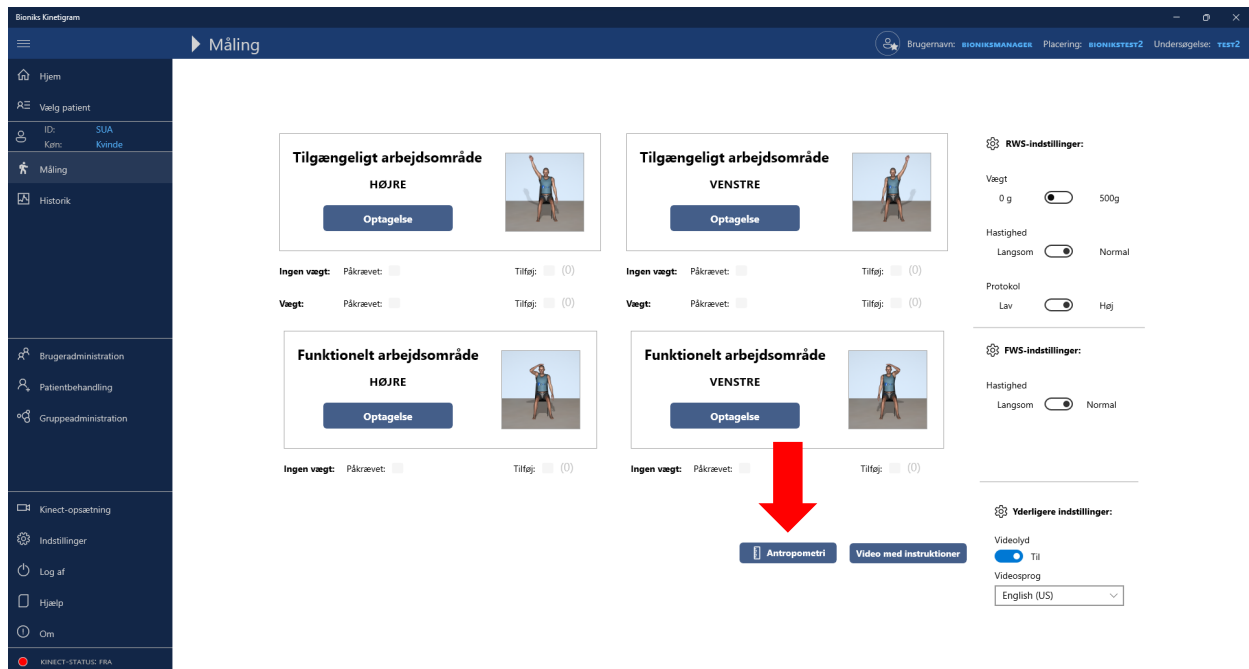

8.2 Trin 2: Mål forsøgsdeltagerens parametre for den øvre ekstremitet

For hvert besøg er der **FIRE** armmålinger, der skal indsamles for hver side af kroppen:


1. Sternum-ACJ (sternum til akromioklavikulærled)
2. ACJ-Olec (akromioklavikulærled til olecranon)
3. Olec-UlnSty (olecranon til styloideus ulnae)
4. ACJ-UlnSty (akromioklavikulærled til styloideus ulnae)

Udover patientens højde, vægt og håndethed skal der indsamles fire målinger for hver side, og disse indtastes i dialogboksen Antropometri.

Vigtigt: Parametrene skal måles med et blødt centimetermålebånd for at opnå den størst mulige nøjagtighed.

Se venligst nedenfor for trin til korrekt måling:

1. **Sternum-ACJ** (sternum til akromioklavikulærled)

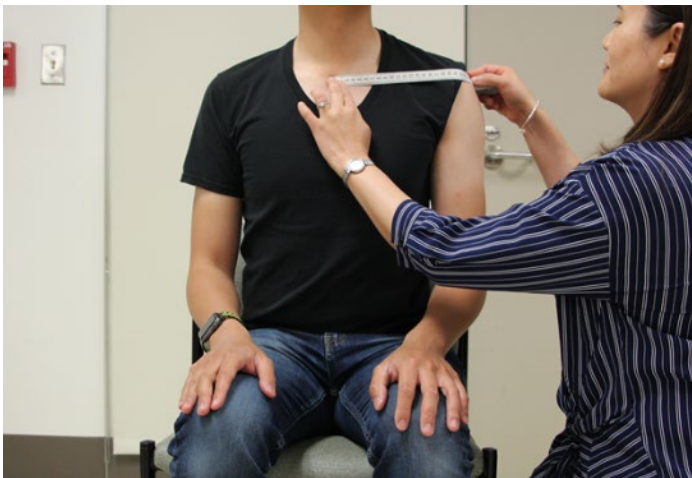


2. **ACJ-Olec** (akromioklavikulærled til olecranon)



3. **Olec-UlnSty** (olecranon til styloideus ulnae)



4. **ACJ-UlnSty** (akromioklavikulærled til styloideus ulnae) med fuldt udstrakt albueled

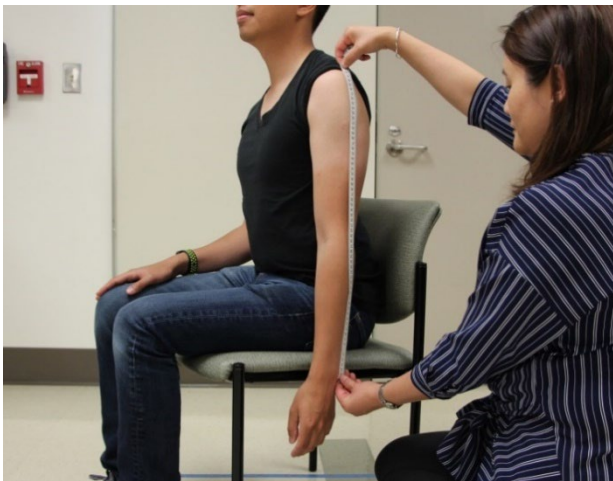

* Hvis albuen er bøjet, skal der måles fra **ACJ til styloideus ulnae** som vist herunder (vi måler hypotenusen i trekanten).



Indtast måleværdierne i dialogboksen, og tryk på [Gem](#) for at lagre dem.

Bemærk: Hvis en måling ikke kan foretages, indtastes et "0" for denne værdi.

Hvis du er nødt til at redigere målingerne, efter at de blev gemt, kan de opdateres i forbindelse med det aktuelle besøg ved at vælge knappen **Antropometri** på siden Måling.

Bemærk, at Antropometri-skemaet har de følgende målingsbegrænsninger. Data uden for disse værdier godkendes ikke. Kontakt venligst Bioniks, hvis andre værdiområder er påkrævet til en klinisk undersøgelse.


Måling	US-enheder*		Metriske enheder	
	Minimal værdi	Maksimal værdi	Minimal værdi	Maksimal værdi
Højde	48,0 tommer	84 tommer	122 cm	214 cm
Vægt	50,7 pund	500,4 pund	23 kg	227 kg
Sternum-ACJ	2,0 tommer	12,2 tommer	5 cm	31 cm
ACJ-Olec	5,1 tommer	20,1 tommer	13 cm	51 cm
Olec-UlnSty	5,1 tommer	20,1 tommer	13 cm	51 cm
ACJ-UlnSty	11,8 tommer	35,0 tommer	30 cm	89 cm

*Softwaren benytter metriske enheder til intern brug. Amerikanske enheder er omtrentlige.

8.3 Trin 3: Bestemmelse af modul for høj eller lav funktion

Bemærk: Vurderingsmodulet for **LAV** funktion kan være deaktiveret og ikke tilgængeligt til din forsøgsprotokol.


- Med deltageren siddende opret i stolen bedes han/hun om at hæve den testede arm så højt op som muligt (skulder fremadbøjet). Hvis deltageren kan hæve armen til **>60° eller til over skulderniveau (som vist herunder)**, vælger du vurderingsmodulet for **HØJ funktion**.

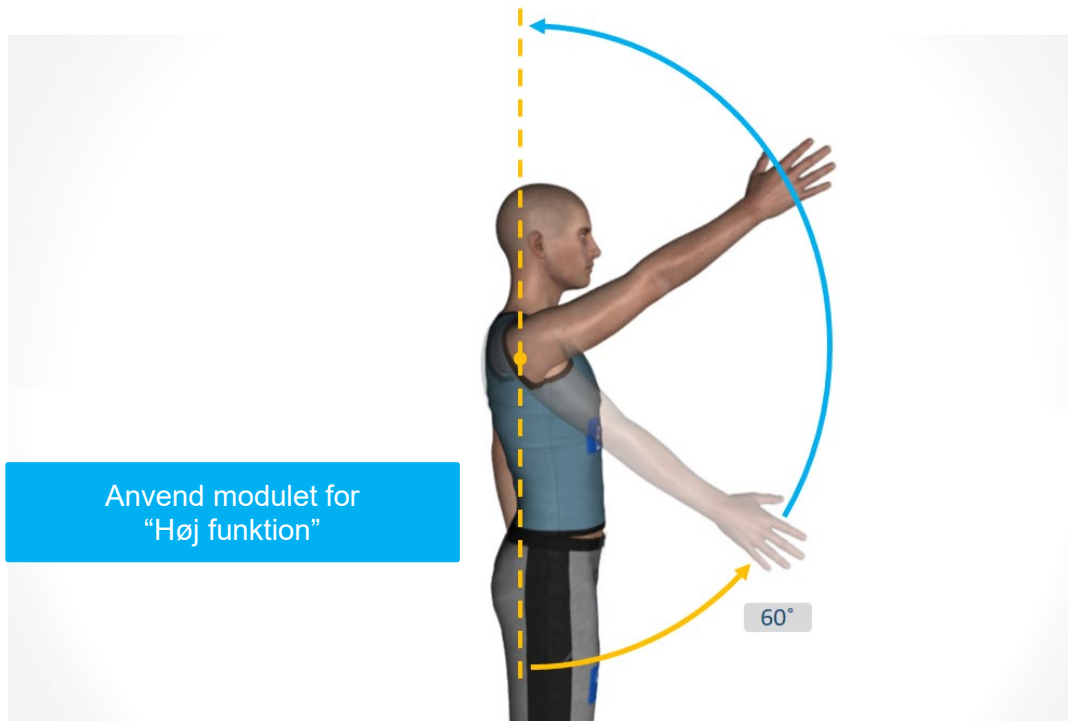

Eksempel:



- B. Med deltageren siddende opret i stolen bedes han/hun om at hæve den testede arm så højt op som muligt. Hvis deltageren kun kan hæve armen til $<60^\circ$ eller til under skulderniveau (som vist herunder), vælger du vurderingsmodulet for **LAV funktion**.

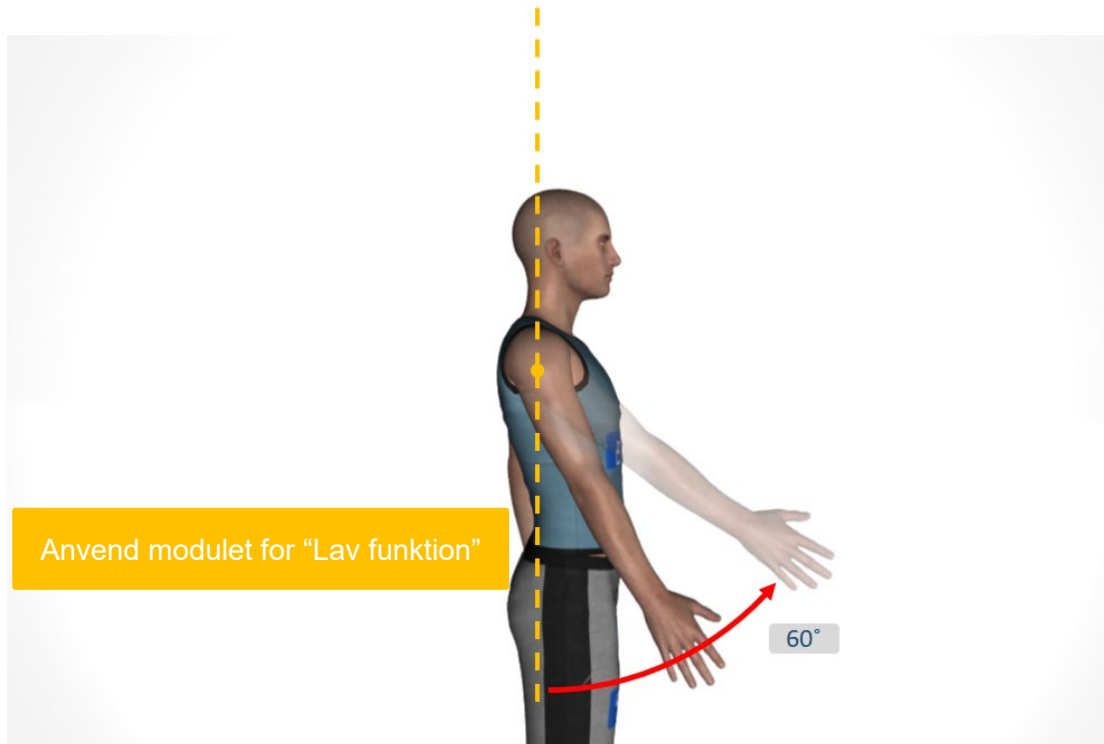

Eksempel:




Bemærk: Hvis deltageren ligger på grænsen (bøjning af skulderen på omtrent 60°), vælges vurderingsmodulet for **HØJ funktion** som standard. Vurderingsmodulet for **LAV funktion** er beregnet til tydeligt svækkede deltagere, som har svært ved at løfte armen uden kompenserende bevægelser.

8.4 Trin 4: Udførelse af en Kinect-vurdering – Start af dataindsamling

Når du er færdig med at tage antropometriske målinger af den øvre ekstremitet og har fastlagt deltagerens funktionsniveau, kan du starte målingsprotokollen.

Målingerne udføres i takt med en videovejledt protokol. Kinect-kameraet optager brugerens bevægelser og registrerer information om vedkommendes led. Der lagres ingen videooplysninger om deltageren på noget tidspunkt. For at kunne vælge den korrekte videoprotokol skal valget foretages på den primære **Målingsside** som vist herunder.

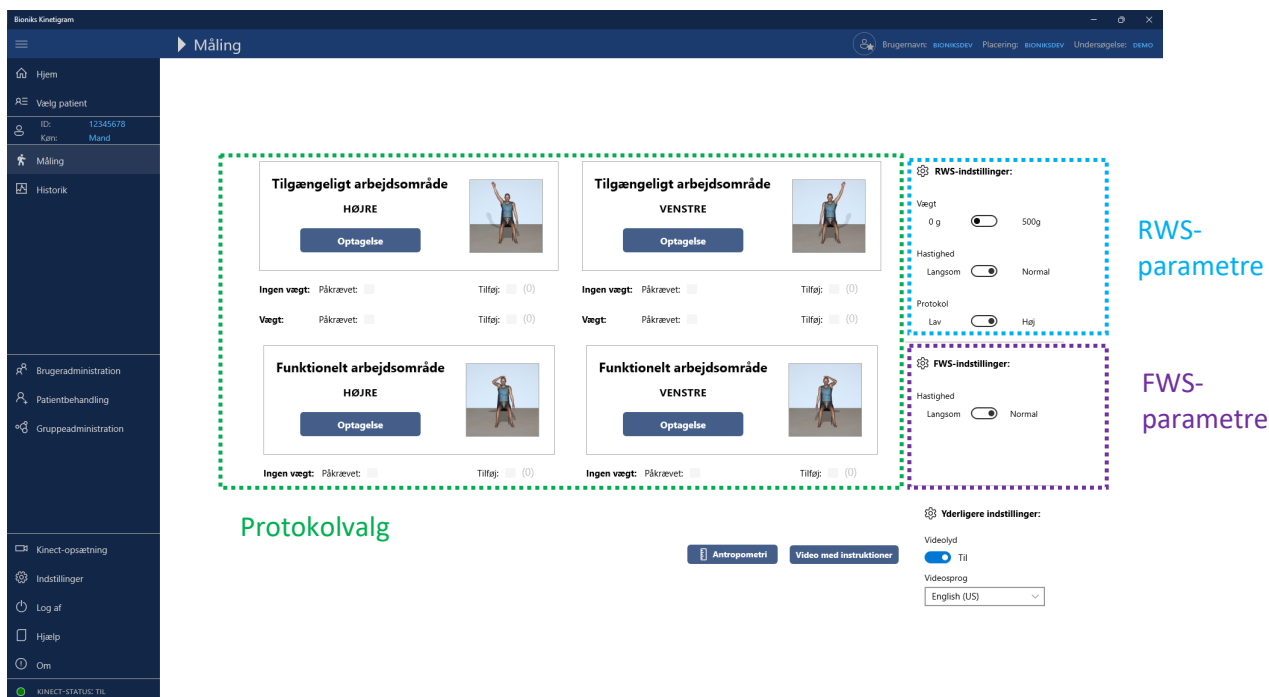

Den følgende **protokol** er et eksempel på vurderinger af det tilgængelige og det funktionelle arbejdsområde som udført af en deltager ved et besøg. For at kunne indstille de korrekte parametre for hver måling foretages valgene i overensstemmelse med den nedenstående tabel for hver sekvens:

Evaluering	Modul	Side	Vægt
1	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Højre	Nej
2	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Venstre	Nej
3	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Højre	Ja, 500g
4	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Venstre	Ja, 500g
5	Funktionelt arbejdsområde (FWS)	Højre	Nej
6	Funktionelt arbejdsområde (FWS)	Venstre	Nej

Bemærk: Normalt bør alle protokoller udføres ved **normal hastighed**, medmindre deltageren har svært ved at følge bevægelserne. I dette tilfælde vælges **lav hastighed**. En video med lav hastighed er gjort ca. 20 % langsommere.


Bemærk: Sproget anvendt i de videovejledte protokoller kan vælges på grundlag af patientens præference. Dette ændrer ikke sproget, der anvendes i brugergrænsefladen. Lydsproget vælges under Andre indstillinger og kan ændres når som helst.

Vigtigt: Vælg venligst det passende funktionsniveau for hver side. Deltageren vil muligvis ikke have de samme funktionsmæssige evner i begge sider.

Bemærk: Inden hver måling skal instruktionsvideoen vises for deltageren. Dette gøres ved at klikke på knappen [Video med instruktioner](#) nederst på siden [Måling](#).

Inden målingen starter:

- **Vigtigt:** For målinger af det tilgængelige arbejdsområde (RWS) skal du kontrollere, at deltageren sidder med ryggen ind imod stolen, at han/hun ikke drejer til siden og er lænt fremad, og at han/hun ikke bøjer albuen, medmindre der bliver bedt om det.

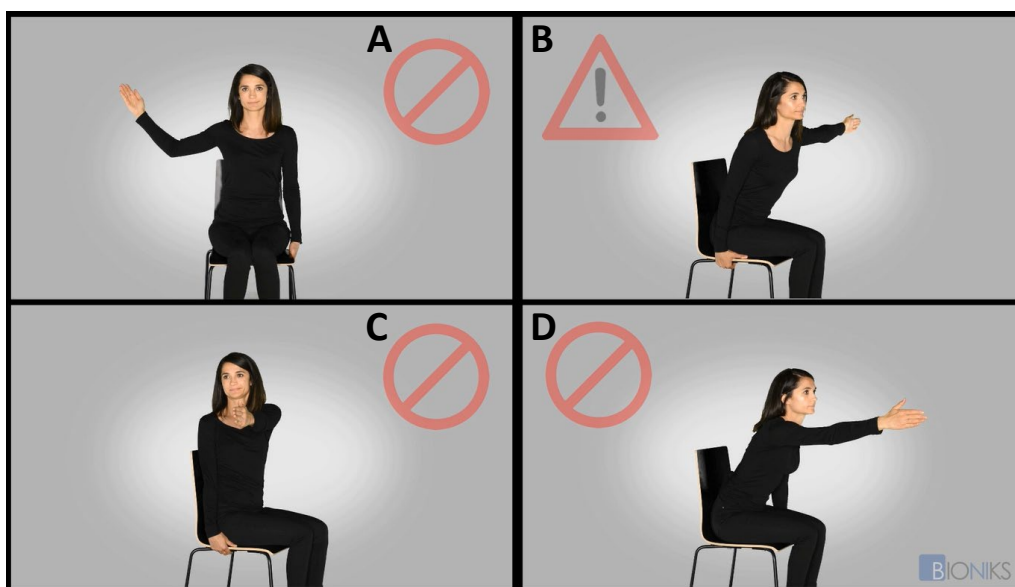


Felt	Instruktioner
A	Bøj ikke albuen
B	Sid med ryggen ind imod stolen
C	Drej ikke til siden
D	Læn dig ikke forover


- **Vigtigt:** Placering af patienten til en måling af det funktionelle arbejdsområde (FWS): Patienten sidder med ryggen ind imod stolen, og opret, med hovedet og kroppen lige.
- Under FWS-vurderingen skal du kontrollere, at der ikke er cervikal/nakkebøjning, at patienten ikke bøjer eller drejer kroppen eller bruger overdrevne kompenserende bevægelser (f.eks. svinger med armene). Patienten bør foretage jævne og velkontrollerede bevægelser.

Tilgængeligt arbejdsområde (RWS):**Evaluering 1: RWS højre side, ingen vægt**

- Først udføres RWS-målingen for **ingen-vægt** på **højre side**. Sørg for, at on/off-knappen for **Vægt** ikke er aktiveret (grøn pil):
- Vælg videoafspilningens **Hastighed** (orange pil). Start med **Normal** hastighed. Hvis deltageren ikke er i stand til at følge med i udførelsen af protokollen, skal målingen gentages med **Langsom** hastighed.
- Hvis deltageren var i stand til at bøje armen fremad til eller over skulderniveau, klikkes der på **Høj** funktionsmæssig **Protokol** (blå pil).
- Når deltageren er klar, startes dataindsamlingen ved at der trykkes på knappen **Optag** i modulet for tilgængeligt arbejdsområde – HØJRE (gul pil).

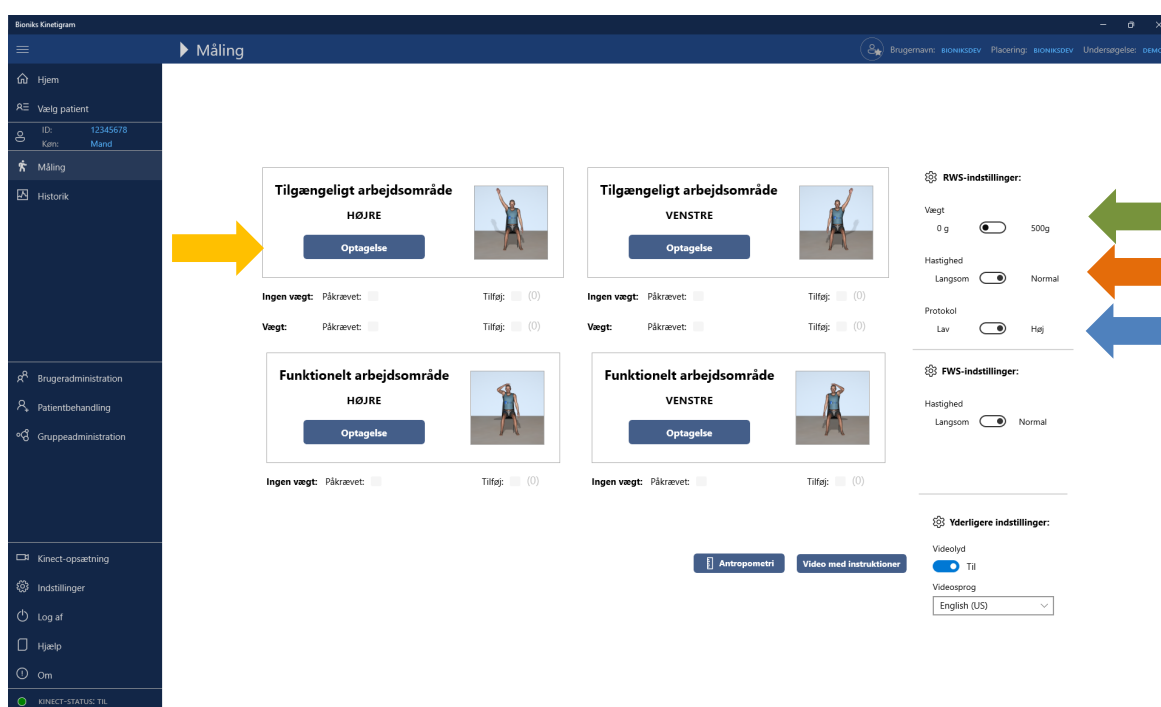


Dette åbner målingssiden med den videovejledte protokol. Siden med videovejledning indeholder de følgende elementer:

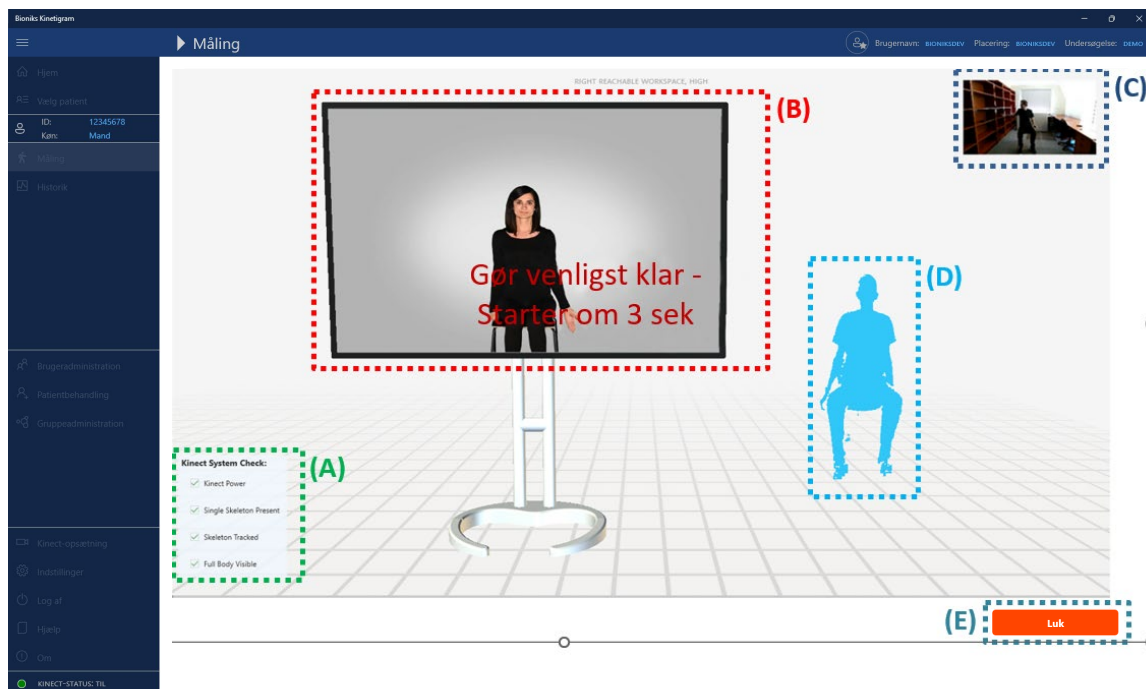

Elementer på siden med videovejledning: A – Kinect-systemtjek, B – Video-feedback, C – Kinect-kameravisning, D – Kinect-feedbackvisning, E - Luk/stop optagelse


Siden viser et nedtællingsur i de første 5 sekunder, så deltageren har mulighed for at forberede sig. Inden for dette tidsrum kontrollerer systemet også, at måleforholdene er korrekte, ved hjælp af Kinect-systemtjekmodulet. Resultaterne af denne kontrol er vist øverst til venstre. Hvis der er fejl, vises Kinect-systemtjekvinduet. Se afsnit 9 herunder for fejlfinding.

Når nedtællingen er færdig, følger patienten instruktionerne i videoen og foretager samtidig bevægelserne. Under optagelserne vises symbolet ● Recording i øverste venstre hjørne. Statuslinjen nederst på feedbackskærmen angiver videoafspilningens relative position.

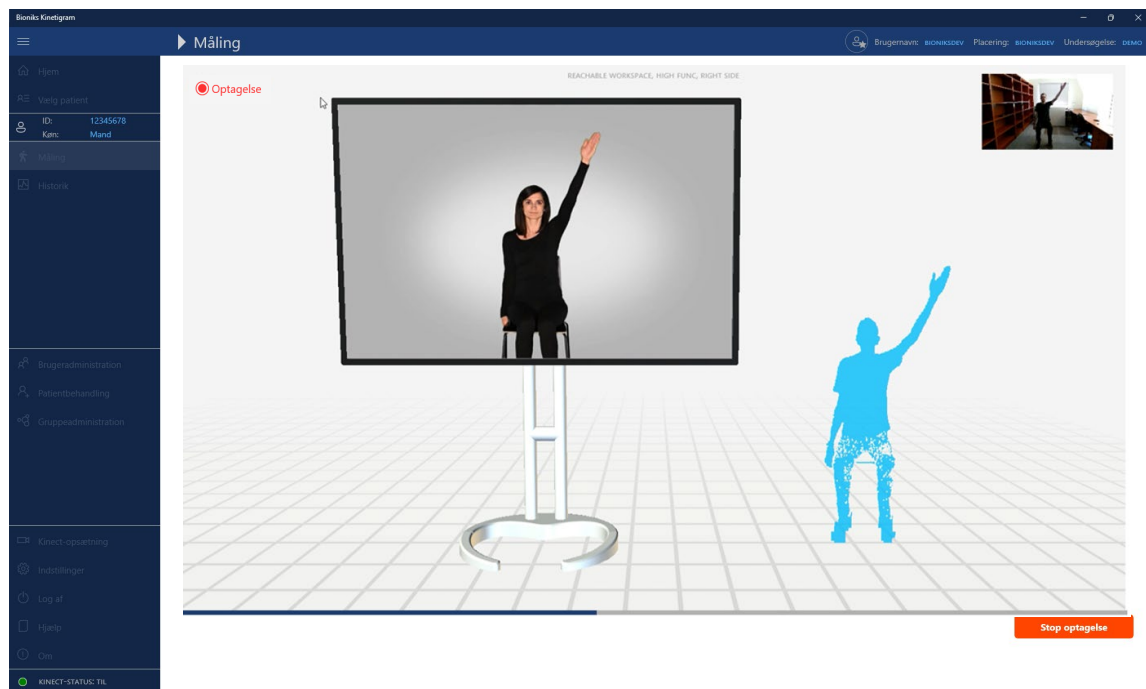

Optagelserne stopper automatisk, når videoen ender. Du kan stoppe optagelserne på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på knappen **Stop optagelse**. Når optagelsen stopper, skifter mærket på knappen til **Luk**.


Når optagelsen er slut, kontrolleres gyldigheden af optagelsessekvensen. Hvis det bestemmes, at optagelsessekvensen ikke er gyldig, vises den følgende advarsel:

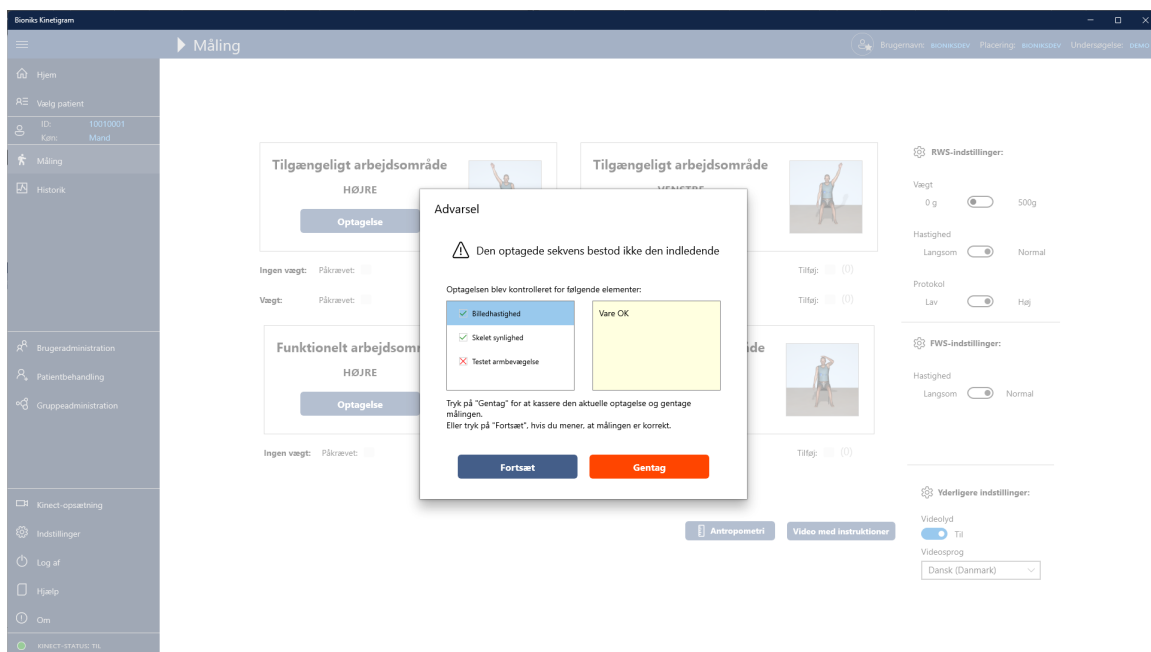

Du kan klikke på oplysningerne for hvert element for yderligere forklaring.

Vigtigt: Hvis du ser denne advarsel, bør du læse informationen grundigt. Du rådes til at gentage målingen ved at trykke på knappen [Gentag](#). Denne knap fører dig tilbage til siden [Måling](#).

Hvis optagelsen var vellykket, vises dialogboksen [Gem måling](#).

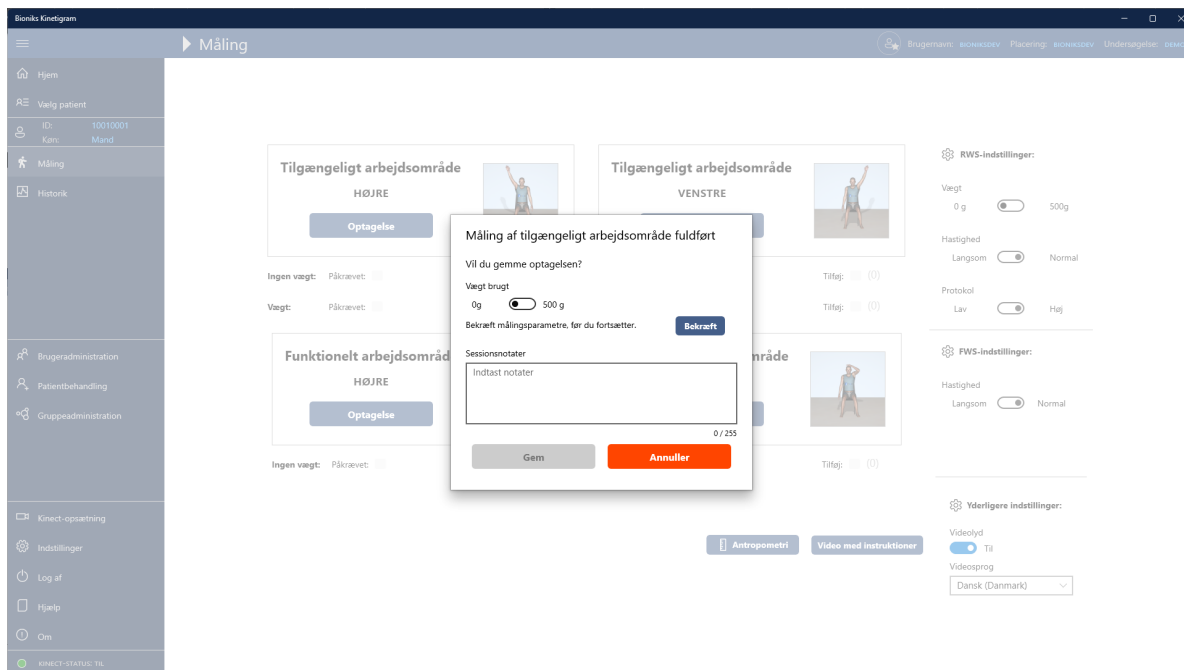


For protokollen [Tilgængeligt arbejdsområde](#) skal du kontrollere, at parameteren for vægt stemmer overens med målingsbetingelsen (patienten bærer ikke håndledsvægten = vægt Og patienten bærer håndledsvægten = 500g). Bekræft dette ved at trykke på [Bekræft](#). På denne måde gemmes målingen.

Indtast eventuelt relevante bemærkninger til målingen og målingssessionen. Eksempel: "Deltageren følte sig ikke tilpas".

Tryk på [Gem](#) for at lagre målingen, eller tryk på [Annuller](#) for at kassere måleresultaterne. Vær opmærksom på, at ingen data fra sessionen vil blive gemt, hvis du trykker på [Annuller](#)!

Når dataene er blevet gemt, returneres du til menusiden. Bemærk, at en session, der er blevet optaget, vises med et grønt flueben under det tilsvarende modul (se den røde ring herunder). Felterne [Påkrævet](#) markerer påkrævede evalueringer, men [Tilføj](#) markerer yderligere, optagede sessioner. Bemærk, at sessionstællerne nulstilles hver dag.

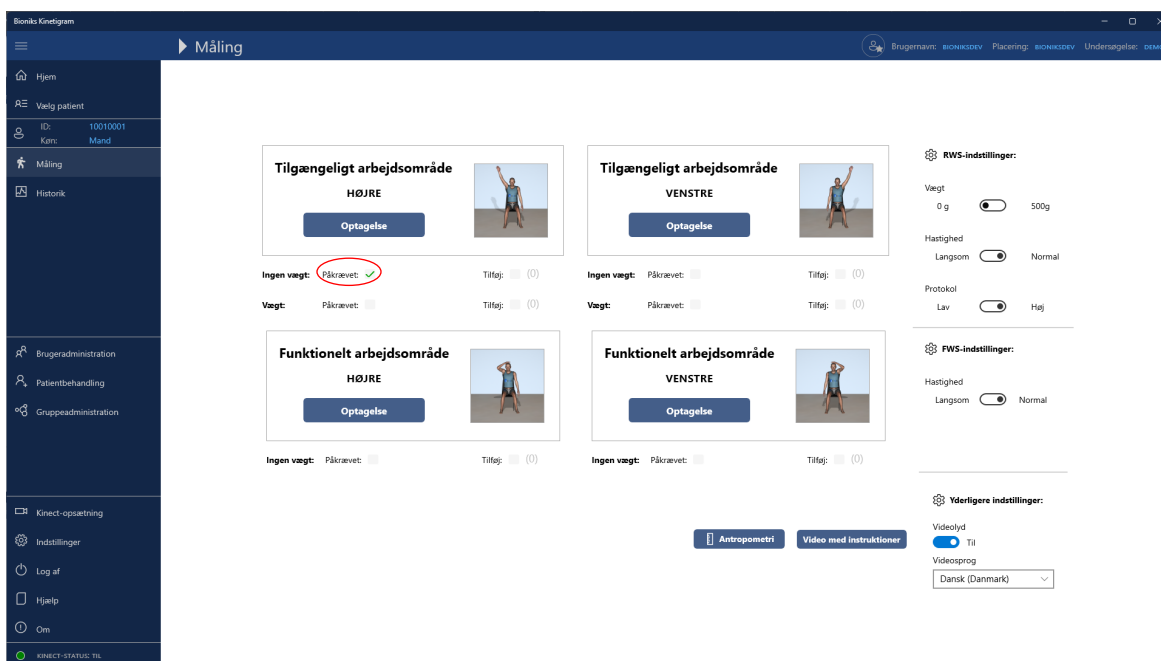

Bemærk: For alle resterende målinger følges den samme procedure som beskrevet ovenfor for evaluering 1. Der henvises til de ovenstående figurer vedrørende konfiguration af de nedfor beskrevne RWS- og FWS-indstillinger.

Evaluering 2: RWS venstre side, ingen vægt

Gentag RWS-vurderingen for **venstre arm, uden vægt**.

- Hvis deltageren var i stand til at bøje armen fremad i eller over skulderniveau, vælges niveauet **HØJ**, ellers anvendes modulet **LAV** (følg som ovenstående).
- Ved afslutningen af optagelsen trykkes **Gem** for at gemme vurderingsdata, hvis du er tilfreds med deltagerens præstation.

Evaluering 3: RWS højre side, vægt

Gentag RWS-vurderingen for **højre arm, med vægt**.

- Deltageren forbliver på samme funktionelle niveau, hvorfor der er **INGEN** ændring i **Protokol** (Lav eller Høj).
- Sæt **EN håndledsvægt (500g)** på deltagerens **højre håndled**, og vælg **Vægt = 500g**.
- Når du er klar, klikker du på **Optag**.
- Når vurderingen er færdig, skal du sikre dig, at vægtvalgmuligheden er nøjagtig. Klik derefter på **Gem** for at gemme din vurdering, hvis du er tilfreds med deltagerens præstation.
- Indtast eventuelt nogle få bemærkninger om denne vurdering, som beskrevet tidligere. Ellers klikker du på **Annuller** og gentager vurderingen.

Evaluering 4: RWS venstre side, vægt

Gentag RWS-vurderingen for **venstre arm, med vægt**.

- Deltageren forbliver på samme funktionelle niveau, hvorfor der er **INGEN** ændring i [Protokol](#) (Lav eller Høj).
- Sæt **EN håndledsvægt (500g)** på deltagerens testede håndled. I dette tilfælde sættes vægten på deltagerens **venstre håndled** (følg som beskrevet herover).
- Når vurderingen er færdig, skal du sikre dig, at vægtvalgmuligheden er nøjagtig. Klik derefter på [Gem](#) for at gemme din vurdering, hvis du er tilfreds med deltagerens præstation. Indtast eventuelt nogle få bemærkninger om denne vurdering, som beskrevet herover. Ellers klikker du på [Annuller](#) og gentager vurderingen.

Bemærk: Hvis deltageren ikke var i stand til at bøje sin testede arm fremad til skulderniveau, vælger du niveauet **LAV** [protokol](#) i RWS-vurderingen. Følg dernæst trinene som beskrevet tidligere.

Vigtigt: En deltager kan have EN arm, der har **HØJ** funktion, med den anden arm på et niveau for **LAV** funktion, i det samme besøg.

Vurdering af funktionelt arbejdsområde (FWS) (vil muligvis ikke være tilgængelig):

Et tilsvarende forløb som beskrevet ovenfor kan følges for vurderingen af funktionelt arbejdsområde, men her bruges der **INGEN VÆGT**.


Vigtigt: Observér deltageren, og bemærk om han/hun er i stand til at nå de påkrævede målpunkter. Du skal tilføje disse observationer ved afslutningen af målingen.

For at anse et mål på kroppen for at være nået, er INGEN kompenserende bevægelser tilladt. Eksempler på kompensering: ✓ Skulderløft ✓ Dreje skulderen indad ✓ Ryste på skulderen ✓ Bøje / vippe hovedet ✓ Dreje/rotation af hovedet ✓ Vippe/bøje kroppen ✓ Dreje/rottere kroppen ✓ Svinge med armene ✓ Bruge momentum

Bemærk: Hvis bevægelsen ser anderledes ud end, hvad en rask kontrolperson ville gøre, skal bevægelsen anses for "ikke opnået".

Evaluering 5: FWS højre side


Start med **højre side** for det funktionelle arbejdsrådemodul.

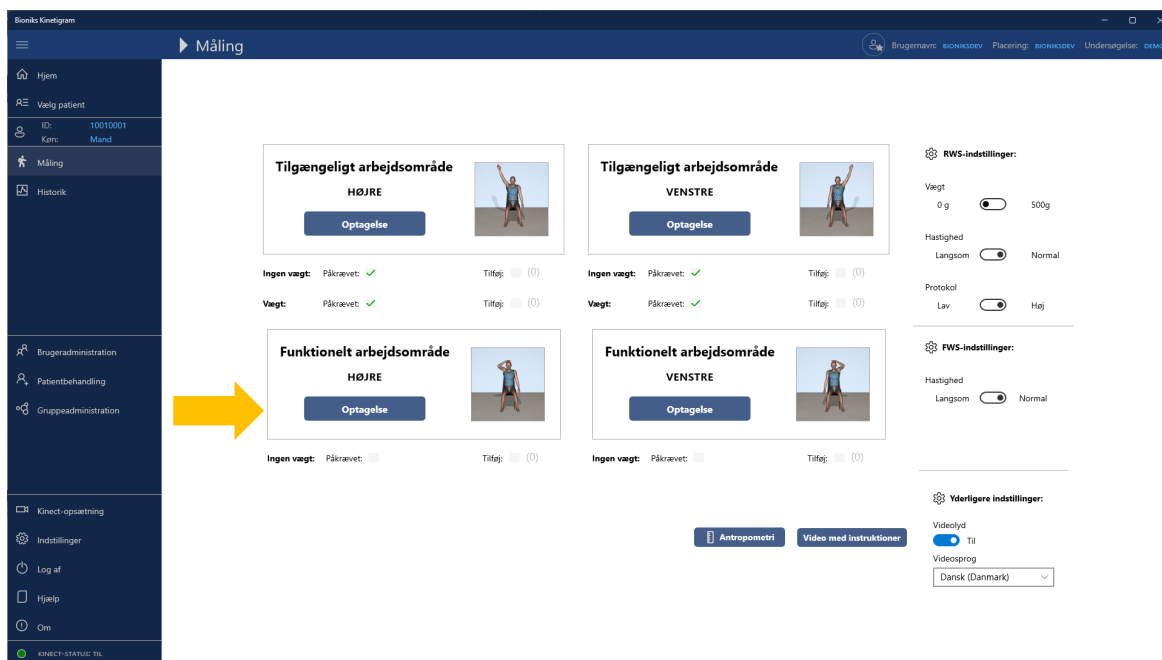

Patienten følger videoprotokollen:



Ved afslutningen af vurderingen vil den følgende dialogboks for FWS blive vist:

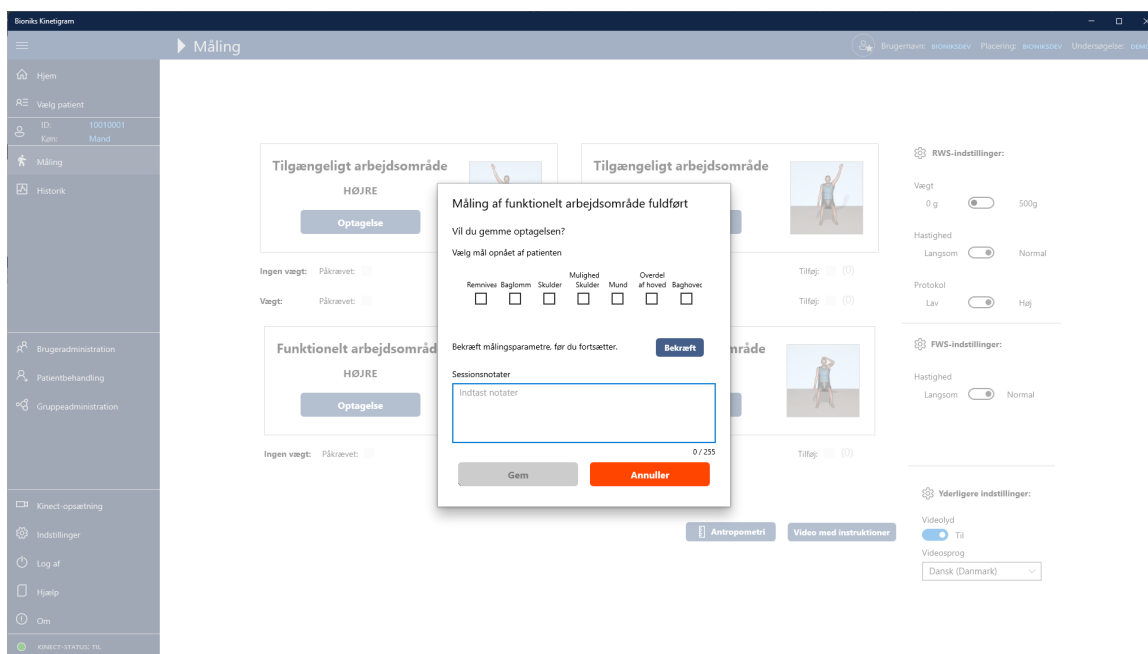

Markér de afkrydsningsfelter for de mål, som du observerede, at patienten nåede. Bemærk, at patienten skal **BERØRE** målpunkterne for at målingen tæller, som vist i videoen. Efter at have gennemgået observationerne, klikker du på **Bekræft** for at bekræfte de indtastede parametre.

På dette tidspunkt kan du også indtaste eventuelle bemærkninger og observationer vedrørende din vurdering, f.eks. "patienten melder om smerter". Klik derefter på **Gem** for at gemme din vurdering, hvis du er tilfreds med deltagerens præstation. Ellers klikker du på **Annuller** og gentager vurderingen.


Evaluerings 6: FWS venstre side

Gentag den samme procedure for FWS i venstre side.

Efter målingen markerer du de afkrydsningsfelter for de mål, som du observerede, at patienten nåede. Bemærk, at patienten skal **BERØRE** målpunkterne for at målingen tæller, som vist i videoen. Efter at have gennemgået observationerne, klikker du på **Bekræft** for at bekræfte de indtastede parametre.


På dette tidspunkt kan du også indtaste eventuelle bemærkninger og observationer vedrørende din vurdering, f.eks. "patienten melder om smerter". Klik derefter på **Gem** for at gemme din vurdering, hvis du er tilfreds med deltagerens præstation. Ellers klikker du på **Annuller** og gentager vurderingen.

Bemærk: Funktionen for vurdering af funktionelt arbejdsområde (FWS) vil muligvis ikke være tilgængelig for alle undersøgelser. Hvis FWS-moduliet ikke er tilgængeligt, vil optagelsesknappe være deaktiveret:

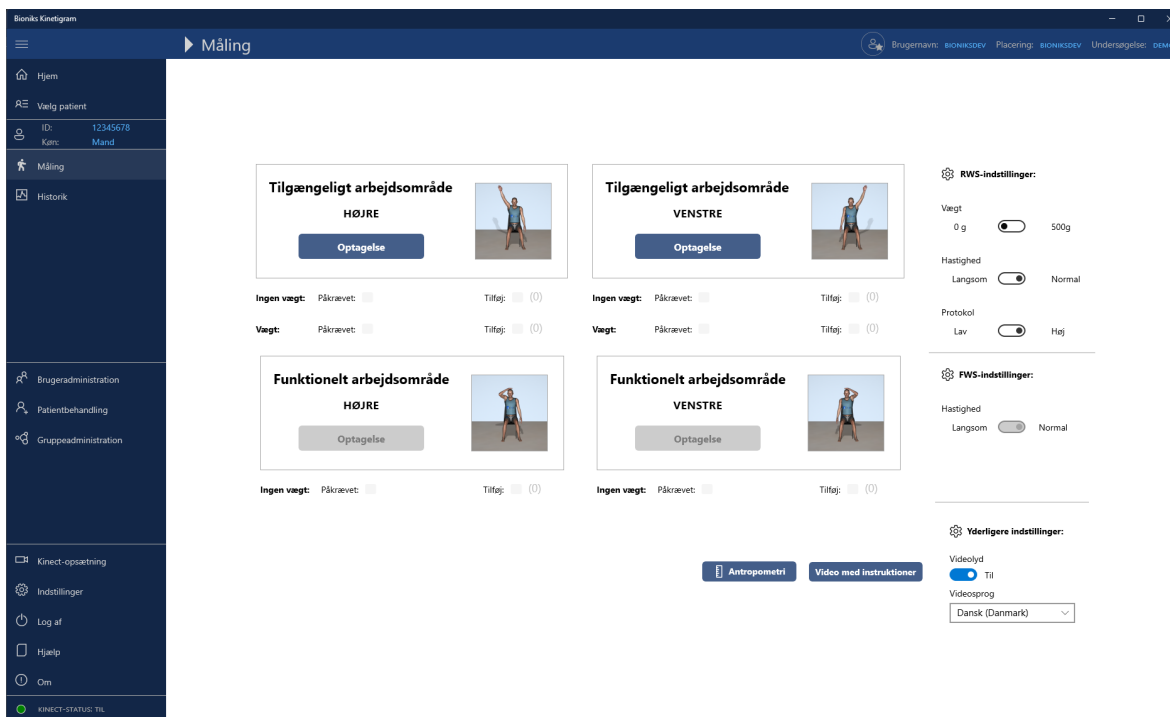

8.5 Dobbeltkontrol af data

Du bør være i stand til at se alle vurderinger optaget under denne forsøgsdeltager på hovedsiden. Dette bør inkludere alle tidligere vurderinger for denne deltager. Udførte vurderinger er markeret med et grønt flueben (se billederne i rød cirkel herunder).

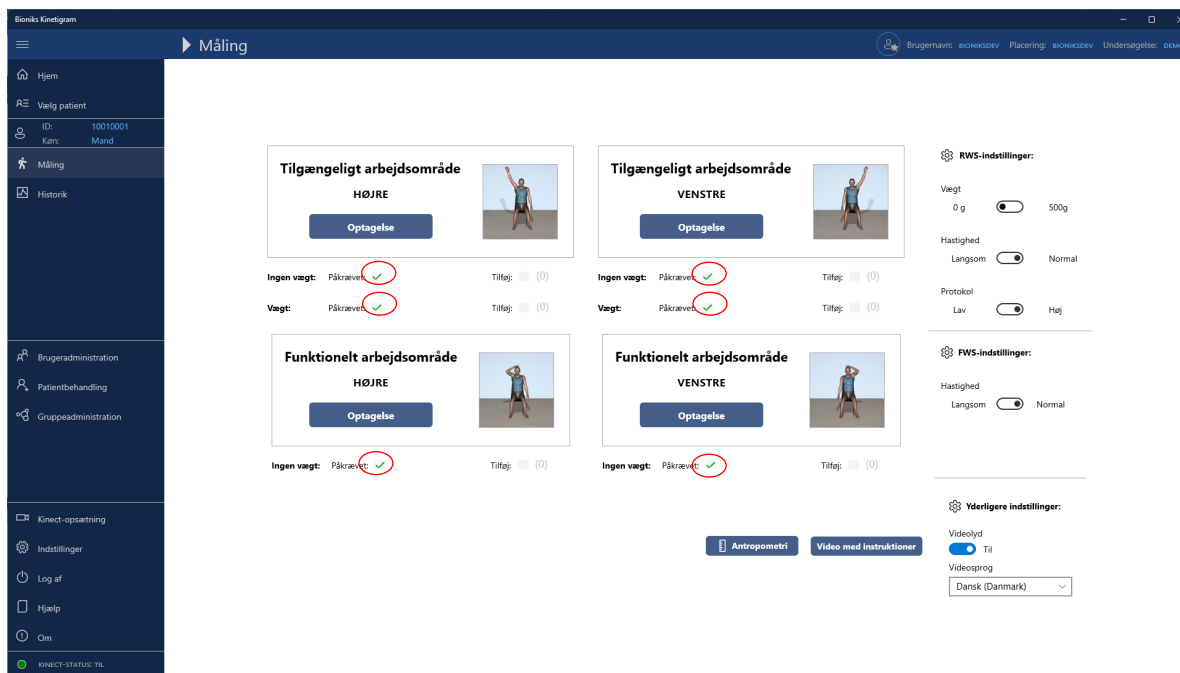

Du bør endvidere bekræfte vurderingerne ved at klikke på siden [Historik](#) på menuen. Dette åbner Historik-siden med samtlige optagelser til dato for den pågældende patient. Bemærk, at du kan filtrere efter vurderingstype. Fra denne side kan du hente rå ASCII-data for hver måling ved at højreklikke på en måling og vælge Hent data. Der henvises til Appendiks A for en beskrivelse af ASCII-dataformatet.

Patient-ID: 10010001

Filter efter test: Vælg test

☒ Vis kun i dag ☐ Filter til

Evalueringshistorik

Date	Tidspunkt	Evaluering	Protokol	Hastighed	Vægt	Billeder	Bemærkninger
10-04-2022	1455	Venstre funktionelt arbejdsområde	Standard	Almindelig	☐	111	
10-04-2022	1455	Højre funktionelle arbejdsområde	Standard	Almindelig	☐	66	
10-04-2022	1454	Arbejdsområde, der kan nås til venstre	Høj	Almindelig	☒	246	run 2
10-04-2022	1449	Højre tilgængelige arbejdsområde	Høj	Almindelig	☒	789	run 3
10-04-2022	1449	Arbejdsområde, der kan nås til venstre	Høj	Almindelig	☐	789	run 2
10-04-2022	1447	Højre tilgængelige arbejdsområde	Høj	Almindelig	☐	789	run 1

Elementer: 6

8.6 Kinect-systemtjek ved udførelse af målinger

Kinect-systemtjek foretages ved starten af hver målingssession for at sikre gyldigheden af data. Som nævnt tidligere skal alle elementer have grønne flueben, når målingen starter.

Hvis der er fejl, vises en pop op-dialogboks, og målingen stoppes midlertidigt. Kinect-systemtjekdialogboksen indeholder oplysninger om, hvilke elementer ikke er gyldige. Du kan klikke på listen for at få flere oplysninger om løsning af problemet.

Kinect systemtjek

Nogle af kravene til målingen er ikke opfyldt.

- Kontroller venligst nedenstående punkter, og juster systemet.
- Tryk på [Continue] knappen for at fortsætte, når alle punkter er grønne.
- Hvis du har tillid til, at systemet er konfigureret korrekt, skal du trykke på [Override] for at fortsætte med fejl.



- ☒ Kinect-effekt
- ☒ Enkelt skelet til stede
- ☒ Skelet sporet
- ☐ Hele kroppen synlig
- ☒ Gulvsynlighed

Alle afkrydsningsfelter skal være grønne. Klik på de viste elementer for at få flere oplysninger.

Element OK

Fortsæt

Tilsidesæt


Annuller

Når alle problemer er blevet afhjulpnet, aktiveres funktionen **Fortsæt**, så du kan fortsætte målingen. Vinduet lukkes, og nedtællingen starter igen, så patienten kan gøre sig klar til målingen.

Kinect systemtjek

Nogle af kravene til målingen er ikke opfyldt.

- Kontroller venligst nedenstående punkter, og juster systemet.
- Tryk på [Continue] knappen for at fortsætte, når alle punkter er grønne.
- Hvis du har tillid til, at systemet er konfigureret korrekt, skal du trykke på [Override] for at fortsætte med fejl.

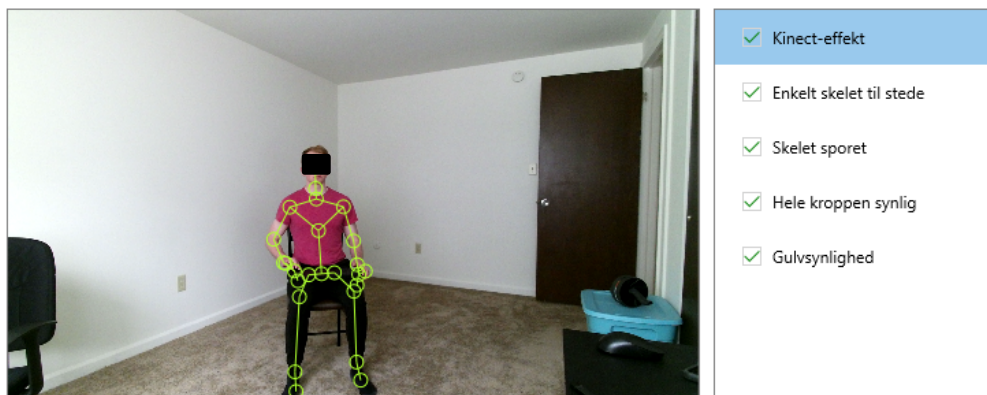

Alle afkrydsningsfelter skal være grønne. Klik på de viste elementer for at få flere oplysninger.

Element OK

Fortset

Tilsidesæt

Annuller

Kinect-systemtjekket gør det også muligt at fortsætte målingen med fejl, hvis der trykkes på knappen [Tilsidesæt](#).

Vigtigt: En tilsidesættelse af Kinect-systemtjekket bør kun anvendes, hvis du er sikker på, at målingen ikke vil blive påvirket af de identificerede problemer (f.eks. fødderne kan ses, men systemet registrerer dem ikke, da de er dækket af skomateriale).

Hvis du ikke er klar til at fortsætte med målingen, kan du også trykke på [Annuller](#) og vende tilbage til den indledende skærm.

8.7 Andre henvisninger

Bemærkning vedrørende RWS- og FWS-dataindtastning (valgfrit)

Vurderingsmodul for høj funktion

Vurderingsmodul for lav funktion

Du kan anvende skabelonen på den næste side til at registrere målinger og indsamle data, samtidig med at du evaluerer en patient. Denne formular er beregnet som en hjælp til indsamling og organisering af oplysninger, der skal indføres i Kinetigram.

Tilgængelig arbejdsområde (RWS) og funktionelt arbejdsområde (FWS) Kildedokument (valgfrit)

*Denne formular er beregnet som en hjælp til indsamling og organisering af oplysninger, der skal indføres i RWS og FWS Kinetigram.

Patient-ID: _____

Dato: _____

Køn (sæt ring): Mand / Kvinde

Hånddominans (håndethed) (sæt ring): Højre / venstre

Højde: _____ cm

Vægt: _____ kg

I. Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)

Længdemålinger af øvre ekstremitet (udfør måling ved hvert besøg):

		Højre	Venstre
1	Sternum-ACJ (incisura suprasternalis til akromioklavikulærled)	cm	cm
2	ACJ-Olec (akromioklavikulærled til olecranon)	cm	cm
3	Olec-UlnSty (olecranon til styloideus ulnae)	cm	cm
4	ACJ-UlnSty (akromioklavikulærled til styloideus ulnae)	cm	cm

Højre arm Ja / nej	Venstre arm Ja / nej
-----------------------	-------------------------

Kan deltageren bøje armen fremad til 60 grader eller højere? (Sæt ring)

Hvis Ja, vælg **Højt funktionelt modul**

Hvis Nej, vælg **Lavt funktionelt modul**

*Bemærk venligst, under et besøg, at den ene arm kan bestemmes til at være højt funktionel, mens den anden arm kan være lavt funktionel.

II. Funktionelt arbejdsområde (FWS) – Observer, om deltageren kan berøre disse SYV mål på kroppen, og markér det relevante felt for at angive "Ja".

	Kropsmål	Højre	Venstre
1	Navlen		
2	Baglomme		
3	Samme skulder		
4	Modsatte skulder		
5	Munden		
6	Toppen af hovedet		
7	Bag på hovedet		

9 Videoprotolkopier

Instruktionsvideo:

Om lidt får du vist en video, der demonstrerer forskellige armbevægelser. Målet med denne øvelse er at måle skulderens bevægelser i alle retninger. Prøv at følge bevægelserne og hastigheden så godt du kan. Du må kun løfte armen så højt som den kan komme.

Du starter med armen langs siden af kroppen. Du vil blive bedt om at bevæge armen til siden,

og derpå løfte armen 45 grader, dvs. diagonalt i forhold til kroppen,

og til sidst løfter du armen op foran dig. Når du bliver bedt om at bevæge armen tværs over kroppen, betyder det til den modsatte hofte i bæltes højde og til den modsatte skulder, hvis du kan. Du må godt bøje albuen under disse to handlinger. Ellers skal du holde armen udstrakt. Hold en kort pause ved afslutningen af alle armbevægelser.

Husk, at du ikke må bøje albuen,

hold ryggen ind imod stolen, drej ikke fra side til side,

og læn dig ikke forover.

Lyt til instruktionerne og følg armbevægelserne som de vises på skærmen.

Tilgængeligt arbejdsområde - HØJT FUNKTIONEL

Start med armen langs siden og håndfladen vendt fremad og tommelfingeren til siden, og løft armen op mod hovedet så højt den kan komme.

Hold derefter armen i en vinkel på 45 grader, og løft den ved hovedet så højt den kan komme.

Før derefter armen fremad og op, så højt den kan komme.

Før derefter armen tværs over kroppen, så højt den kan komme.

Før hånden til siden af kroppen, i bæltehøjde, og flyt den tværs over kroppen mod den modsatte hofte. Du må godt bøje albuen. Før den dernæst bagud så langt den kan komme.

Med armen udstrakt fører du dernæst hånden op til skulderniveau og tværs over kroppen mod den modsatte skulder. Du må godt bøje albuen. Før den dernæst bagud så langt den kan komme.

Løft dernæst hånden op over skulderen, og bevæg den tværs over kroppen.

Med håndfladen ind imod benet og tommelfingeren fremad strækker du armen ud bag dig så langt den kan komme, og hold den der et øjeblik.

Tilgængeligt arbejdsområde - LAVT FUNKTIONEL

Start med armen langs siden og håndfladen vendt fremad og tommelfingeren til siden, og løft armen så højt den kan komme.

Hold derefter armen i en vinkel på 45 grader, og løft den så højt den kan komme.

Før derefter armen fremad og op, så højt den kan komme.

Før derefter armen tværs over kroppen, så højt den kan komme.

Før hånden til siden af kroppen, i bæltehøjde, og flyt den tværs over kroppen mod den modsatte hofte. Du må

godt bøje albuen. Før den dernæst bagud så langt den kan komme.

Med håndfladen ind imod benet og tommelfingeren fremad strækker du armen ud bag dig så langt den kan komme, og hold den der et øjeblik.

Funktionelt arbejdsområde – højre side

Start med højre hånd langs siden. Før den fremad på kroppen til bælt niveau og derefter til baglommen, op til højre skulder, og derefter til venstre skulder. Hvis du kan, fører du hånden hen til munden, rør ved toppen af hovedet og dernæst bag på hovedet. Før nu hånden tilbage til startpositionen langs siden.

Funktionelt arbejdsområde – venstre side

Start med venstre hånd langs siden. Før den fremad på kroppen til bælt niveau og derefter til baglommen, op til venstre skulder, og derefter til højre skulder. Hvis du kan, fører du hånden hen til munden, rør ved toppen af hovedet og dernæst bag på hovedet. Før nu hånden tilbage til startpositionen langs siden.

10 Præstationsevne


Kinetigram klientapplikationen registrerer bevægelse ved at spore placeringen af 25 landemærker på kroppen (led) i et tredimensionelt område med en minimal billedhastighed på 15 Hz og en maksimal billedhastighed på 30 Hz. Målingerne, der lagres i softwaren, optages i en enhed på millimeter og inkluderer tidsstempler med millisekunders nøjagtighed for hvert optaget billede.

11 Fejlfinding

11.1 Problem med forbindelsen til serveren

Problem 1: Netværk ikke fundet.

Fejlmeddelelse: Ved indlæsning af programmet vises den følgende fejlmeddelelse:

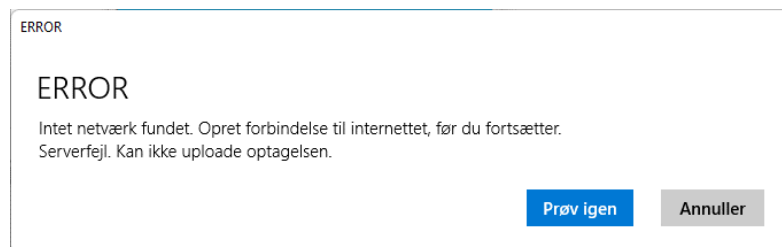


Årsag: Computeren er ikke koblet til internettet. Appen kræver en internetforbindelse.

Løsning: Tjek din internetforbindelse (Wi-Fi eller kabelforbundet). Kontakt din IT-afdeling, hvis du ikke kan oprette en internetforbindelse. Hvis du bruger en Wi-Fi-forbindelse på et mobilt hotspot eller lignende forbindelse med begrænset båndbredde, skal du sikre dig, at det mobile hotspot eller computeren er placeret på et sted, der har tilstrækkelig signalstyrke.

Problem 2: Siden svarer ikke. Der indlæses ikke noget indhold.

Fejlmeddelelse: *Serverfejl...* [Fejlmeddelelsen kan inkludere andre oplysninger vedrørende serverkommunikation]

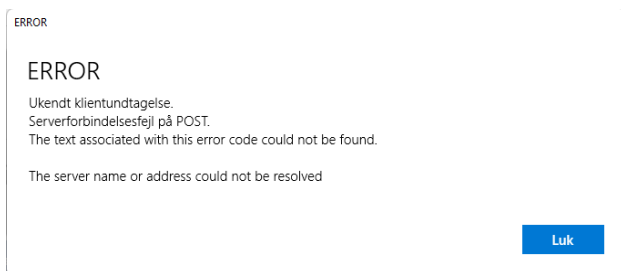


Årsag: Programmet kan ikke få forbindelse til serveren.

Løsning: Tjek din internetforbindelse. Luk eventuelt programmet, og log på igen. Hvis du bruger en Wi-Fi-forbindelse på et mobilt hotspot eller lignende forbindelse med begrænset båndbredde, skal du sikre dig, at det mobile hotspot eller computeren er placeret på et sted, der har tilstrækkelig signalstyrke.

Problem 3: Jeg kan ikke logge på

Fejlmeddelelse: Login mislykkedes. Kontrollér venligst dine brugeroplysninger.

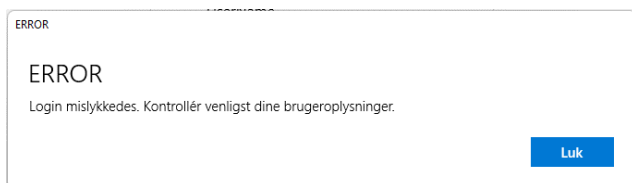


Årsag: Dine brugeroplysninger er forkerte.

Løsning: Tjek dine brugeroplysninger. Hvis de brugeroplysninger, du bruger, er korrekte, og du har forsøgt at nulstille adgangskoden, skal du kontakte Bioniks-teamet på help@bionks.net.


Problem 4: Kan ikke logge på med korrekte brugeroplysninger

Fejlmeddelelse: Dit login-token er udløbet, eller dato/klokkeslæt kan være forkert. Kontrollér systemets indstillinger for dato/klokkeslæt og tidszone.

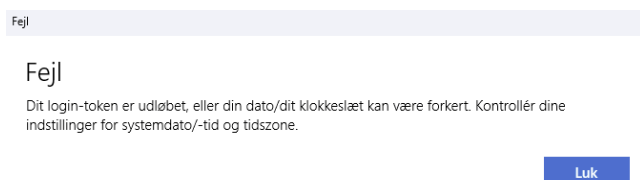


Årsag: Computerens dato/klokkeslæt eller tidszone kan være forkert.

Løsning: Kontrollér uret/datoen i Windows på din computer. Et forkert klokkeslæt kan forhindre autentificering på serveren. Du kan justere datoen/klokkeslættet ved at højreklikke på datoen/klokkeslættet på værktøjslinjen (orange pil).

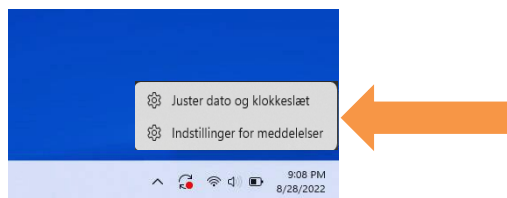

11.2 Problemer med Kinect

Problem 1: Kinect-statuslinjen under menuen viser en rød indikator og en FRA-status.

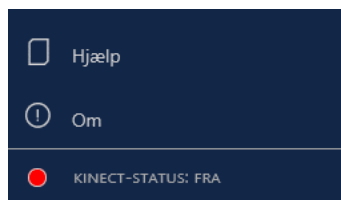

Årsag: Kinect er muligvis ikke koblet til computeren.

Løsning 1: Afslut programmet. Kontrollér, at Kinect er koblet til stikkontakten. Kontrollér, at strømforsyningen til Kinect er slået til. Lampen på konnektoren skal lyse gult eller hvidt.


Løsning 2: Afslut programmet. Kontrollér, at Kinect er koblet til den korrekte USB 3.0-port på computeren som beskrevet i afsnittet om opsætning.

Løsning 3: Kontrollér, om der er ventende Windows-opdateringer. Genstart computeren, og installer eventuelle ventende opdateringer.

Løsning 4: Afslut programmet. Start computeren igen. Kør programmet igen.

Problem 2: Kinect-videoen er frosset eller skærmen er sort under målingssessionen.

Fejlmeddelelse: Kinect ser ikke ud til at være tilsluttet. Luk appen, og kontrollér forbindelserne.

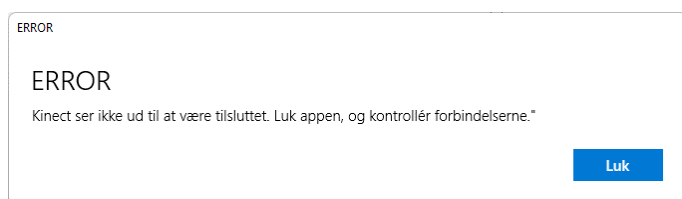

Årsag: Kinect er muligvis ikke koblet til computeren.

Løsning 1: Afslut programmet. Kontrollér, at Kinect er koblet til stikkontakten. Kontrollér, at strømforsyningen til Kinect er slået til. Lampen på konnektoren skal lyse gult eller hvidt.


Løsning 2: Afslut programmet. Kontrollér, at Kinect er koblet til den korrekte USB 3.0-port på computeren som beskrevet i afsnittet om opsætning.

Løsning 3: Tjek for at se, om der er ventende Windows-opdateringer ved at skrive "Søg efter opdateringer" i Windows-søgefeltet. Genstart computeren, og installer eventuelle ventende opdateringer.

Løsning 4: Log af og afslut programmet. Start computeren igen. Kør programmet igen.


Problem 3:

Fejlmeddelelse: Appen fik nægtet adgang til kameraet. Nægter adgang.

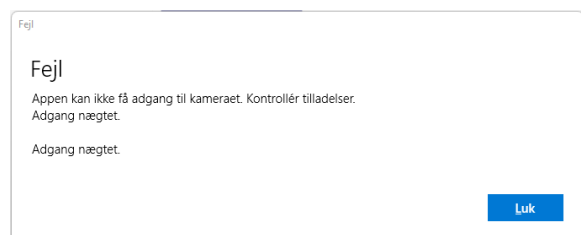

Årsag: Appen har ikke lov til at få adgang til kameraet.


Løsning: Søg efter [Beskyttelse af personlige oplysninger](#) på Windows-værktøjslinjen. Vælg [Kamera](#) under [App-tilladelser](#) og sørg for, at Bioniks Kinetigram har aktiveret adgangen til kameraet (on/off-knappen er slået til).

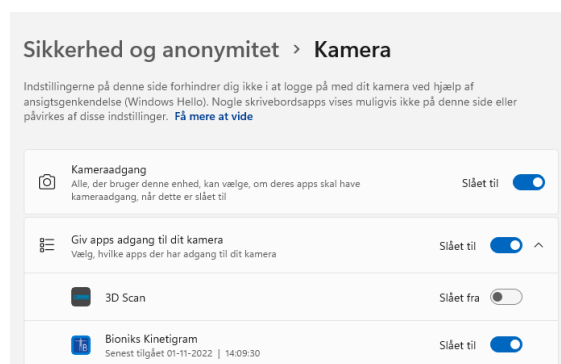


11.3 Software- og hardwareproblemer

Problem 1: Teksten på softwares brugergrenseflade er meget stor eller meget lille og/eller dele af programmet kan ikke ses.

Løsning: Luk appen. Kontrollér dine skærmindstillinger. Højreklik på skrivebordet i Windows og vælg [Skærmindstillinger](#):

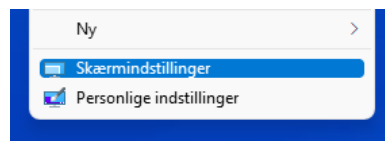

Vælg din skærm og justér tekstskalering og opløsning. Den anbefalede opløsning er 1920x1080 (skalering 100 %). For andre skærmindstillinger skal disse to parametre imidlertid muligvis justeres (f.eks. en 4K monitor fungerer muligvis bedst med 3840x2160px og 225 % skalering).

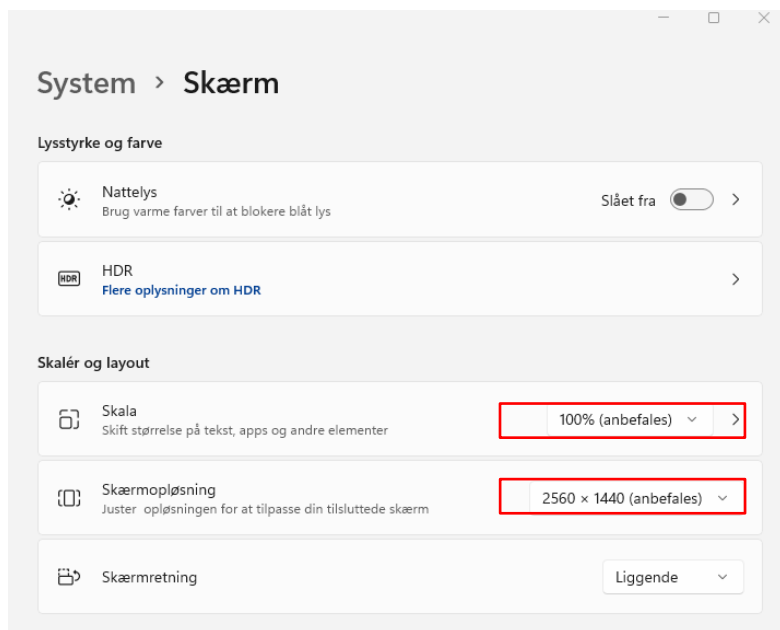

Genstart Kinetigram-applikationen efter indstillingen af skærmstørrelsen.

Problem 2: Softwaren fryser pludseligt og reagerer ikke.

Løsning: Prøv at lukke applikationen. Hvis den kan lukkes. Start applikationen igen.

Problem 3: Softwaren går pludselig ned (vinduet forsvinder).

Løsning: Prøv at starte applikationen igen. Hvis dette ikke løser problemet, startes computeren igen.

Problem 4: Der opstår en strømafbrydelse under vurderingen.

Løsning: Vent på, at strømmen vender tilbage, og start computeren. Start Kinetigram-applikationen, log på med dine brugeroplysninger og vælg den patient, der bliver evalueret. Den evaluering, der ikke kunne fuldføres pga. af strømafbrydelsen, skal gøres om.

Problem 5: Computeren starter eller indlæser ikke.

Løsning: Kontakt Bioniks-teamet på help@bioniks.net

Problem 6: Skærmen viser ikke programmet korrekt eller "vågner ikke", når der gøres forsøg på at få adgang til softwaren.


Løsning: Bekræft, at skærmkablet er tilsluttet den korrekte port: NVIDIA HDMI-port (hvis den findes). Hvis problemet fortsætter, skal du slukke for skærmen og tænde for den igen. Hvis ovenstående to trin ikke retter problemet, så kontakt Bioniks Service på help@bioniks.net.

11.4 Andre problemer - kontakt Bioniks-teamet


Hvis de ovenstående løsninger ikke afhjælper problemet, bedes du kontakte Bioniks-teamet på help@bioniks.net

Tag eventuelt skærbilleder af fejlene.

Du vil muligvis blive bedt om at sende softwarelogfiler. Disse logge kan hentes fra afsnittet Indstillinger. Vælg Indstillinger på menuen (gul pil), og klik dernæst på knappen **Download** under Logging (grøn pil).

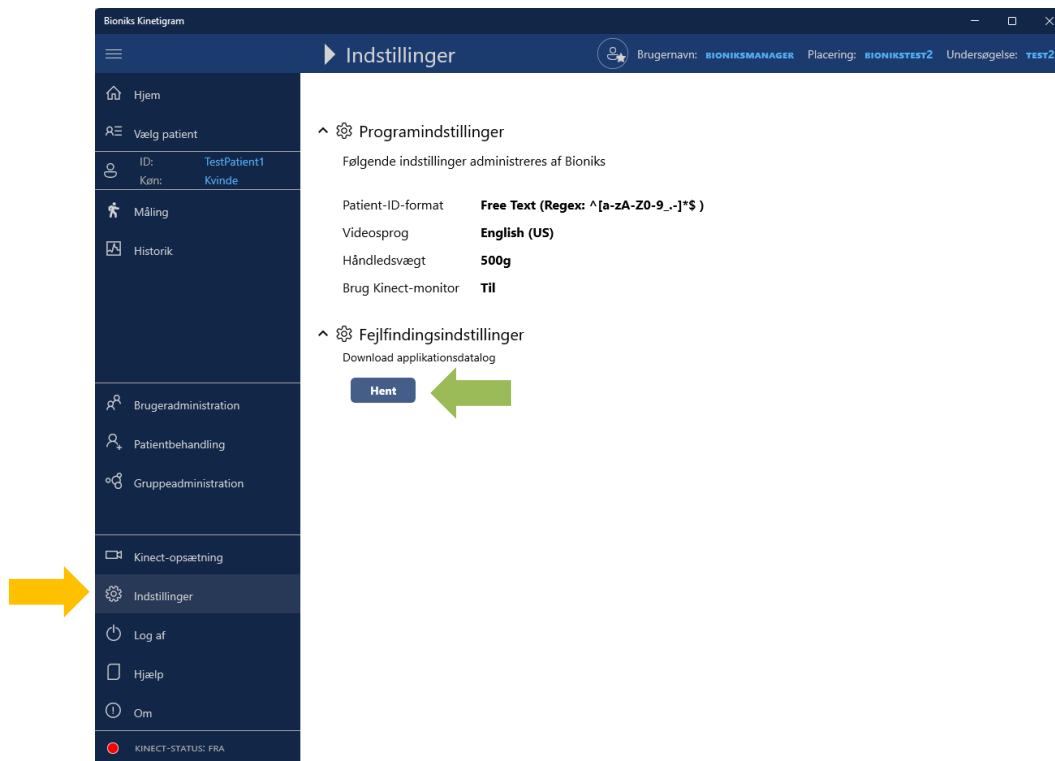

Du vil blive bedt om at gemme filen.

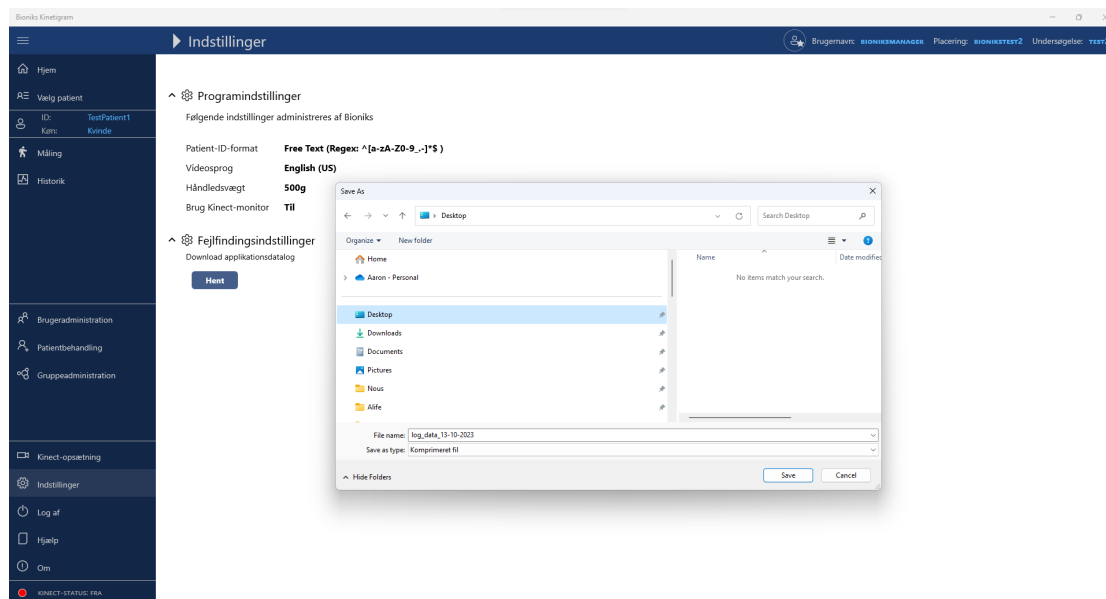

Gem filen, og send den via e-mail til Bioniks-teamet.

11.5 Fjernadgang for Bioniks Team Support

Hvis problemet med Kinetigram-programmet eller computeren ikke kan afhjælpes via e-mail, er det muligvis nødvendigt for Bioniks-teamet at få fjernadgang til din computer. Computeren er typisk forudinstalleret med fjernadgangssoftware, enten Splashtop eller TeamViewer. Hvis der er behov for yderligere trin, vil Bioniks-teamet give specifikke instruktioner.

12 Auditeringslogfiler

Adgang til auditeringslogfiler er kun tilgængelig for brugere med rollen Auditor. Denne rolle er typisk kun forbeholdt Bioniks-administrator. Auditeringslogfilerne for den aktive bruger er tilgængelige ved at vælge [Indstillinger](#) i menuen. For at downloade logfilerne skal du klikke på knappen [Download](#) i afsnittet [Auditeringslogfiler](#) og vælge destinationsfilen på din lokale computer. Klik på [Gem](#), og vent, indtil downloadningen er gennemført. Auditeringslogfilerne leveres i formatet kommaseparerede værdier (CSV).

13 Indberetning

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med udstyret, skal indberettes til Bioniks og til de relevante forordningsmæssige myndigheder i dit land (kaldet bemyndiget organ). En alvorlig hændelse er en hændelse, der har resulteret i ethvert af følgende:

- Død
- Alvorlig forværring af forsøgspersonens helbredstilstand, som har resulteret i ethvert af følgende:
 - (i) livstruende sygdom eller tilskadekomst,
 - (ii) permanent svækkelse af en struktur eller funktion i kroppen,
 - (iii) indlæggelse på sygehus eller forlængelse af indlæggelsen af patienten,
 - (iv) medicinsk eller kirurgisk intervention for at forhindre livstruende sygdom eller skade eller permanent forringet funktionalitet af en struktur eller funktion i kroppen,
 - (v) kronisk sygdom,
- føtal nød, føtal død eller medfødt fysisk eller mental svækkelse eller fødselsskade.


Informér venligst Bioniks via e-mail til help@bioniks.net, og inkludér produktets versionsnummer (findes i feltet Om), datoen for hændelsen og detaljer om hændelsen.

14 Dekommissionering

Dekommissionering af Kinetigram-software foretages af Bioniks Service ved afslutningen af anvendelsen. Kinetigram-applikationen fjernes fra alle konti på computersystemet, og alle konfigurationsfiler slettes. Kinetigram-applikationen lagrer ingen patient- eller brugerdata på det lokale system. Patient- og brugerdata lagres på et dedikeret sted i skyen. Hvis din lejerkonto også lukkes, vil alle bruger- og patientdata blive håndteret i overensstemmelse med aftalen med lejerkontoindehaveren (f.eks. dataarkivering, datafjernelse).

Kontakt venligst Bioniks Service vedrørende dekommissionering af Kinetigram-software på help@bioniks.net.

15 Hurtigvejledning

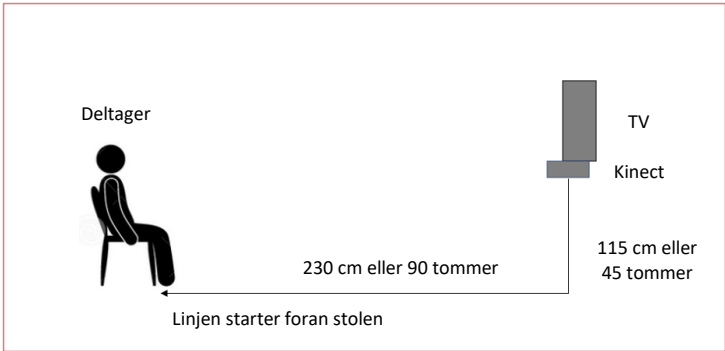

Evaluering	Modul	Side	Vægt
1	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Højre	Nej
2	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Venstre	Nej
3	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Højre	Ja, 500g
4	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Venstre	Ja, 500g
5	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Højre	Nej
6	Tilgængeligt arbejdsområde (RWS)	Venstre	Nej



Hjem

Vælg patient

ID: 12345678

Køn: Mand

Måling

Historik

Brugeradministration

Patientbehandling

Gruppeadministration

Kinect-opstilling

Indstillinger

Log af

Hjælp

Om

KINECT-STATUS: TIL

Måling

Brugernavn: BIONIKSDEV Placering: BIONIKSDEV Undersøgelse: DEMO

Tilgængeligt arbejdsområde

HØJRE

Optagelse

Ingen vægt: Påkrævet: ☐ Tilføj:

Vægt: Påkrævet: ☐ Tilføj:

Tilgængeligt arbejdsområde

VENSTRE

Optagelse

Ingen vægt: Påkrævet: ☐ Tilføj:

Vægt: Påkrævet: ☐ Tilføj:

Funktionelt arbejdsområde

HØJRE

Optagelse

Ingen vægt: Påkrævet: ☐ Tilføj:

Funktionelt arbejdsområde

VENSTRE

Optagelse

Ingen vægt: Påkrævet: ☐ Tilføj:

Antropometri

Video med instruktioner

RWS-indstillinger:

Vægt: 0 g ☐ 500g

Hastighed: Langsom ☐ Normal

Protokol: Lav ☐ Høj

FWS-indstillinger:

Hastighed: Langsom ☐ Normal

Yderligere indstillinger:

Videolyd: ☒ Til

Videosprog: English (US)

RWS
Parametre

FWS
Parametre

Protokolvalg

Side 60 af 63

16 Appendiks A: Måledataformat til eksport

16.1 Filformat

Ved at bruge dataeksportfunktionen i Kinetigram-brugergrænsefladen dannes der en ASCII-fil, der indeholder måledata (skelet) for en enkelt måling. Filen gemmes i dette standardformat: *[patient_id]_[[ÅÅÅÅ-MM-dd]-[Evalueringsnavn].txt*, medmindre brugeren vælger et brugertilpasset navn under fileksporten.

Skeletdata lagres i den eksporterede ASCII-fil i det følgende format (hver linje er defineret herunder).

```
1 4 399 22.339 1559597885 45000 1
2 1 0 0 0 0 -0.106576 -0.9943045 0 0 0.9943045 -0.106576 0 0 0 0 1
3 1669 40
4 4 194.8973 -1189.81 -641.7673 181.4502 -1239.118 -354.7636 165.9387 -1272.167 -75.4511 118.8528 -1275.584
66.87695 8.992752 -1341.531 -188.045 -7.303061 -1323.103 -451.1639 -38.2849 -1178.362 -641.8266 -25.97022
-1131.252 -627.8994 329.1897 -1209.943 -147.0807 472.5066 -1055.39 -172.0084 531.9854 -860.2631 -121.6273
526.4506 -849.414 -107.7036 115.159 -1181.064 -638.5977 -75.88136 -894.8329 -576.7145 -275.5174 -613.6846
-522.7556 -315.4126 -491.2498 -481.6838 265.1941 -1142.75 -614.9377 394.0589 -758.9908 -585.5616 496.4054
-472.6153 -568.6656 450.9759 -347.501 -528.6959 170.0748 -1266.352 -144.1324 -50.63766 -1071.792 -636.3106
-62.08339 -1103.618 -651.3463 531.8972 -783.4961 -73.39566 518.698 -776.9888 -117.8638
5 4 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
6
7 4 400 22.377 1559597885 82000 1
8 1 0 0 0 0 -0.1076432 -0.9941896 0 0 0.9941896 -0.1076432 0 0 0 0 1
9 1669 40
10 4 194.7695 -1189.329 -642.7255 181.4013 -1238.958 -355.9482 165.9751 -1272.289 -76.79041 118.7541 -1275.711
65.47572 10.20862 -1341.304 -188.0502 -7.096902 -1322.078 -452.3699 -38.76529 -1180.692 -650.7208 -25.94866
-1132.598 -630.0411 327.6746 -1208.49 -146.5651 470.9203 -1051.601 -148.8448 529.9245 -860.0125 -86.204
524.1371 -839.9326 -53.49569 115.0653 -1181.157 -639.5438 -75.47367 -894.543 -578.1636 -274.6686 -612.8696
-524.7296 -315.1109 -490.7507 -483.6104 265.0025 -1141.922 -615.6357 394.6768 -758.4405 -587.3826 497.6772
-472.174 -571.3522 451.7534 -347.2575 -531.3791 170.0906 -1266.409 -145.4393 -46.25969 -1057.706 -627.926
-49.2795 -1088.952 -639.1887 527.2102 -778.1188 2.46756 525.1263 -800.885 -68.29763
11 4 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
12
```

1. Linje 1

[formatversion = 4] [billednummer] [tid fra start, i sekunder] [unix epoch-tid i sekunder] [unix epoch-tid i mikrosekunder] [antal registrerede skeletter]

BEMÆRK: De følgende linjer inkluderes kun, hvis der blev registreret mindst ét skelet.

2. Linje 2

[row-major homogen transformationsmatrix (4x4); Kinect-kamera i globalt koordinatsystem]

3. Linje 3

[formatflag] [format for afgrænsningstegn]

4. Linje 4

[formatversion] [x y z globale koordinater for alle 25 led i enheder på mm]

BEMÆRK: Der henvises til nedenstående vektor for 3D-koordinater for at se rækkefølgen af datapunkter i relation til skeletled


5. Linje 5

[formatversion] [synlighed af led for alle 25 led: 0-ikke synligt, 0,5-udledt, 1-synligt]

16.2 Vektor for 3D-koordinater for alle 25 led

[x y z]-koordinater for alle 25 led er angivet i denne rækkefølge:

1. RygsøjleBund
2. RygsøjleMidt
3. Hals
4. Hoved
5. SkulderVenstre
6. AlbueVenstre
7. HåndledVenstre
8. HåndVenstre
9. SkulderHøjre
10. AlbueHøjre
11. HåndledHøjre
12. HåndHøjre
13. HofteVenstre
14. KnæVenstre
15. AnkelVenstre
16. FodVenstre
17. HofteHøjre
18. KnæHøjre
19. AnkelHøjre
20. FodHøjre
21. RygsøjleSkulder
22. HåndSpidsVenstre
23. TommefingerVenstre
24. HåndSpidsHøjre
25. TommefingerHøjre

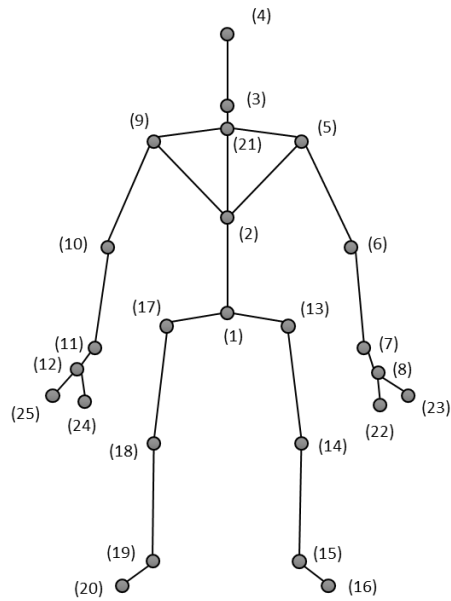

Autoriseret repræsentant i Europa:

CMC Medical Devices & Drugs, S.L.
C/ Horacio Lengo n18
C.P 29006
Málaga, Spanien

Importør:

Den Europæiske Union
MedEnvoy Global BV
Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM The Hague
Holland



Bemærk: En papirkopi af denne brugsanvisning fås ved at kontakte Bioniks-teamet (help@bioniks.net).